

НАБОР ДЛЯ МЕЗОПОРАЦИИ

Прибор для ухода за кожей

MEZOLIGHT M9900

+ Коктейль «SuperLift» MESODERM, 5 мл (10 шт.)

или Коктейль подтягивающий с эластином,
DMAE и витамином С, 5 мл (блистер 10 шт.)



*Ваше лицо в двадцать лет дано
вам природой, каким оно будет
в пятьдесят, зависит от Вас!*

Коко Шанель



Инновационные технологии для Вашей красоты

Легкий, эргономичный аппарат **MezoLight** позволяет проводить интенсивно омолаживающие процедуры на лице и в области декольте. Большая площадь контактного электрода позволяет быстро и комфортно провести процедуру с использованием **5-ти уникальных косметологических технологий!**

- ✓ «Мезопорация» – «мезотерапия без иглы»
- ✓ Электропорация
- ✓ Электромиостимуляция (ЭМС)
- ✓ Биотоки высокой частоты
- ✓ Хромотерапия



Мезопорация

- Мезопорация является аппаратной процедурой, во время которой активные компоненты коктейлей проникают глубоко в кожу, как при мезотерапии, но при этом кожные покровы остаются абсолютно не поврежденными. Более того, при мезопорации эффект появляется намного быстрее, чем при мезотерапии, изменение цвета лица и текстуры кожи Вы видите сразу после первого воздействия. К тому же, процедура занимает небольшое количество времени.

МЕЗОПОРАЦИЯ – СОВРЕМЕННАЯ АЛЬТЕРНАТИВА МЕЗОТЕРАПИИ

- Без нарушения целостности кожи
- Без боли и негативных ощущений
- Без уколов и игл
- Без синячков и отеков
- Без риска осложнений и воспалений



Препараты для мезопорации - Коктейль

Мезопорация способствует более глубокому проникновению активных компонентов в глубокие слои кожи, но для получения максимального эффекта необходимо применять специальные косметические средства, формула которых не подвергается изменению посредством импульсов.



Коктейль "SuperLift" MESODERM, 5мл (10 шт)

- Концентрированный коктейль, предназначенный для решения проблем увядающей кожи всех типов, а также для профилактики преждевременного старения.
- Использование коктейля в сочетании с прибором оказывает выраженный лифтинговый эффект, увлажняет и повышает эластичность кожи.
- Позволяет моментально подтянуть кожу, разгладить мелкие морщинки и улучшить цвет лица.
- Основными показаниями являются возрастные изменения стрессовая кожа, снижение тонуса и тургора, темные круги под глазами, сухость кожи, морщины.
- Коктейль "SuperLift" Mesoderm содержит активные компоненты для сохранения молодости кожи и предотвращения возрастной пигментации. Коктейль стимулирует синтез коллагена и эластина, обладает антиоксидантным действием. В состав коктейля входят такие популярные омолаживающие компоненты, как гиалуроновая кислота и нуклеиновые кислоты, которые омолаживают и укрепляют кожу изнутри.

Коктейль подтягивающий с эластином, DMAE и витамином С для лица и тела, 5мл MESODERM

Компоненты коктейля в сочетании с действием прибора:

- ✓ Активизируют процессы синтеза коллагена, эластина и других структурных компонентов соединительной ткани.
- ✓ Нейтрализуют действие свободных радикалов.
- ✓ Повышают упругость и тонус кожи, уменьшая видимые признаки старения.




Коктейль применяется не только для коррекции возрастных изменений, но и для профилактики преждевременного старения, а также:

- ✓ для устранения последствий стресса,
- ✓ резкого снижения веса,
- ✓ хронической усталости.

Коктейль подтягивающий с эластином, DMAE и витамином С для лица и тела, 5мл MESODERM



ДМАЕ — это гиалуроновая кислота, α -липоевая кислота, органический кремний, идеален для борьбы с несовершенствами кожи лица, шеи и зоны декольте, заставляет нашу кожу сиять, эффективно борется с дряблостью кожи, морщинами на лице, шее, в зоне декольте, сокращает пигментные пятна, выравнивает кожный рельеф. Восстанавливает тонус и упругость мышц, повышает плотность кожи, снимает воспаления на коже, позволяет получить мощный эффект лифтинга.

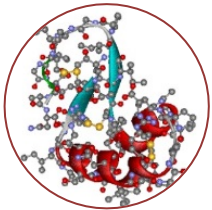


ЭЛАСТИН стимулирует синтез новых молодых волокон эластина, повышает эластичность кожи



ВИТАМИН С необходим для формирования волокон коллагена, для защиты тканей организма от свободных радикалов.

Электромиостимуляция

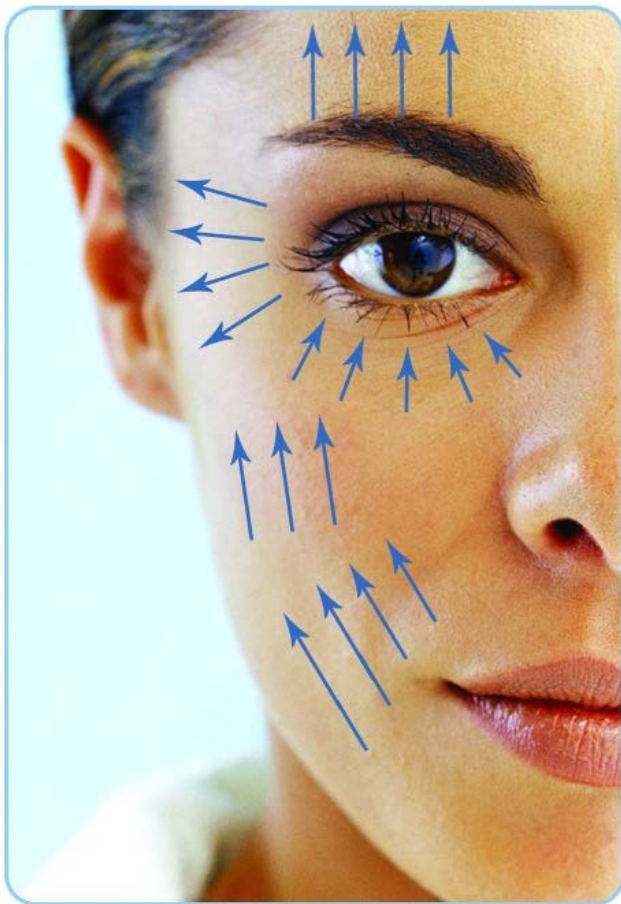


- Электромиостимуляция (ЭМС) деликатно стимулирует мышечные сокращения, заставляя лицевые мышцы работать.
- Усиливаются обменные процессы и кровообращение, что улучшает состояние кожи.
- Результат – **ЭЛАСТИН** стимулирует синтез новых молодых волокон эластина, повышает эластичность кожи
- **ВИТАМИН С** необходим для формирования волокон коллагена, для защиты тканей организма от свободных радикалов.
- Укрепление мышц и подтяжка кожи лица, коррекция овала и укрепление тонуса кожи.
- Обновленная кожа становится более подтянутой и эластичной, морщины разглаживаются, контур лица подтягивается.

Электропорация

Электропорация используется в медицине и косметологии более 30 лет. За счет воздействия на клетки моделированным электроимпульсным током открываются каналы клеточных мембран, через которые в клетки кожи проникают активно действующие вещества, стимулирующие метаболизм, процессы синтеза коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты.

- Увеличение скорости и глубины проникновения препаратов
- Усиление проницаемости кожи
- Усиление проницаемости клеточных мембран
- Стимуляция синтеза коллагена и эластина

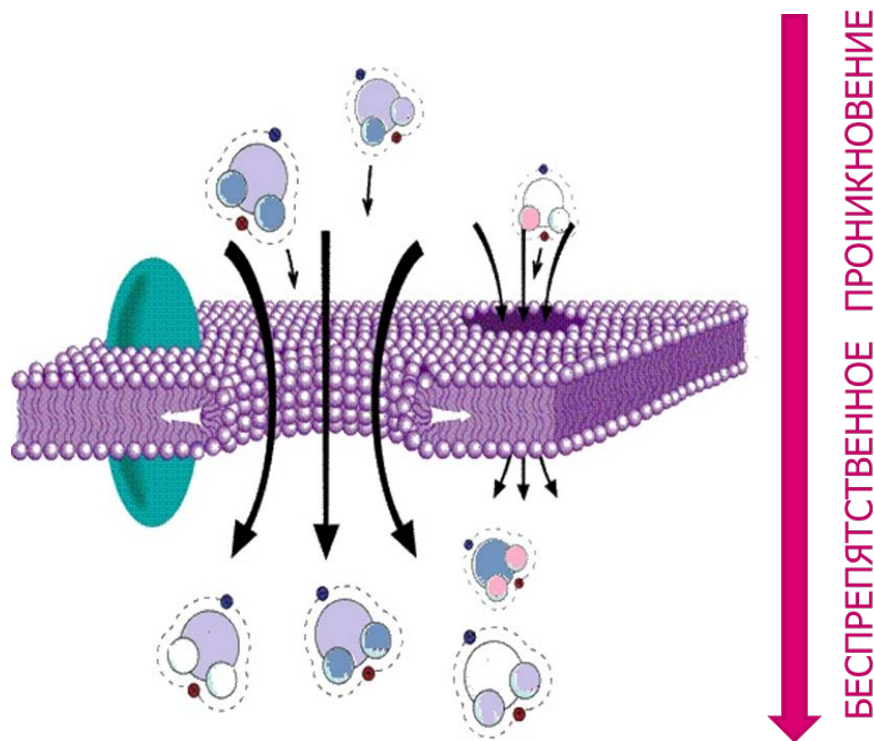

Биотоки высокой частоты

- Биотоки высокой частоты оказывают действие на кожу, мышцы, лимфатические и кровеносные сосуды, создавая стойкий тонизирующий лифтинг-эффект.
- Воздействие на кожу биотоков приводит к возникновению ощущения тепла, усилению кровообращения, стимулирует обменные процессы в клетках кожи, выведение токсинов и выработку коллагена.
- Биотоки используются для нехирургической коррекции возрастных изменений овала лица, разглаживания морщин, устранения отеков.

Несколько минут в день перед зеркалом – и Ваша кожа излучает красоту, свежесть и молодость!

Хромотерапия

ХРОМОТЕРАПИЯ ВОССТАНОВЛИВАЕТ КОЖУ ИЗНУТРИ!



- Сияние цветов возвращает коже свежий и здоровый вид!
- Хромотерапия – популярный и очень эффективный метод.
- В данном аппарате используются по отдельности и в оптимальном сочетании светодиоды красного, голубого, оранжевого и розового цвета.

Эффекты от применения Mezolight:

- Активность косметических средств многократно возрастает. (С прибором рекомендуется применять специальные проводящие гели на водной основе, под которые можно использовать активные сыворотки).
- Повышается выработка собственных «белков молодости» – коллагена и эластина.
- Согласно проведенным исследованиям, после использования аппарата через 28 дней отмечено сокращение глубины морщин на 32%.
- Кожа становится более упругой, гладкой и эластичной овал лица восстанавливается, исчезает проблема второго подбородка и обвисших щек.
- Снимается спазм мимической мускулатуры, провоцирующий образование морщин.

Методика и результат использования ХРОМОТЕРАПИИ

<i>Цвет и длина волны</i>	<i>Действие</i>	<i>Для какого типа кожи</i>	<i>Результат</i>
Красный цвет 620 nm (± 10 nm)	стимулирует клетки, активизирует кровообращение и несет в себе тепло и заряд энергии.	для дряблой, атоничной и уставшей кожи с возрастными изменениями.	активизирует процессы выработки энергии и стимулирует клеточный метаболизм, восстанавливая цвет лица и тонизируя кожу.
Голубой цвет 415 nm (± 10 nm)	стимулирует иммунитет кожи, успокаивает	для раздраженной и склонную к куперозу, для жирной кожи	успокаивает кожу, противовоспалительный эффект, уменьшение расширенных пор.
Оранжевый цвет 590 nm (± 10 nm)	воздействует непосредственно на клетки дермы – фибробласты,	для зрелой, сухой кожи и для профилактики преждевременного старения.	стимулирует процессы выработки коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты, усиливает собственную энергию кожи, способствует увлажнению и разглаживанию морщин
Розовый цвет 700 nm (± 10 nm)	восстанавливает кожу изнутри, возвращает свежий и здоровый вид	подходит для кожи со сниженным тонусом.	делает кожу более эластичной, великолепно улучшает цвет лица.

Противопоказания



- Наличие нарушений чувствительности кожи (болевой и температурной) в области применения аппарата.
- Нарушение целостности кожных покровов, травмы и дерматологические заболевания (экзема, дерматит).
- Острые воспалительные процессы, гнойнички.
- Использование электрокардиостимулятора.
- Период беременности.
- Онкологические заболевания.



Рекомендованный курс процедур

- Процедуры рекомендуется проводить **3 раза в неделю**, курсом 20 процедур.
- Время одной процедуры составляет **10-15 минут**.
- Перед проведением процедуры необходимо нанести на кожу проводящий гель на водной основе.
- Чтобы усилить эффект, рекомендуется использовать косметические сыворотки под гель.
- Проводить процедуру по сухой коже запрещено!





Москва 8 (495) 925-00-34
регионы РФ: 8-800-200-00-34 (звонок бесплатный)
www.sozv.ru

Присоединяйтесь:

 www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty

 facebook.com/sozvezdiekrasoti

 vk.com/sozvezdiekrasoti