

BS245 BIO SONIC GEZATONE

GÉZA *tone*

Прибор для ухода
за кожей
RF-лифтинг,
хромотерапия и
УЗ увлажнение



BS245 Bio Sonic Gezatone

Безоперационная подтяжка и rf-лифтинг кожи, насыщение ее активными компонентами с помощью ультразвуковой мезопорации, разглаживание морщин – все это новый прибор от Gezatone!




Уникальный аппарат, сочетающий в себе
ДВЕ методики омоложения:

- ✓ RF ЛИФТИНГ
- ✓ ХРОМОТЕРАПИЮ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ФУНКЦИЕЙ УЗ УВЛАЖНЕНИЯ

Метод RF-лифтинга

RF-лифтинг – уникальная методика подтяжки лица, основанная на воздействии на кожу радиоволн определенной частоты.

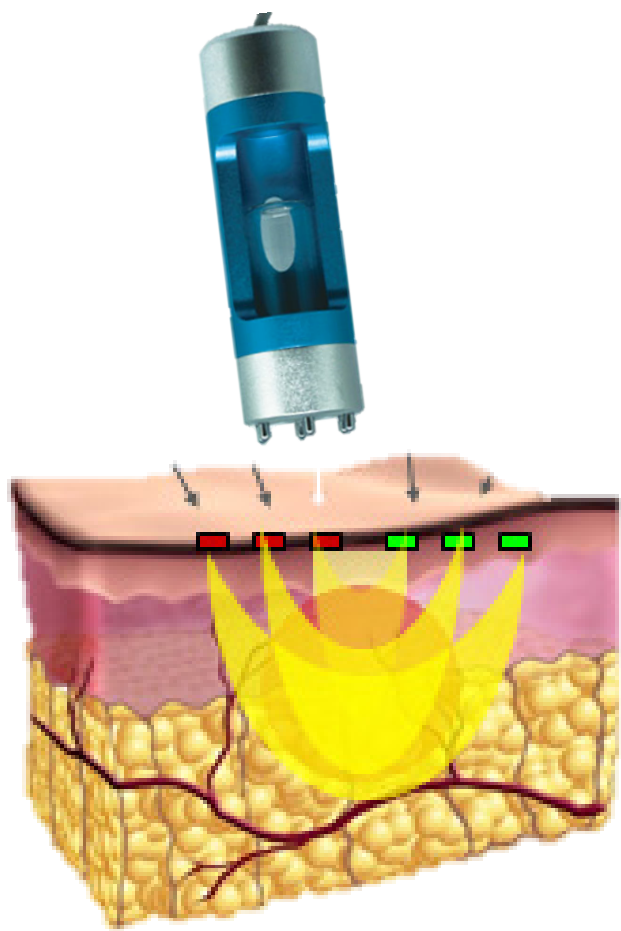

В результате такого воздействия происходит локальное нагревание ткани, которое стимулирует обменные процессы, восстанавливает деформированные волокна коллагена и стимулирует выработку новых волокон этого белка. Таким образом, rf-лифтинг в домашних условиях быстро и эффективно подтягивает кожу и производит накопительный лифтинговый эффект, усиливая выработку новых белков коллагена и эластина!


Метод Хромотерапии



Хромотерапия синего спектра (длина волны $415 \text{ nm} \pm 10 \text{ nm}$) обладает выраженным успокаивающим эффектом, снижает покраснения, восстанавливает тонус стенок сосудов, существенно снижает дискомфорт от процедуры rf-лифтинга.

Кроме того, синий спектр излучения обладает выраженным оздоравливающим действием, он нормализует диаметр пор и повышает тонус кожи.

Функция УЗ-увлажнения

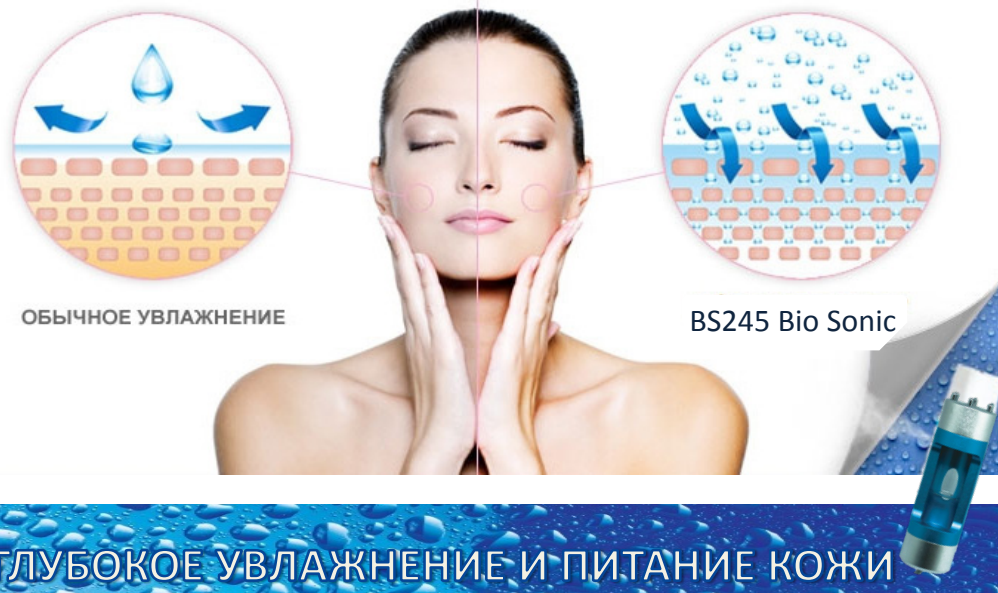


Принцип действия функции УЗ увлажнения: ультразвуковой элемент с частотой колебаний 140кГц, который превращает воду в наночастицы и распыляет их. Мелкодисперсный пар прекрасно усваивается кожей, восстанавливая уровень увлажненности тканей.

- **Поддержание уровня увлажнения кожи.**
- **Уменьшение раздражений.** Использование увлажнителя после косметических процедур, позволяет избавиться от чувства дискомфорта на коже.
- **Распыление косметики.** Использование косметических средств, сывороток и лосьонов на водной основе. УЗ колебания превращают их в наночастицы, в таком виде происходит более, глубокое и эффективное усвоение кожей активных компонентов косметических средств.
- **Лифтинг и разглаживание морщин.** Глубокое проникновение наночастиц косметики дает результат восстановления и глубокого увлажнения, лифтинга кожи и разглаживания морщин (в зависимости от выбора косметического средства).


Сочетание функций

СОЧЕТАНИЕ RF ЛИФТИНГА И УЛЬТРАЗВУКОВОГО УВЛАЖНЕНИЯ

- Позволяет многократно усилить эффект от проводимых процедур, поскольку происходит суммация положительных эффектов от 2-х воздействий.
- RF-лифтинг запускает естественные процессы образования коллагена и способствует формированию нового структурного каркаса кожи, а также стимулирует кровообращение.
- Положительные эффекты RF-лифтинга усиливаются УЗ распылением косметических средств, благодаря которому активные вещества сывороток и коктейлей попадают точно на необходимую глубину и участвуют в синтезе коллагена, при этом великолепно увлажняют и питают кожу.

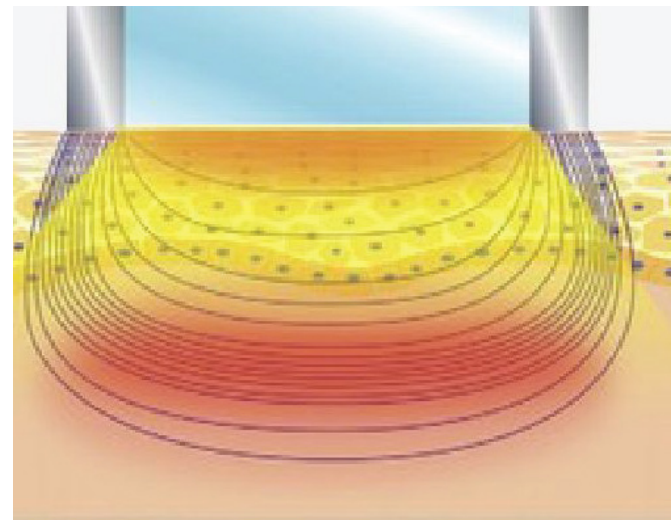


Внешний вид аппарата

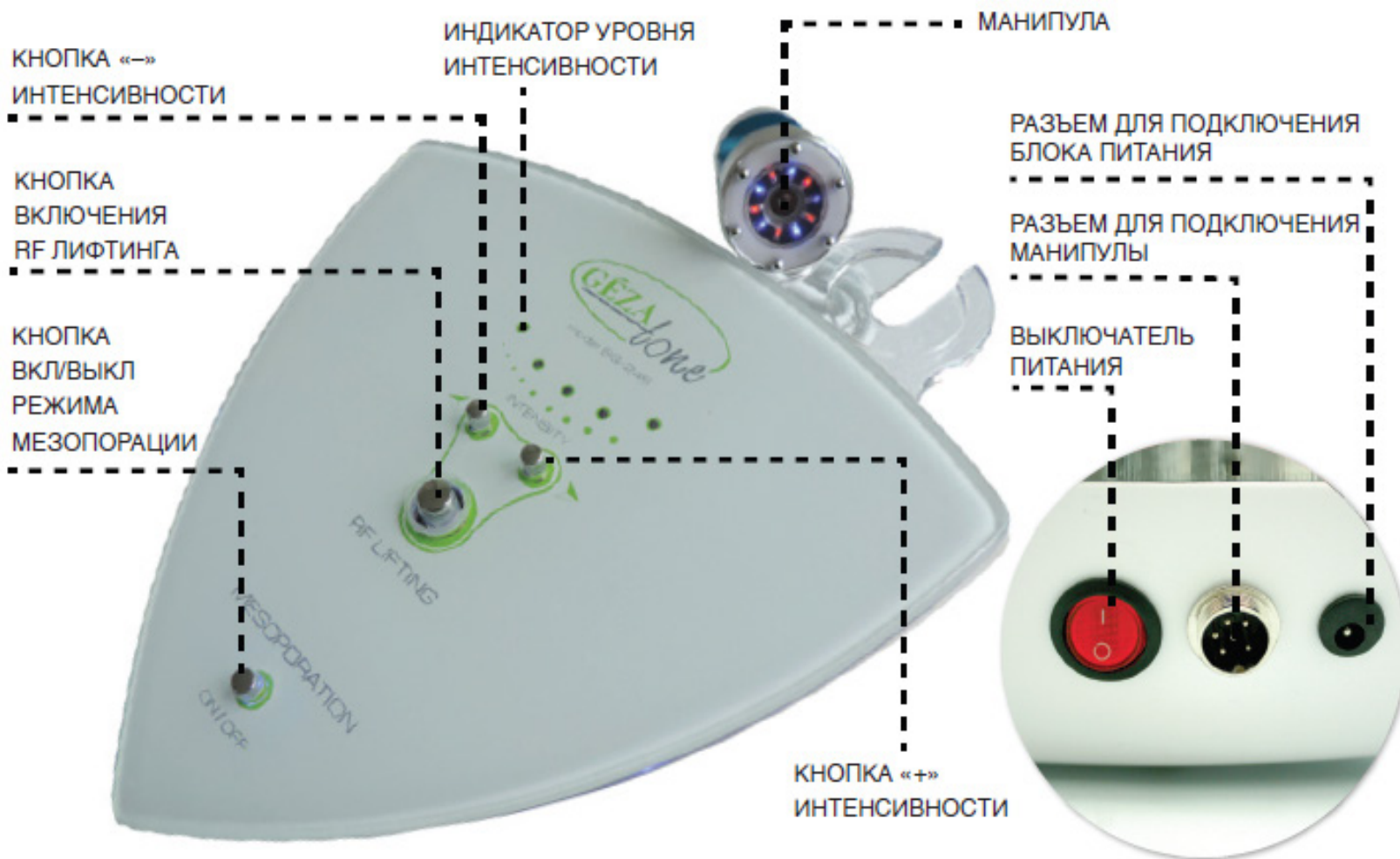

Порядок проведения процедуры

Для того чтобы обеспечить коже необходимое питание и увлажнение, повысить выработку собственного коллагена и эластина, необходимо использовать правильно подобранную косметику и соблюдать последовательность пяти этапов воздействия!

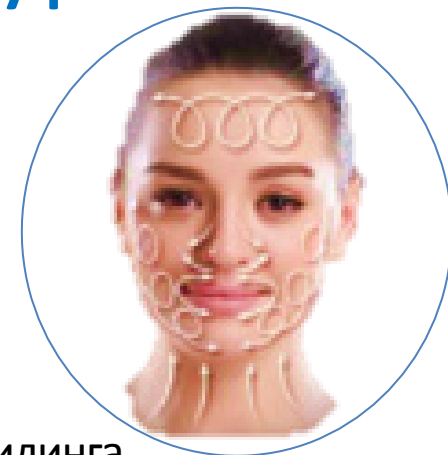

Этап 1. Очищение кожи.

Процедура прибором проводится после снятия макияжа и легкого пилинга.

Этап 2. Ультразвуковая мезопорация.

Этот этап создан для насыщения кожи необходимыми ингредиентами. Налейте косметическое средство Beauty Style в специальный контейнер и наслаждайтесь приятной процедурой УЗ увлажнения. В процессе воздействия мельчайшие частицы косметики будут проникать в глубокие слои кожи и стимулировать естественные процессы обновления.

Этап 3. RF-лифтинг и светотерапия.

Для процедуры rf-лифтинга необходим специальный защитный гель, который усилит эффективность процедуры, снизив при этом ощущения дискомфорта. Голубой спектр излучения при процедуре rf-лифтинга укрепляет сосуды, снижает неприятные ощущения и успокаивает кожу.


Порядок проведения процедуры

Этап 4. Восстановление кожи.

После процедуры RF-лифтинга остатки геля необходимо смыть и на кожу рекомендуется нанести восстанавливающую или успокаивающую маску. Кожа после воздействия радиоволнами расположена к усвоению активных компонентов маски, а значит, эффективность процедуры достигает максимума.

Этап 5. Защита кожи и закрепление результатов.

По окончании процедуры на кожу наносится специальный крем после RF и лазерного воздействия, который успокаивает кожу и стимулирует регенерацию.

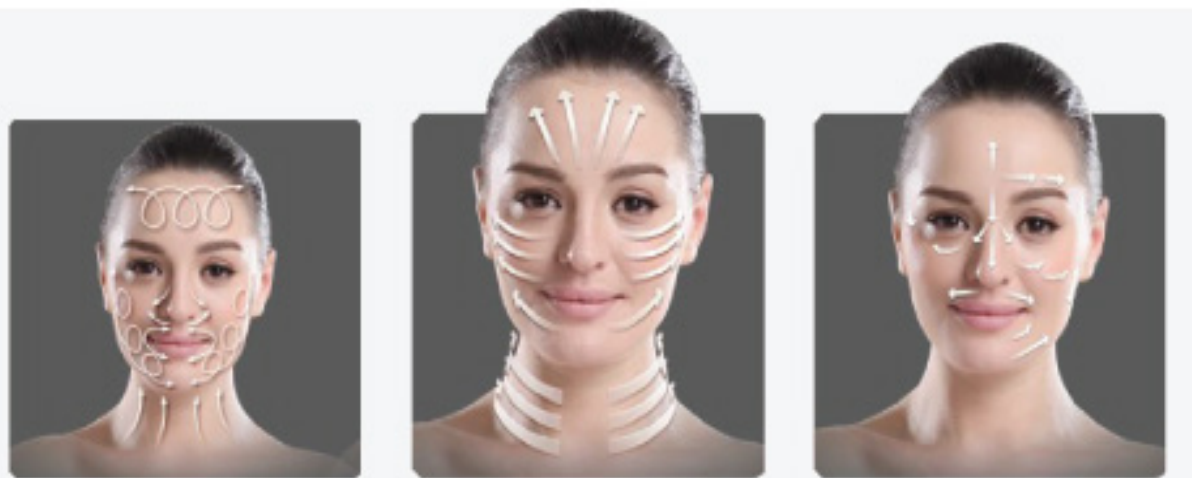

Правильное проведение процедуры гарантирует максимальный результат безоперационной подтяжки и разглаживания морщин!

Результаты использования прибора RF BS245 Gezatone:

- Кожа становится более плотной и упругой.
- Происходит интенсивный лифтинг кожи.
- Подтягиваются обвисшие участки лица: щеки, брыли, подбородок.
- Выравнивается кожный рельеф.
- Нормализуется диаметр пор.
- Кожа становится более эластичной.
- Улучшается тон кожи.
- Уменьшаются лишние жировые отложения в области щек и подбородка.
- Выравниваются рубцы и пятна постакне.
- Стимулируется кровообращение и лимфодренаж.
- Разглаживаются мимические и статические морщины.
- Корректируется овал лица.



Сопутствующие товары



Контактный гель для процедуры лазерной и RF коррекции кожи, 100 мл
Beauty Style
арт. 4515500



Восстанавливающий крем после процедуры лазерной и RF коррекции кожи, 100 мл
Beauty Style
арт. 4515501



Сыворотка для лица Beauty Style успокаивающая, 5мл * 12шт
Арт.4515101



Сыворотка для лица Beauty Style увлажняющая, 5мл * 12шт
Арт.4515104



Сыворотка для лица Beauty Style коллагеновая, 5мл * 12шт
Арт.4515102



Тонизирующий лосьон со стволовыми клетками органы, Beauty Style



Лосьон для лица успокаивающий Paris «Энергия цветов», 200 ml,
Christian Breton



Увлажняющий тоник Аква 24, Beauty Style 200 мл.
Арт. 4515702

Противопоказания

- Запрещено использование детьми.
- Наличие кардиостимулятора или иных электронных имплантатов.
- Беременность, период лактации.
- Пациенты с острой формой заболеваний: туберкулез, лихорадка, инфекционные заболевания, болезни, передаваемые контактным путем.
- Люди с заболеваниями сердца.
- При наличии шрамов.
- Люди с глазными болезнями или проходящие лечение от глазных болезней.
- Люди с кожными болезнями, аллергическим дерматитом и с чувствительной кожей.
- Купероз (сетка сосудов на лице)
- При покраснении и шелушении кожи, вызванном чрезмерным загаром
- При наличии угревой сыпи и гнойничковых воспалительных процессов на коже.

Технические характеристики

- Наименование: Gezatone RF BS245 Аппарат «RF -лифтинг и мезопорация» в домашних условиях
- Артикул – 1301148
- Входное напряжение: АС 220-230 В., 50 Гц\DC24В., 3А
- Выходная частота в режиме RF: 2 МГц.
- Габариты устройства: 225x22x63 мм.
- Вес: 0,5 кг
- Производитель: GEZANNE I.T.C. /Жезанн.
- Адрес: Saint Avertin 39 rue des Granges Galand, Франция
- Гарантийный срок эксплуатации - 1 год.



Москва 8 (495) 925-00-34
регионы РФ: 8-800-200-00-34 (звонок бесплатный)

www.sozv.ru

Присоединяйтесь:

 www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty

 facebook.com/sozvezdiekrasoti

 vk.com/sozvezdiekrasoti