



**BioLIFT•4**  
**GEZATONE m 703**

Миостимулятор  
для шеи и подбородка



# ПРИБОР ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ GEZATONE m 703 BioLIFT•4 ТОНИЗАЦИЯ И ПОДТЯЖКА КОЖИ В ОБЛАСТИ ШЕИ И ПОДБОРОДКА

- Импульсный массажер GEZATON BioLift4 m 703 поможет Вам быстро повысить тонус кожи подбородка и шеи всего за несколько минут в день. Процедуры с миостимулятором станут первым шагом к четкому, подтянутому молодому овалу лица.
- Портативный и стильный прибор для ухода за зоной подбородка и шеи сочетает в себе две популярные косметологические методики, призванные бороться с лишними жировыми отложениями и сниженным тонусом мышц.



# GEZATONE m 703 BioLIFT•4

## КОСМЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

### ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛЯЦИЯ

Воздействие на мышечные волокна при помощи слабых электрических импульсов.

- Эффективно восстанавливает тонус.
- Повышает плотность мышечной ткани.
- Подтягивает обвисшие ткани.
- Придает четкость контуру овала лица.
- Уменьшает «второй подбородок».
- Улучшает состояние и цвет кожи.

### ВИБРОМАССАЖ

Вибрация с частотой 12000 колебаний в минуту способствует повышению тонуса кожи.

- Стимулирует местное кровообращение и лимфоток, снимает отеки и одутловатость.
- Стимулирует вывод токсинов.
- Способствует регенерации клеток кожи.
- Разглаживает морщины на шее.
- Улучшает действие косметики.

## GEZATONE m 703 BioLIFT•4

### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ


- Тонизация мышц шеи, которые обвисли с возрастом, или вследствие индивидуальных особенностей.
- Расщепление и уменьшение жировых отложений.
- Улучшение кровообращения.
- Вывод застоявшейся жидкости.
- Укрепление овала лица и возвращение четких контуров.
- Улучшение внешнего вида и тонуса кожи.
- Уменьшение глубоких поперечных и продольных морщин на шее.
- Повышение эффективности косметических средств.



# GEZATONE m 703 BioLIFT•4

## ВНЕШНИЙ ВИД

1. Титановый ролик
2. ЖК-дисплей
3. Кнопка выбора уровня
4. Кнопка питания и выбора режима (быстрое нажатие)
5. Отсек для элементов питания

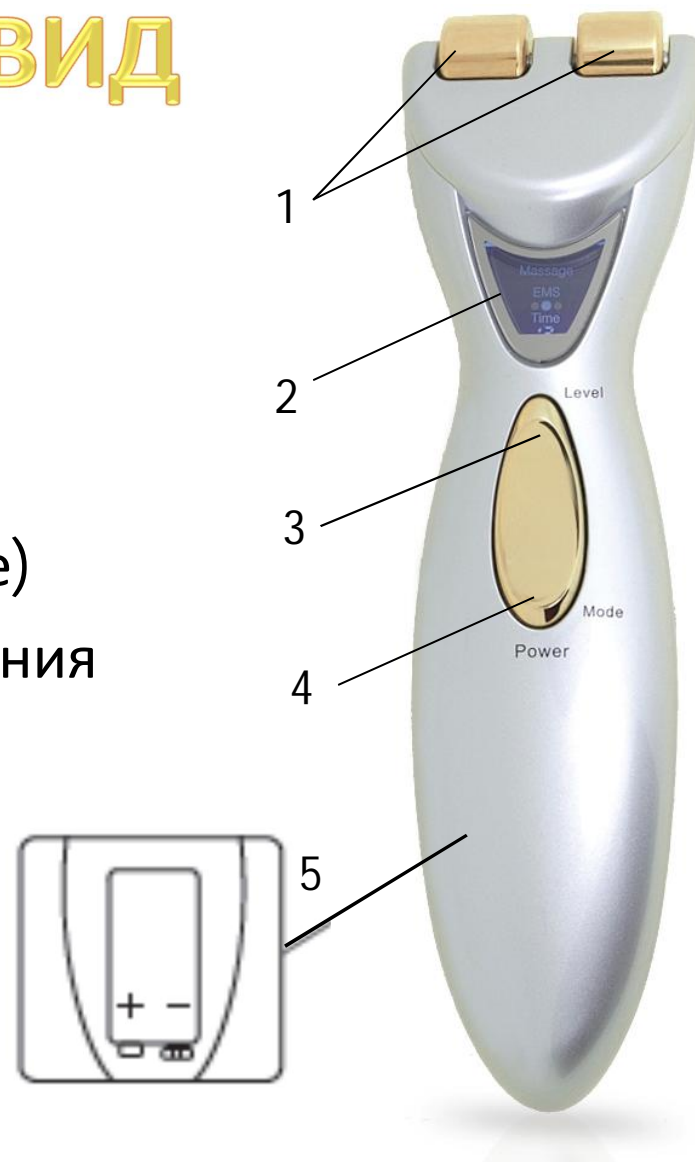

**GEZATONE** m703

# GEZATONE m 703 BioLIFT•4

## ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ



Участок кожи № 1.

Прикоснитесь обоими электродами к обрабатываемому участку кожи (нижняя часть подбородка). Удерживайте аппарат в таком положении в течении 60 секунд.

**ВНИМАНИЕ!** Избегайте воздействия в области щитовидной железы.



Участок кожи № 2.

Прикоснитесь электродами миостимулятора к левой нижней части подбородка. Удерживайте аппарат в таком положении в течении 60 секунд.



Участок кожи № 3.

Прикоснитесь электродами миостимулятора к правой нижней части подбородка. Удерживайте аппарат в таком положении в течении 60 секунд.

**ВНИМАНИЕ!** Для проведения процедуры необходимо использовать специальный токопроводящий гель.

# GEZATONE m 703 BioLIFT•4

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Две методики воздействия оказывают двойное действие ЭМС и вибромассаж.
- Прибор является безопасной альтернативой болезненным инъекциям и хирургической подтяжке.
- Прибор работает от 2-х батареек, его можно повсюду брать с собой и проводить процедуры, где угодно!
- В аппарате предусмотрено 2 режима вибрации: постоянный и импульсный, а также 4 уровня мощности ЭМС-воздействия.
- Титановые электроды прибора не вызывают аллергических реакций и раздражения на коже.
- Процедура занимает всего три минуты, а это значительно экономит Ваше время.
- Плавная регулировка мощности воздействия позволяет использовать прибор даже людям с высокой чувствительностью кожи.
- Вы сами проводите процедуры, экономя деньги на посещениях салонов красоты.
- Вам не нужно сидеть дома после процедуры, как после «уколов красоты» или других методов подтяжки: после процедуры прибором нет необходимости в реабилитационном периоде.
- Ощущение более подтянутой кожи уже после первой процедуры, а видимый и стойкий результат – через две недели ежедневного использования!

# GEZATONE m 703 BioLIFT•4

## РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ

Независимое исследование результатов применения прибора, GEZATON BioLift4 m 703 подтвердило эффективность и безопасность прибора.



на **35%**

КОЖА  
БОЛЕЕ  
ПОДТЯНУТАЯ

на **42%**

БОЛЕЕ  
ЧЕТКИЙ  
ОВАЛ ЛИЦА

**-20%**

ЖИРОВЫХ  
ОТЛОЖЕНИЙ НА  
ПОДБОРОДКЕ

**Улучшение уже после 14-ти дневного курса процедур!**



# GEZATONE m 703 BioLIFT•4

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

- Сочетание интенсивной мышечной подтяжки и насыщение кожи активными компонентами косметики дает стойкий выраженный результат, который является комплексным и сохраняется надолго!



Гель для лица с  
экстрактом икры  
Beauty Style



Лифтинговый гель  
для лица Beauty Style  
"Ультралифт"



Гель алоэ вера  
Gezanne  
Velona

# GEZATONE m 703 BioLIFT•4

## ИДЕАЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ

Для достижения идеального результата и поддержания на длительное время четкого контура овала лица и красивой шеи, компания «Созвездие красоты» рекомендует:

### Подтягивающая сыворотка для шеи Christian Breton, 30мл, Paris

Эффективный препарат для шеи и декольте помогает уменьшить морщины и укрепляет кожу. Регулярное использование сыворотки улучшает тонус и упругость кожи, заметно подтягивает и моделирует контуры.



### Моделирующий крем для лица Beauty Style «LIPOLIFT», 150 мл, Modellage

Интенсивное средство для избавления от «второго» подбородка и лишних жировых отложений, коррекции овала лица, подтяжки кожи. Крем обладает выраженным эффектом, подходит для мужчин и женщин.



# GEZATONE m 703 BioLIFT•4

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ


- Период беременности.
- Онкология.
- Заболевания сердечно-сосудистой системы, использование электрокардиостимулятора.
- Эпилепсия.
- Сахарный диабет.
- Рассеянный склероз.
- Послеоперационный период.
- Тромбофлебит.
- Дерматологические заболевания: розацеа, все формы акне, постпилинговое состояние кожи.
- Гиперчувствительная кожа, нарушение целостности кожных покровов (шрамы, ссадины).
- Запрещается применять аппарат на родинках.

## GEZATONE m 703 BioLIFT•4

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Наименование: Biolift4 m703 Gezatone
- Артикул: 1301152
- Размер: 165 x 48 x 25 мм. Вес: 86 г
- Материал: головка прибора – титан, нержавеющая сталь
- Блок питания: 2 батарейки АМ4/ААА/LR03
- Частота вибрации: 12000 кол. в минуту
- Режимы: непрерывный/ импульсный
- Таймер: от 1 до 15 мин
- Производитель: GEZANNE I.T.C. /Жезанн
- Адрес: Saint Avertin 39 rue des Granges Galand, Франция
- Гарантия: 12 месяцев с момента продажи
- ШК 3004564029573



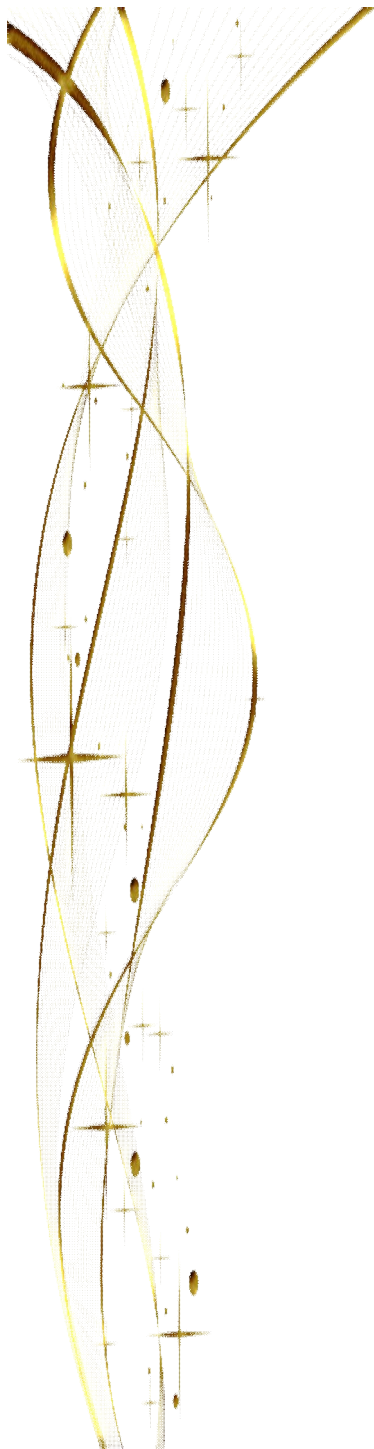


**Москва 8 (495) 925-00-34**

регионы РФ: 8-800-200-00-34 (звонок бесплатный)

[www.sozv.ru](http://www.sozv.ru)

Присоединяйтесь:

 [www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty](http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty)

 [facebook.com/sozvezdiekrasoti](https://facebook.com/sozvezdiekrasoti)

 [vk.com/sozvezdiekrasoti](https://vk.com/sozvezdiekrasoti)