

GÉZATONE

BioSonic

ЩЕТКА ДЛЯ УХОДА
И ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА
Модель AMG197




сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

Нашей коже от природы дана способность к самообновлению и очищению – ороговевшие частицы верхнего слоя эпидермиса отшелушиваются и им на смену приходят молодые клетки. Но в условиях повышенной нагрузки на организм в целом и лицо в частности, такие как ежедневный макияж, неправильный или нерегулярный уход, неправильное питание, экология и т.д., кожа не справляется с естественной функцией. Помочь ей в этом может брашинг лица.

Данная косметологическая процедура теперь доступна для проведения в домашних условиях и имеет много преимуществ перед другими видами пилинга.

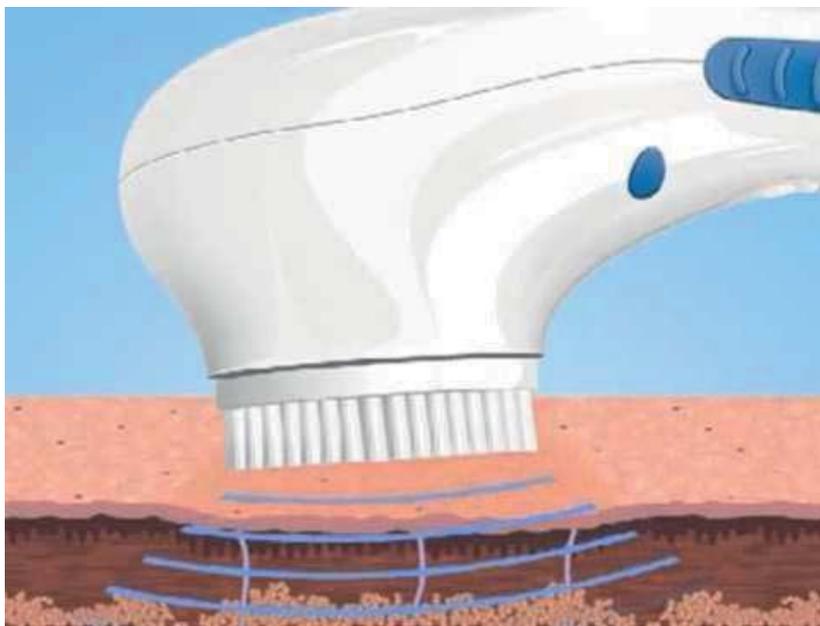

При соблюдении правильной техники и регулярном использовании, брашинг при помощи **щетки для ухода и очищения кожи лица Bio Sonic AMG 197** поможет решить наиболее часто возникающие косметические недостатки на коже, а именно очень деликатно удалит верхний слой кожи, отмершие клетки и глубокие загрязнения, улучшит локальное кровообращение, стимулирует обновление клеток и повысит упругость кожи.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Брашинг с двумя сменными насадками может быть эффективен для профилактики или устранения:

- Легкой пигментации (в том числе и сезонной);
- Неровности на поверхности кожи, тусклый цвет лица;
- Недостатка увлажнения и шелушения кожи;
- Мелких морщинок и рубцов;
- Черных точек, загрязненных пор.

Щетка для ухода и очищения кожи лица Bio Sonic AMG 197, работающая по принципу высокочастотной вибрации (18000 колебаний в минуту), станет незаменимым помощником для каждой женщины при уходе за лицом в домашних условиях.



Арт: 1301175

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ЭФФЕКТИВНО И ГЛУБОКО ОЧИЩАЕТ КОЖУ ЛИЦА, НЕ ПОВРЕЖДАЯ ЕЕ
- ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ КОЖЕ ДЫШАТЬ
- СМЯГЧАЕТ КОЖУ, УСКОРЯЕТ ПРОЦЕССЫ РЕГЕНЕРАЦИИ КЛЕТОК ЭПИДЕРМИСА
- ВОССТАНАВЛИВАЕТ ВОДНО-ЖИРОВОЙ БАЛАНС КОЖИ ЛИЦА
- ДЕЛАЕТ КОЖУ СИЯЮЩЕЙ

Регулярное применение щетки для ухода и очищения кожи лица Bio Sonic AMG 197 в сочетании с профессиональными косметическими средствами Beauty Style позволит Вам наслаждаться великолепной свежестью и гладкостью кожи долгое время.



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

С помощью щетки для ухода и очищения кожи лица Bio Sonic AMG 197 можно добиться впечатляющих результатов уже после первой процедуры:

- деликатно снять верхний слой эпидермиса;
- очистить поры;
- разгладить мелкие морщинки;
- улучшить кровообращение и микроциркуляцию;
- улучшить цвет лица;
- повысить тургор;
- отбелить пигментные пятна и веснушки;
- стимулировать процессы естественного обновления;
- устранить или сгладить уже имеющиеся дефекты (комедоны, рубцы и др.) и предотвратить появление новых.



Арт: 1301175

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Увлажняющая пенка для демакияжа
Beauty Style АКВА 24

Арт.: 4515701



Увлажняющий крем-пилинг
Beauty Style АКВА 24

Арт.: 4515703



Пенка для демакияжа со стволовыми
клетками арганы, Beauty Style

Арт.: 4515424



Крем - пилинг со стволовыми
клетками арганы, Beauty Style


Арт.: 4515426



РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ

Для получения максимальных результатов необходимо учесть следующие рекомендации:

1. Используйте брашинг каждое утро и вечер (людям с чувствительной, тонкой и склонной к покраснениям кожей рекомендуется использовать 2-3 раза в неделю, используя щетку-насадку для чувствительной кожи). Чистка лица полностью занимает 1 минуту (в зависимости от типа жирности вашей кожи время может быть больше или меньше).
2. Нанесите небольшое количество очищающего средства на увлажненную кожу лица, шеи и декольте. Можно нанести средство на рабочую поверхность самого прибора.
3. Без интенсивного давления проводите воздействия на кожу, мягкими круговыми движениями массируя лицо по массажным линиям.
4. После окончания процедуры следует умыться лицо, прибор промыть водой и убрать на подставку. Не забудьте нанести питательный или увлажняющий крем по типу кожи – его ингредиенты после очищения усвоятся намного лучше!

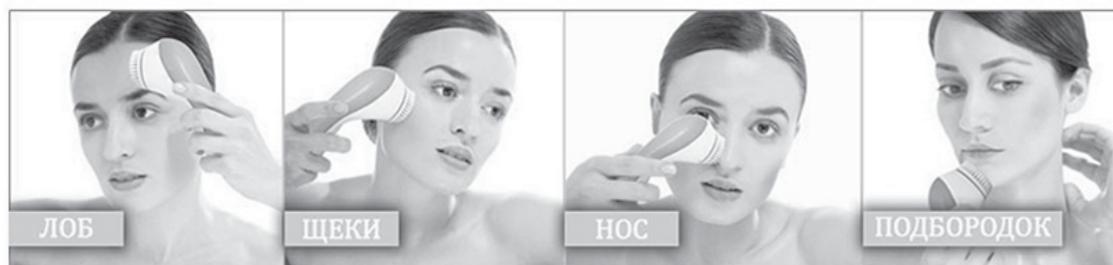

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ;
- НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ;
- КУПЕРОЗ (СОСУДИСТАЯ СЕТКА);
- НАЛИЧИЕ ВОСПАЛЕНИЙ (В Т. Ч ГЕРПЕС, РОЗОВЫЕ УГРИ И ПР., ТАК КАК ЩЕТИНКИ СПОСОБНЫ РАЗНЕСТИ ИНФЕКЦИЮ ПО ВСЕМУ ЛИЦУ).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прибор для ухода и массажа лица серии Bio Sonic, модель AMG197, бытовой электрический, т.м «Gezatone»

Напряжение питания: DC 3 В., от батарей 2 x 1.5 В., тип AA (в комплект не входят).

Частота колебаний: 18000 / мин.

Габаритные размеры в упаковке: 195x188x69 мм

Вес в упаковке: 0,3 кг

Диапазон рабочих температур окр.воздуха: 10-35 С, при отн.влажности <60%

Комплектация:

Щетка-массажер Gezatone AMG197 - 1 шт

Сменные щетки - 2 шт

Подставка - 1 шт

Инструкция по эксплуатации - 1 шт

Производитель: "Gezanne I.T.C." / "Жезанн И.Т.С.", адрес: Saint Avertin 39 rue des Granges Galand, France, /Сент Авертен 39 рю де Гранж Галан, Франция.

Завод-изготовитель: «GREAT CATHAY PRODUCTS MFG. INC.» / «ГРЭЙТ КЭТЭЙ ПРОДАКТС МФГ. ИНК» адрес: 2 fl., №. 19, Lane 160, SUNG-CHIANG RD. Taipei, Taiwan R.O.C., / 2фл, №. 19, Лэйн 160, Санг-Чианг Рд, Тайпей, К.Р., Тайвань.

Импортер / уполномоченная изготовителем организация: ООО «Митридат», Россия, г. Москва, ул. Шоссейная, д.1В, стр. 10 тел. (495) 225-25-83

Срок службы: 5 лет

Способ применения и дата производства: см. инструкцию