

GÉZATONE

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ



BIOSONIC

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

Модель HS2307i(S)

Ультразвуковой прибор Bio Sonic HS2307i(S) Gezatone предназначен для комплексного ухода за кожей с использованием современной эффективной методики воздействия ультразвуком. Принцип действия аппарата основан на использовании ультразвуковых волн с частотой 25 кГц, вызывающих невидимые глазом колебания.

При помощи аппарата Bio Sonic HS2307i(S) Gezatone можно проводить:

ПРОЦЕДУРЫ УЗ ПИЛИНГА для очищения кожи и стимуляции процессов дыхания;

МИКРОМАССАЖ для повышения эластичности и тонуса кожи;

ФОНОФОРЕЗ для введения косметических средств в глубокие слои кожи для увлажнения, восстановления и питания кожи;

ЛИФТИНГ для эффективного и безопасного разглаживания морщин и улучшения состояния кожи.

С ПРИБОРОМ СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ ПРОВОДИТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ



ГРУБАЯ, ОРОГОВЕВШАЯ КОЖА,
РУБЧИКИ ПОСТАКНЕ, ПИГМЕНТАЦИЯ

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ, МОРЩИНЫ,
ДРЯБЛОСТЬ, ОТЕЧНОСТЬ

ЖИРНАЯ И СМЕШАННАЯ КОЖА, ПОВЫШЕННОЕ
САЛООТДЕЛЕНИЕ


РАСШИРЕННЫЕ, ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ПОРЫ, КОМЕДОНЫ

КОЖА СО СНИЖЕННЫМ ТОНУСОМ, НЕРОВНЫЙ И
ТУСКЛЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА

ОБЕЗВОЖЕННАЯ И СУХАЯ КОЖА, ШЕЛУШЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ АППАРАТА

- ✓ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПИЛИНГ КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА
- ✓ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МИКРОМАССАЖ КОЖИ ЛИЦА
- ✓ ФОНОФОРЕЗ (ВВЕДЕНИЕ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ) КОЖИ

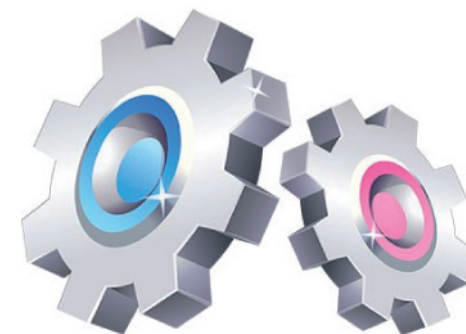

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПИЛИНГ

Безопасный метод очистки кожи и пор от избытка кожного сала, загрязнений и отмерших клеток эпидермиса.

Под действием ультразвуковой волны сальная пробка размягчается, выталкивается из поры и удаляется вместе с отмершими клетками поверхностного слоя эпидермиса.

Очищение происходит максимально деликатно, удаляется слой старых клеток с поверхности кожи, очищаются поры и уменьшается их диаметр, улучшается кровообращение, активизируются процессы дыхания в клетках, кожа очищается от накопленных загрязнений и токсинов. Хорошо очищенная кожа более интенсивно усваивает активные компоненты кремов, сывороток и масок.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МИКРОМАССАЖ

Ультразвуковой микромассаж может проводиться в непрерывном и импульсном режиме. Этот вид воздействия подтягивает и укрепляет кожу, способствует уменьшению глубины морщин, улучшает кровообращение и лимфоотток, помогает уменьшить отечность и признаки усталости.

ЭФФЕКТЫ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МИКРОМАССАЖА:

Механический эффект. Осуществляется за счет передачи колебаний волны через слой контактного средства и выражается в виде микромассажа тканей, активизации процессов восстановления, повышении эластичности и упругости кожи.

Тепловой эффект. В результате воздействия ультразвуковой волны в тканях образуется тепло, которое активизирует кровообращение и обменные процессы, стимулирует процессы насыщения кислородом, синтеза коллагена и эластина.


Бактерицидный эффект. Ультразвуковая волна стимулирует активизацию местного клеточного иммунитета и повышает защитные свойства кожи.



УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПИЛИНГ

Деликатное удаление ороговевших частичек и клеток кожи верхнего слоя эпидермиса.

Эмульгирование и удаление загрязнений и черных точек из пор.

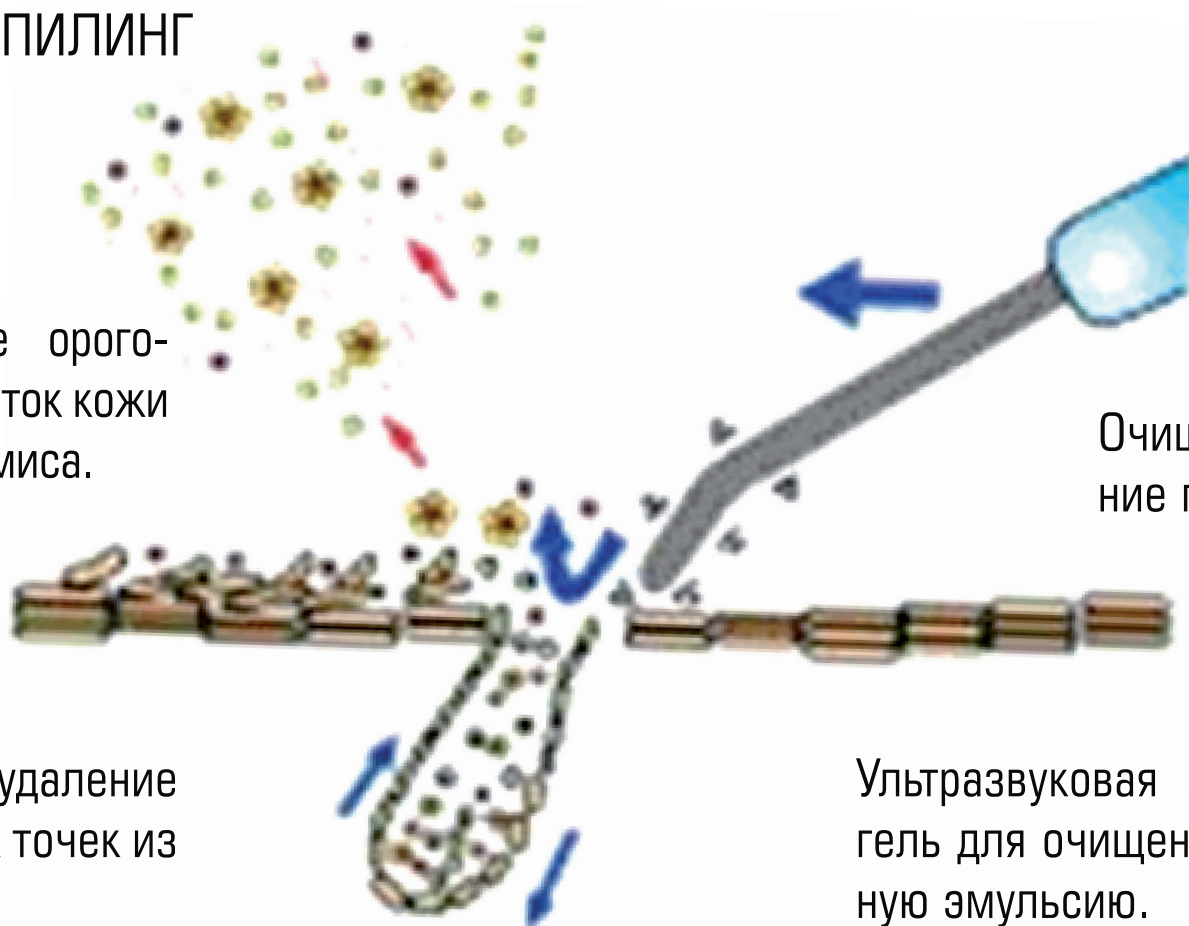

Очищение и выравнивание поверхности кожи.


Ультразвуковая волна превращает гель для очищения в мелкодисперсную эмульсию.

ФОНОФОРЕЗ

Фонофорез – процесс введения в кожу специальной косметики при помощи ультразвука. Ультразвуковая волна усиливает проникновение косметических средств, в несколько раз повышает их эффективность и продлевает время действия.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МИКРОМАССАЖ КОЖИ ЛИЦА

Способствует уменьшению глубины морщин, улучшает кровообращение и лимфоотток. Повышает упругость и эластичность кожи.

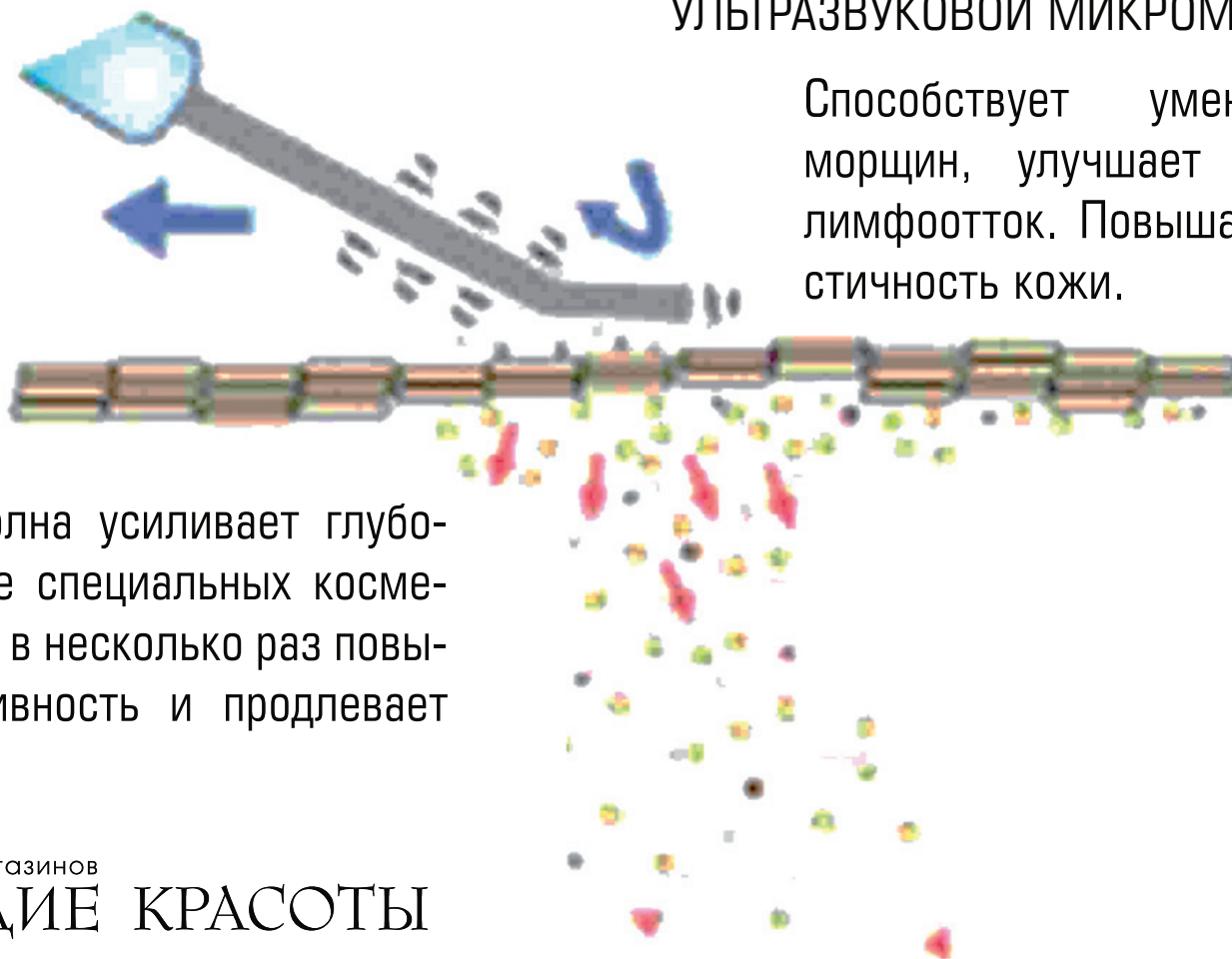

ФОНОФОРЕЗ

Ультразвуковая волна усиливает глубокое проникновение специальных косметических средств, в несколько раз повышает их эффективность и продлевает время действия.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА Bio Sonic HS2307i(S) GEZATONE

- ✓ ЭФФЕКТИВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ
- ✓ ВОССТАНОВЛЕНИЕ УПРУГОСТИ И ЭЛАСТИЧНОСТИ
- ✓ УМЕНЬШЕНИЕ МОРЩИН
- ✓ ПОВЫШЕНИЕ УВЛАЖНЕННОСТИ КОЖИ
- ✓ УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА И ТОНА КОЖИ
- ✓ УМЕНЬШЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ, ПРИЗНАКОВ УСТАЛОСТИ И СТРЕССА
- ✓ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ САЛОТДЕЛЕНИЯ
- ✓ УМЕНЬШЕНИЕ ДИАМЕТРА РАСШИРЕННЫХ ПОР
- ✓ УЛУЧШЕНИЕ КОНТУРА ОВАЛА ЛИЦА, ЛИФТИНГ КОЖИ



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- ✓ Аритмии, недостаточность кровообращения свыше II Б степени
- ✓ Заболевания крови
- ✓ Электрокардиостимулятор или другие электронные имплантаты
- ✓ Онкологические заболевания
- ✓ Нарушение целостности кожных покровов: ожоги, раны, ссадины, трофические язвы
- ✓ Хронические дерматиты и дерматозы в стадии обострения, аллергическая реакция на коже в месте воздействия прибора
- ✓ Острые воспалительные и гнойные процессы
- ✓ Акне в стадии обострения
- ✓ Нарушения кожной чувствительности
- ✓ Психические расстройства
- ✓ Период беременности
- ✓ Наличие имплантатов, располагающихся под кожей или в мышцах в зоне воздействия прибором (золотые нити, металлические скобки), НЕ распространяется на зубные коронки, штифты и брекеты
- ✓ Острые инфекционные и вирусные заболевания, грипп, ОРВИ, повышенная температура

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЧИСТКИ



Очищающий гель для УЗ пилинга
Beauty Style "Ультраклин сенс"
для чувствительной, сухой, тонкой
и нормальной кожи

Очищающий гель для УЗ пилинга
Beauty Style "Ультраклин контроль"
для жирной, смешанной
и нормальной кожи

ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ФОНОФОРЕЗА



Сыворотки для лица с коллагеном Beauty Style
Сыворотки с гиалуроновой кислотой Beauty Style
Активные концентраты для лица Beauty Style

ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ



Маски шелковые Beauty Style
Маски с биоцеллюлозой Beauty Style
Ботанические маски
на нетканой основе Beauty Style

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование прибора:

Ультразвуковой прибор для ухода за кожей лица Bio Sonic HS2307i(S) Gezatone

Артикул: 1301178

Частота ультразвука: 25 кГц

Выходная мощность: не более 2 Вт/см²

Встроенный аккумулятор: 3.7 В.

Зарядное устройство: AC100-240В.,

50-60 Гц/DC 5.0 В., 700 мА

Диапазон рабочих температур +10...35°C

Допустимая влажность не более 85%

Производитель: «Gezanne I.T.C.» Saint Avertin 39 rue des Granges Galand, France / «Жезанн И.Т.С.», Сэнт Авертен, 39 рю де Гранж Галан, Франция.

Завод-изготовитель: «GREAT CATHAY PRODUCTS MFG. INC.» / «ГРЭЙТ КЭТЭЙ ПРОДАКТС МФГ. ИНК.», 2 фл, № 19, Лейн 160, САНГ-ЧИАНГ, РД, Тайбэй, Тайвань, К.Р. / 2 fl., № 19, Lane 160, SUNG-CHIANG RD, Taipei, Taiwan R.O.C.

Импортер / уполномоченная изготовителем организация: ООО «МИТРИДАТ», Россия, г. Москва, ул. Шоссейная, д.1В, стр.10, т. (495) 225 25 83

Применение, дата производства: см. инструкцию по эксплуатации.

Срок службы: 5 лет



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

Москва 8 (495) 120-10-80

регионы РФ: 8 (800) 500-95-94 (звонок бесплатный)

WWW.SOZV.RU

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ:

 odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty

 facebook.com/sozvezdiekrasoti

 vk.com/sozvezdiekrasoti



Арт. 1301178

