



GÉZATONE

Прибор по уходу за кожей лица
СВЕТОДИОДНАЯ МАСКА

модель
m1018

СВЕТОДИОДНАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА – ЭТО РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОДУКТ И НОВАЯ ЭРА В ОБЛАСТИ КОСМЕТОЛОГИИ

Медицинские исследования показали, что использование хромотерапии или световой волны определенного цвета положительно влияет на кожу, и при длительном использовании дает стойкий эффект.

Кроме того, светодиодная маска для глаз может использоваться с масками экспресс-ухода для лица - свет способствует скорейшему усвоению кожей активных ингредиентов косметических масок.



ЧТО ТАКОЕ ХРОМОТЕРАПИЯ

ХРОМОТЕРАПИЯ – одна из современных аппаратных методик, которая успешно применяется в косметологии. Хромотерапия способствует повышению тонуса и жизненной энергии кожи лица, шеи и декольте. Улучшает цвет лица и выравнивает тон кожи. Противостоит возрастным изменениям кожи, сокращает расширенные поры.

В процессе процедуры хромотерапии происходит воздействие на кожу лица, шеи и зоны декольте лучами разных оттенков спектра. Выбор цвета зависит от эстетической проблемы.

-  **ГОЛУБОЙ** успокаивает, поэтому показан при раздражениях, куперозе и в целом для чувствительной кожи.
-  **КРАСНЫЙ** восстанавливает тонус, улучшает иммунитет кожи. Показан для увядающей сухой кожи с замедленным кровообращением.

ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ХРОМОТЕРАПИИ – поддержание упругости и свежести кожи, кроме этого, после сеансов хромотерапии происходят положительные изменения кожи:

- выравнивается цвет лица и исчезает раздражение и покраснение кожи;
- повышается поступление кислорода в ткани, ускоряется клеточный метаболизм;
- стимулирует синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты в дерме;
- после сеанса кожа выглядит гладкой и сияющей.

ХРОМОТЕРАПИЯ - достаточно эффективная и абсолютно безболезненная процедура, после которой лицо становится более расслабленным, свежим, помолодевшим, а на коже уменьшается количество мелких морщинок.

ЭФФЕКТЫ ХРОМОТЕРАПИЯ

ЦВЕТ И ДЛ. ВОЛНЫ	ДЕЙСТВИЕ	ДЛЯ КАКОГО ТИПА КОЖИ	РЕЗУЛЬТАТ
 <p>КРАСНЫЙ ЦВЕТ 620 nm (±10 nm)</p>	<p>Один из самых мощных цветов. Стимулирует клетки кожи, активизирует кровообращение и несет тепло и заряд энергии</p>	<p>Для всех типов кожи, особенно для дряблой, уставшей кожи с возрастными изменениями. Для кожи со сниженным тонусом</p>	<p>Активизирует процессы выработки энергии и стимулирует клеточный метаболизм, восстанавливая цвет лица и тонизируя кожу. Уменьшает количество и глубину морщин, придает коже гладкость и упругость</p>
 <p>ГОЛУБОЙ (СИНИЙ) ЦВЕТ 460 nm (±10 nm)</p>	<p>Стимулирует иммунитет кожи, успокаивает, снимает покраснения и раздражения. Регулирует секрецию кожного сала</p>	<p>Для всех типов кожи, особенно для чувствительной кожи, склонной к раздражению, для жирной и проблемной кожи</p>	<p>Успокаивает кожу, оказывает противовоспалительный эффект, уменьшает темные круги и отеки. Сокращает расширенные поры, ускоряет метаболизм в клетках и делает кожу гладкой и сияющей</p>

Чередование цветов повышает выделение гормона мелатонина, что улучшает состояние всего тела, улучшает длительность и качество сна, восстанавливает биологические ритмы.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- **УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ КНОПКОЙ**, не требует специальных знаний и навыков для ее применения.
- **12 СВЕТОДИОДОВ** интенсивно воздействуют не только на кожу вокруг глаз, но и затрагивают лоб, верхнюю часть щек и скулы.
- **ДВА СПЕКТРА СВЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ** (голубой и красный) оказывают различные косметические эффекты, дополняя действия друг друга.
- **ВСЕГО 10 МИНУТ** светового воздействия каждого цвета и кожа выглядит более молодой и свежей, без следов усталости и стресса.
- **ДЕЛИКАТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ** особенно полезно для нежной кожи вокруг глаз, при котором важно не растягивать тонкую и чувствительную кожу.
- **ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН И КОМФОРТ** обеспечивают удобную посадку и позволяют без лишних усилий проводить великолепный омолаживающий уход за кожей.
- **МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ** позволяет использовать маску людям любого возраста и пола.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Сыворотка для глаз укрепляющая Beauty Style «Секрет Арганы»



Арт. 4515421

Активный омолаживающий концентрат, для кожи вокруг глаз. Сыворотка интенсивно подтягивает, укрепляет, смягчает и увлажняет кожу, снимает следы усталости и стресса.

Сыворотка для глаз омолаживающая Beauty Style «Apple Stem Cell»



Арт. 4515410

Активный омолаживающий препарат для кожи в области вокруг глаз. Фитостволовые клетки яблока гарантируют быстрый и стойкий эффект, повышают тонус и упругость кожи.

Сыворотка для глаз Beauty Style лифтинговая



Арт. 4515107

Сыворотка для нежной кожи вокруг глаз, стимулирует процессы регенерации клеток, способствует разглаживанию морщин и быстрому лифтингу кожи. Применяется самостоятельно и в комплексе с аппаратами!

Концентрат для глаз омолаживающий Beauty Style с коллагеном



Арт. 4515110


Средство восстанавливает эластичность и глубоко увлажняет кожу. Регулярное использование повышает защитные функции чувствительной кожи вокруг глаз и помогает избавиться от морщин.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1. Очистите и высушите лицо, подсоедините USB кабель к прибору.
2. Убедитесь, что кабель подсоединен к розетке, либо что аккумулятор прибора полностью заряжен.
3. Наденьте маску на лицо и зафиксируйте с помощью дужек, в противном случае, маска может упасть.
4. Включите прибор.
5. Выберите желаемый цвет излучения.
Во время процедуры держите глаза закрытыми.
6. Эффект от процедуры различен в зависимости от индивидуального состояния кожи.
Рекомендованная продолжительность процедур – от 7 до 14 дней 1 раз в день.
7. Излучение отключается автоматически через 10 минут.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

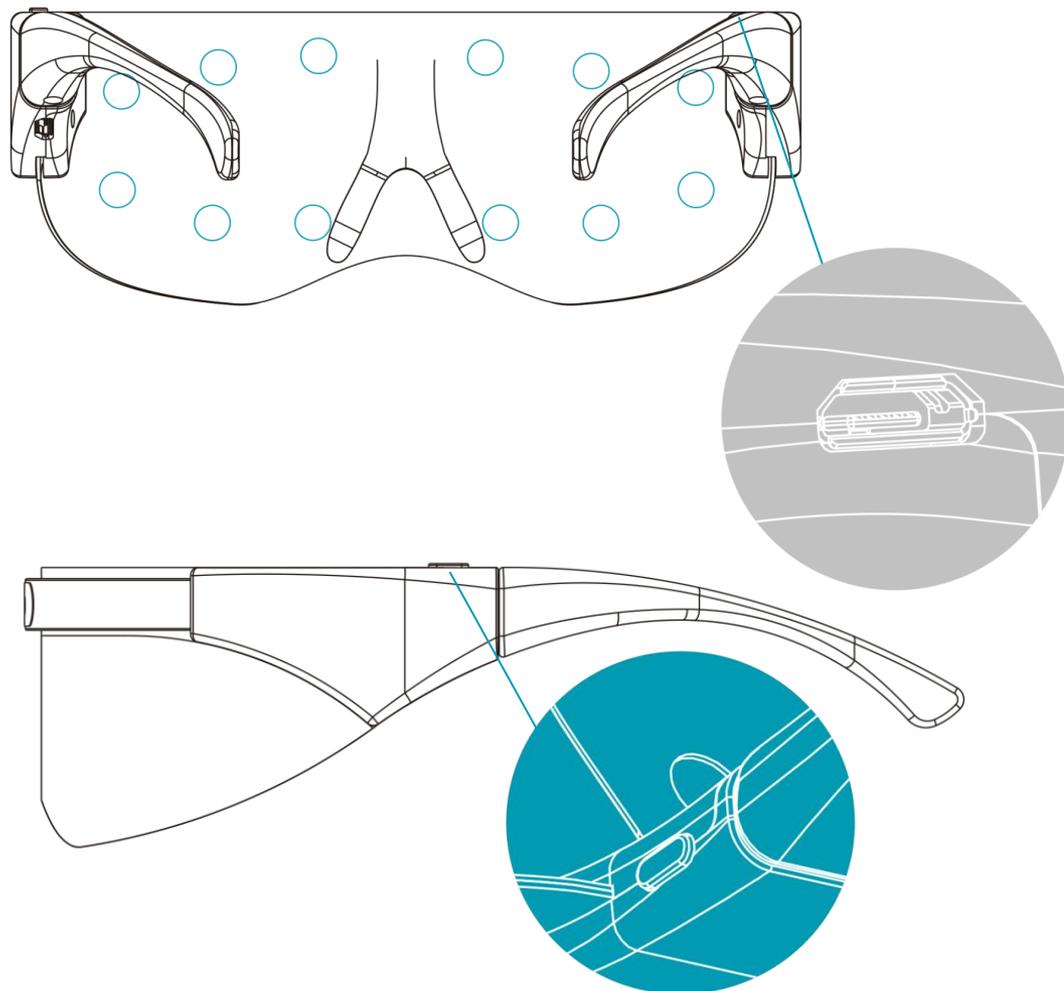

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Беременность
- Эпилепсия
- Заболевания щитовидной железы
- Фоточувствительность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	m1080
АРТИКУЛ	1301186
ГАБАРИТЫ ПРИБОРА	193*150*90 мм
ВЕС	70 г
МАТЕРИАЛ	АБС + ПК
ДЛИНА ВОЛНЫ	620нм - красное; 460нм - синее
ТАЙМЕР	10 мин.
ПРИМЕНЕНИЕ	Домашнее использование
ЗОНА ВОЗДЕЙСТВИЯ	200*200 мм
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	Температура 20-50 С; влажность 30-70%
ОГРАНИЧЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ	5В ±0,5В
ОГРАНИЧЕНИЕ ТОКА	500мА±10%
ИСХОДЯЩАЯ МОЩНОСТЬ	2,5Вт±10%
СВЕТОВОЙ ПОТОК	150лм±10%
АКСЕССУАРЫ	USB кабель, инструкция
ГАРАНТИЯ	1 год
ШК	3004564030036

GÉZATONE



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

МОСКВА: 8 (495) 120 10 80

РЕГИОНЫ РФ: 8 800 775 82 76 (звонок бесплатный)

www.sozv.ru



www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty



facebook.com/sozvezdiekrasoti



vk.com/sozvezdiekrasoti