


GÉZA *tone*



Массажер для лица
«Омоложение кожи» 3-в-1
Beauty Iris Gezatone m708

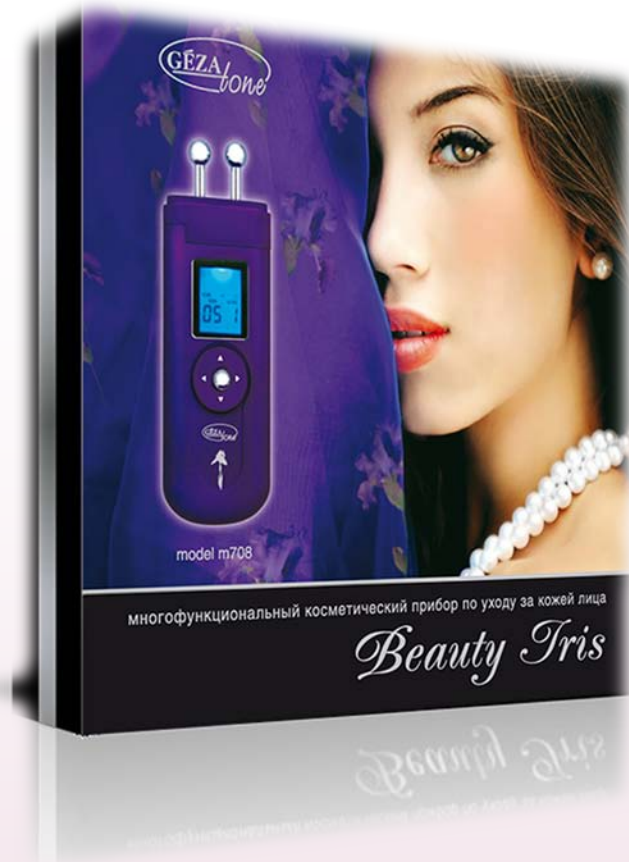

Beauty Iris Gezatone m708

Инновационная разработка компании Gezatone, косметический комбайн Beauty Iris считается специалистами и потребителями самым лучшим и самым компактным «ответом» на признаки старения, угрожающие коже лица, шеи и области декольте.

Миниатюрный корпус вместил в себя три прогрессивных и результативных способа остановить старость, сделать безоперационную подтяжку лица, вернуть ему свежесть и жизненную силу. Косметический комбайн Beauty Iris – ваш друг, союзник и бессменный косметолог!

Три популярные методики совмещены в одном компактном комбайне Beauty Iris: гальванические токи, микротоковая терапия и коррекция морщин.

Эффективное омоложение и борьба с возрастными изменениями!

Артикул - 1301089



Показания к применению Beauty Iris Gezatone m708

GEZA
tone

BEAUTY IRIS – ПРОЦЕДУРЫ, КОТОРЫЕ ГАРАНТИРУЮТ МОЛОДОСТЬ

- ▶ Комплексное применение гальванических токов и аппаратных косметических средств считается самым эффективным решением возрастных изменений.
- ▶ Независимые исследования доказали, что аппарат Beauty Iris действительно эффективно омолаживает кожу, возвращая ей красоту и свежесть.
- ▶ Положительный результат его использования в комплексе с грамотно выбранными заряженными косметическими средствами виден сразу после первого сеанса.
- ▶ Регулярные сеансы гальванотерапии – это гарантия того, что результат не исчезнет со временем.
- ▶ Многочисленные положительные отзывы о Gezatone Beauty Iris подтверждают его функциональность, безопасность и эффективность в борьбе с возрастными изменениями кожи.
- ▶ Если Вы хотите избавиться от возрастных изменений кожи, то косметический комбайн Beauty Iris окажет Вам в этом огромную помощь.
- ▶ Пользователи более молодого возраста применяют прибор для предупреждения появления морщин.
- ▶ Области использования аппарата – лицо, подбородок и зона декольте.
- ▶ Использование Beauty Iris может оказаться альтернативным вариантом для тех, кто собирается использовать инъекции коллагена, филлеры или другие инвазивные меры для омоложения кожи.

Как победить морщины ?

GEZA
tone

- Коррекция морщин и их профилактика – это комплексная задача.
- Морщины появляются неизбежно и особенно заметны в определенных зонах лица: на лбу, вокруг рта и в области глаз, между бровями.
- Для борьбы с морщинами разработано множество эффективных средств, среди которых филлеры – заполнители морщин, которые вводятся внутрикожно посредством инъекций.
- Тем, кто является противником всевозможных инъекций, предлагается революционный метод профессиональной аппаратной косметологии – **ридолиз** морщин, который по эффективности не уступает инъекционным методикам и является абсолютно безболезненным.

Beauty Iris Gezatone m708

Beauty Iris Gezatone m708

GEZA
tone

Массажер для лица Gezatone Beauty Iris m708 разработан на базе трех методов, считающихся самыми результативными, но самым главным оружием аппарата против морщин является воздействие микротоками Лотти – функция ридолиза.

Воздействие микротоков Лотти способно разгладить самые глубокие морщины и складки кожи, стимулируя синтез коллагена и эластина, заполнив морщину изнутри.

Длительный результат

Результат, полученный после сеансов с Gezatone Beauty Iris, останется с Вами до шести месяцев, а по истечении этого времени можно будет просто повторить курс заново!

Гальванические токи



Микротоки



Ридолиз




Разглаживание морщин и борьба со старением кожи




Метод ридолиза

Beauty Iris Gezatone m708


Морщина представляет собой образование, которое по строению аналогично рубцу, для устранения морщин аппаратный метод ридолиза признан максимально щадящим и результативным, поскольку позволяет «заполнить» каждую морщину изнутри, используя внутренние резервы организма, стимулируя синтез «белков молодости» - коллагена и эластина.

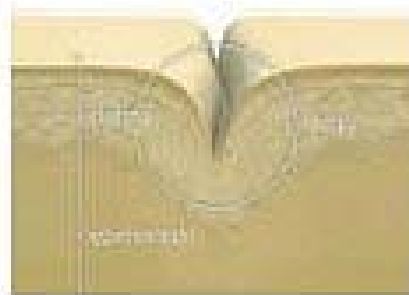


Морщины

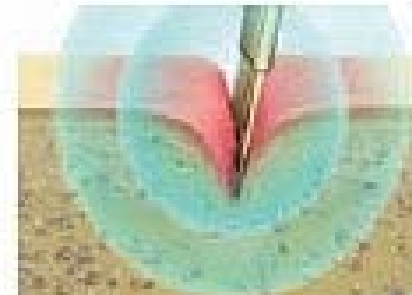

Воздействие Beauty Iris

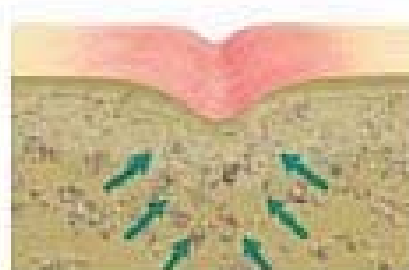

Синтез коллагена и
эластина

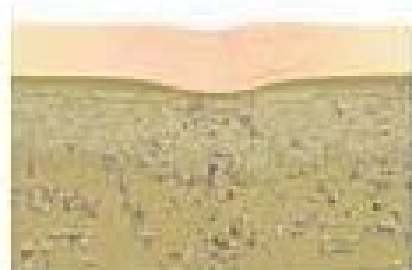

Регенерация тканей

Принцип работы микротоков Лотти аппарата Beauty Iris Gezatone m708

С течением времени количество коллагена и эластина уменьшается, отчего кожа стареет. Аппарат Beauty Iris m708 способен продуцировать особую разновидность микротоков Лотти (MLM), которые проникают в кожу при ее контакте с микроэлектродами. В результате данной процедуры создается тепловой эффект и возникают экссудативные реакции (например, отечность). Микроэлектроды усиливают деление клеток кожи на уровне дермы и увеличивают активность фибробластов, ускоряющих регенерацию тканей. Фибробласты, используя термическую энергию, стимулируют выработку клетками АТФ и белков, стимулируют синтез коллагена и эластина.

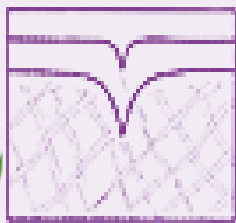


рис. 1



рис. 2



рис. 3

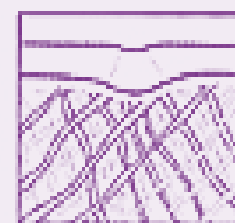


рис. 4



Ридолиз – «заполнитель морщин»

Процедуры без боли и синяков!

- Ридолиз – это коррекция самых глубоких и стойких морщин с помощью микротоков Лотти.
- Воздействие на морщину осуществляется при помощи подвижных игольчатых электродов с округлыми кончиками, которые не травмируют и не прокалывают кожу, без боли и синяков.
- Коллаген и эластин вырабатываются в организме естественным способом, а не поступают извне, что еще раз подчеркивает безопасность метода.



**Инъекции
подождут**

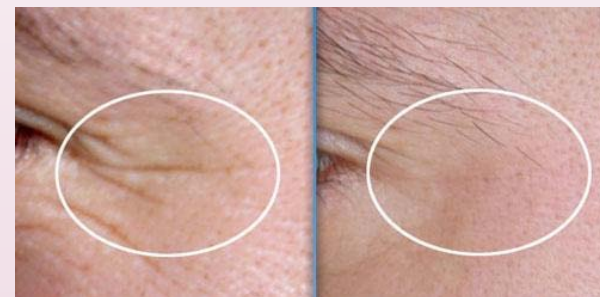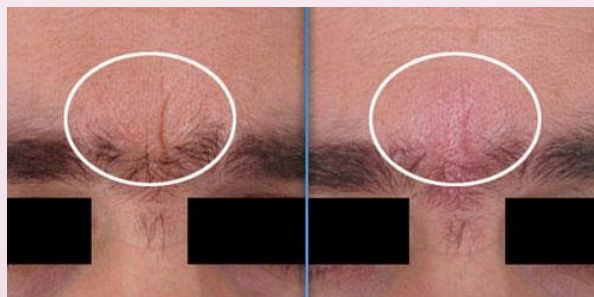

GEZATONE BEAUTY IRIS: ЗАБУДЬТЕ О МОРЩИНАХ!

Последовательность проведения процедуры ридолиза

GEZA *tone*

1. Предварительно очистите кожу в зонах воздействия. Хорошее увлажнение только улучшит результат.
2. Поместите электроды вдоль морщины у ее основания и коснитесь пальцем овальной сенсорной кнопки. Через несколько секунд начнется подача тока, и Вы услышите прерывистый звуковой сигнал.
3. Во время проведения процедуры необходимо четко зафиксировать электроды в основании морщины и не допускать никаких перемещений.
4. В перерывах между использованием микроэлектродов пальцем массируйте обрабатываемую зону.
5. Продолжайте последовательно обрабатывать выбранную линию морщин в строгом соответствии со схемой.
6. Длительность воздействия (от 12 до 32 секунд). Необходимо соблюдать небольшой интервал (15-20 секунд) между контактами, во время которого производится массаж обрабатываемой области лица.
7. Если морщина представляет собой целую линию, повторите весь цикл по всей ее длине для достижения одинакового эффекта по всей зоне воздействия аппарата.
8. Двигаясь горизонтально вдоль линии морщин, в перерывах между производимыми контактами приподнимайте аппарат и прикладывайте его снова к коже.



рис. 1



рис. 2



рис. 3



рис. 4



рис. 5



рис. 6

Морщины в области носогубных складок



Данная процедура позволяет разгладить линию морщин, идущую от носа к губам. Начните процедуру с обработки морщин, расположенных у носа, и проведите процедуру, двигаясь по всей длине каждой морщины (от носа к углу рта). Не забывайте массировать обрабатываемые участки кожи в перерывах между контактами.



рис. 1



рис. 2



рис. 3



рис. 4



рис. 5



рис. 6

Линия губ

GEZA *tone*

Данная процедура позволяет сделать контур губ более четким, губы – полнее и устранить мелкие морщины. Начните процедуру с обработки уголка рта и двигайтесь вперед вдоль линии губы по направлению к внутренней стороне, совершая полный круг. Количество контактов зависит от выбранной Вами схемы. Не забывайте массировать обрабатываемые участки губ в перерывах между контактами.



рис. 1



рис. 2



рис. 3



рис. 4



рис. 5



рис. 6

Область вокруг глаз

GEZA *tone*

Данная процедура позволяет разгладить морщины вокруг глаз, так называемые "гусиные лапки". Начните процедуру с обработки верхних морщин. Не забывайте массировать обрабатываемые участки в перерывах между контактами. Используйте насадку, которая охватывает всю линию морщины. Будьте предельно аккуратны, обрабатывая область вблизи глаз.



рис. 1

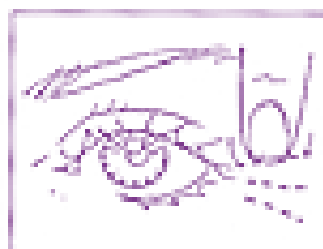


рис. 2



рис. 3



рис. 4

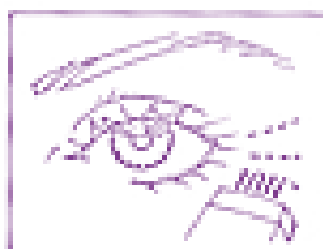


рис. 5



рис. 6

Массажер для лица «Омоложение кожи» 3-в-1 Beauty Iris Gezatone m708

GEZA
tone

- Ридолиз заставляет исчезнуть даже самые глубокие морщины, которые не убрать другими способами. Таким образом, ридолиз – великолепная и безопасная замена инъекциям и пластическим операциям.
- Теперь вы можете не сдерживать чувства и эмоции, беспокоясь о новых морщинках, позволяйте себе смеяться и улыбаться, ваше лицо уже не испортят морщины, ведь у Вас есть **Beauty Iris Gezatone m708, а морщин больше нет!**

В дополнение к ридолизу аппарат оснащен двумя востребованными и эффективными функциями – **гальваническими токами и микротоками**, которые позволяют осуществить комплексное воздействие на проблемы увядающей кожи, восстанавливая ее состояние.



Массажер для лица «Омоложение кожи» 3-в-1 Beauty Iris Gezatone m708

GEZA
tone

Гальванические токи

- Гальванические токи в традиционной косметологии и медицине используются для усиления проникновения в кожу активных ионов, а так же способствуют увеличению вырабатываемого собственного коллагена, что важно для поддержания упругости и молодости кожи.
- Методика «ионофореза» способствует более быстрому и более глубокому проникновению в кожу активных компонентов косметических препаратов.
- Косметический комбайн Beauty Iris рассчитан на три программы гальванотерапии: очищающую, восстановительную и активизирующую клеточную регенерацию, что существенно повышает эффективность ридолиза, поскольку кожа имеет возможность получить все необходимые вещества для синтеза белков молодости.
- Гальванотерапия помогает Вашей коже снова обрести свежесть, упругость и молодость, избавившись от возрастных изменений.



Массажер для лица «Омоложение кожи» 3-в-1 Beauty Iris Gezatone m708

GEZA
tone

Микротоковая терапия

- Микротоки воздействуют на все слои кожи и мимические мышцы, возвращая обменные процессы в норму.
- Микротоковая терапия восстанавливает процессы, происходящие в каждой клетке, и устраняет мышечные спазмы, которые нередко являются причиной возникновения морщин. Микротоки оказывают мягкое лимфодренажное действие, восстанавливают энергетический потенциал клеток, стимулируют выведение шлаков и токсинов, активизируют синтез коллагена и эластина, что усиливает эффективность процедур ридолиза.



BEAUTY IRIS GEZATONE – ПРОЦЕДУРЫ КРАСОТЫ

GEZA
tone

Комплексное применение ридолиза, гальванических токов, микротоков и специальных аппаратных косметических средств считается самым эффективным решением возрастных проблем лица.

РЕЗУЛЬТАТЫ

- Специалисты в области косметологии, дерматологии и эстетической медицины советуют делать процедуры с Beauty Iris в домашних условиях, считая их эффективными и полностью безопасными.
- Независимые исследования доказали, что аппарат Beauty Iris эффективно омолаживает кожу всего за несколько сеансов, возвращая ей красоту и свежесть.
- Положительный результат его использования в комплексе с аппаратными косметическими средствами виден сразу после первого сеанса.

Многочисленные положительные отзывы о Gezatone Beauty Iris подтверждают его функциональность, безопасность и эффективность в борьбе с возрастными изменениями кожи!



БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ аппарата Beauty Iris Gezatone m708

- Использование Beauty Iris может оказаться альтернативным вариантом для тех, кто собирается использовать инъекции коллагена, филлеры или другие инвазивные меры для омоложения кожи.
- Метод ридолиза, применяемый в приборе Beauty Iris абсолютно безопасен, что подтверждается многочисленными клиническими испытаниями.
- Видимый результат вы получите уже после первого сеанса, однако курс регулярных процедур даст Вам возможность «накопить» положительную реакцию кожи.
- Для максимального результата, процедуры с Beauty Iris лучше проводить с использованием аппаратных косметических средств, произведенных компанией Beauty Style.










КОСМЕТИКА ДЛЯ ЛИЦА ПРИ РАБОТЕ с аппаратом Beauty Iris Gezatone m708

- Для проведения процедур с прибором BEAUTY IRIS необходимо использовать специальные косметические средства, предназначенные для аппаратных процедур. Для разных режимов работы аппарата предусмотрено использование разных косметических средств для достижения оптимального результата.
- Проведение процедур по сухой коже категорически запрещено.



КОСМЕТИКА к Beauty Iris Gezatone m708

ДЛЯ ПРОЦЕДУР В РЕЖИМЕ МИКРОТОКОВ и РИДОЛИЗА							
	Все типы кожи	Морщины дряблость, возрастные изменения	Сниженный тонус кожи	Неровный, бледный цвет лица	Чувствительная кожа, купероз	Очень сухая кожа Обезвоженная кожа	Профилактика преждевременного старения
 ГЕЛЬ «УЛЬТРАЛИФТ»	✓ после 35	✓	✓	✓			
 ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ	✓ после 35	✓	✓	✓		✓	
ДЛЯ ПРОЦЕДУР В РЕЖИМЕ ГАЛЬВАНОТЕРАПИИ / Используется «заряженная» косметика							
 КОМПЛЕКС КОМФОРТ «+»				✓	✓		
 КОМПЛЕКС «КРИСТАЛЬНЫЙ РОДНИК» «-»	✓		✓		✓	✓	✓
 КОМПЛЕКС «ПИТАТЕЛЬНЫЙ» «-»	✓		✓	✓		✓	✓
 КОМПЛЕКС «МОЛОДОСТЬ БЕЗ ГРАНИЦ» «-»	✓ после 30	✓	✓	✓			✓
 КОМПЛЕКС «СОВЕРШЕНСТВО» «-»	✓ после 35	✓	✓	✓		✓	

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Beauty Iris Gezatone m708

GEZA
tone



- Сердечнососудистые заболевания
- Онкологические заболевания
- Беременность
- Заболевания кожи (экзема, дерматит, псориаз)
- Тромбофлебит
- При наличии острых или хронических заболеваний, не перечисленных в этой инструкции, рекомендуется перед использованием прибора проконсультироваться с врачом.

Технические характеристики аппарата Beauty Iris Gezatone m708

► Тех. характеристики

- Макс потребляемая мощность - 0,5 Вт.
- ШК EAN13 2200000429094
- вес 0,77 кг
- Размер упаковки 240x230x65 мм
- кол-во в ящ. 20 шт.
- **Гарантийный срок** эксплуатации 1 год со дня продажи.
- **Производитель:** GEZANNE I.T.C. /Жезанн. Адрес: Saint Avertin 39 rue des Granges Galand, Франция

► Комплектация

- Аппарат Gezatone Beauty Iris модель m708 (с тремя насадками)
- Сетевой адаптер
- Инструкция по эксплуатации
- **Артикул 131089**



GEZA
tone

Массажер для лица
«Омоложение кожи» 3-в-1

Beauty Iris Gezatone m708





GEZA
tone




Москва 8 (495) 925-00-34
регионы РФ: 8-800-200-00-34 (звонок бесплатный)
www.sozv.ru

Присоединяйтесь:

 www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty

 facebook.com/sozvezdiekrasoti

 vk.com/sozvezdiekrasoti