

Аппарат для лазерного омоложения кожи

illuminaqe

Красота интеллекта™



Морщины?
Встречайте:
аппарат, который
действительно
работает

iluminage

Что такое Illuminage Skin Smoothing Laser

illuminate

ОТКРОЙТЕ НОВУЮ МОЛОДОСТЬ ВАШЕЙ КОЖИ

Illuminage Skin Smoothing Laser – первый прибор для разглаживания морщин в домашних условиях. В отличие от многих других методик, он не просто создает видимость молодой кожи. Он способствует полному обновлению и восстановлению кожи, уменьшает морщины на лице, в том числе в области глаз и губ.

ДОКАЗАНО У 87% участников клинических испытаний морщины заметно сократились уже через месяц.*

ОДОБРЕНО FDA (США) Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств. Illuminage – сертифицированный медицинский прибор для домашнего использования.

УДОБНО Процедура занимает всего несколько минут в день.

ДОСТУПНО Аппарат для лазерного омоложения кожи Illuminage Skin Smoothing Laser – это экономия денежных средств по сравнению с профессиональной лазерной терапией.

ТЕХНОЛОГИЧНО

Аппарат произведен одним из лидирующих международных концернов на рынке профессиональных косметологических аппаратов Syneron Medical, который входит в состав группы Unilever.

Мой внешний вид – лучшее доказательство того, что Illuminage Laser работает! **Мои мимические морщинки исчезли.**

Мои глаза снова сияют и выглядят молодыми

- Ольга, 46

* Согласно наблюдениям экспертной группы врачей, специализирующихся в дерматологии и пластической хирургии. Результаты могут отличаться в каждом отдельном случае.

Лазерное омоложение лица с Illuminage Skin Smoothing Laser


illuminate



Как образуются морщины?

iluminage

- Процесс старения кожи начинается после 20 лет, хотя это не всегда заметно.
- Синтез коллагеновых и эластиновых волокон, поддерживающих кожу, начинает замедляться.

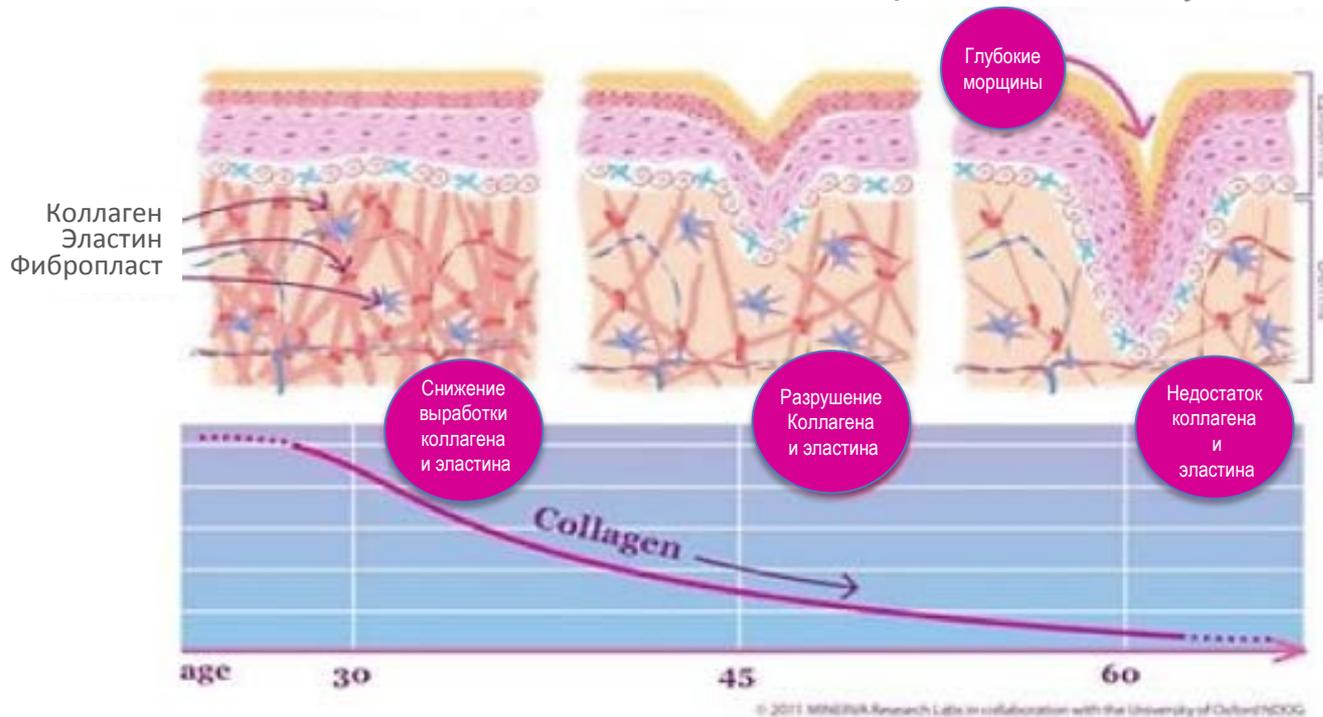

- Снижение выработки коллагена и эластина приводит к уменьшению упругости, тонуса, плотности кожи. В результате образуются морщины.
- Этот естественный процесс часто ускоряет солнечное воздействие, которое вредит коже и делает морщины более заметными.

Доступные методы омоложения кожи

iluminage

ВИД	Метод	Доступность	Стоимость	Частота	Боль	Восстановительный период
ХИМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ	Химические пилинги	Умеренно	\$\$	Регулярно	☹	1 неделя
	Инъекции/ филлеры	Трудно	\$\$\$	Периодически	☹☹	5-7 дней (мин)
	Инъекции/ ботокс	Трудно	\$\$\$	Периодически	☹☹	5-7 дней (мин.)
ЭНЕРГИЯ	Лазерное омоложение дома	Умеренно	\$\$	Ежедневно / Часто	☹	От 1 до 6 часов
	Лазерное омоложение в салонах красоты	Трудно	\$\$\$\$	Курс	☹☹☹	5-7 дней (мин)

Самый передовой способ омоложения кожи лица

iluminage



Первый лазер для разглаживания морщин и омоложения кожи в домашних условиях от израильской компании Syneron Medical – лидера в производстве высокотехнологичного оборудования для косметологов-эстетистов.

Подходит для удаления морщин на лице, в том числе в области глаз и губ.

Как работает Illuminage Skin Smoothing Laser

illuminate




- Со временем в коже замедляется выработка коллагена и эластина, из-за этого снижается эластичность и упругость кожи и начинают появляться мелкие и глубокие морщины.
- Аппарат Illuminage Skin Smoothing Laser воздействует импульсами на структурный каркас кожи, стимулируя ее естественное обновление.
- Импульсы стимулируют процессы выработки нового коллагена и эластина, повышая плотность и упругость кожи.
В результате количество и глубина морщин значительно уменьшается.

Как работает Лазер для лица Iuminage

iLuminage

Косметические препараты в основном воздействуют на внешний слой эпидермиса. Аппарат для разглаживания морщин Iuminage Skin Smoothing Laser действует глубоко в дерме – там, где происходит формирование морщин.

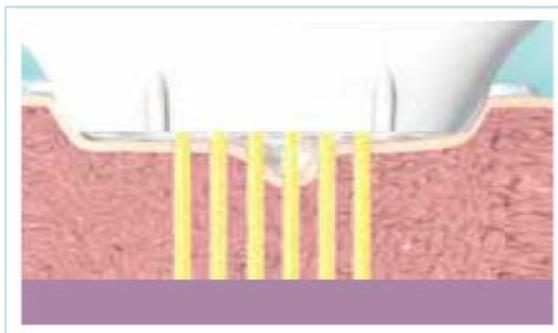

Iuminage Skin Smoothing Laser генерирует короткие импульсы лазерных лучей, которые проникают глубоко в кожу и воздействуют непосредственно на ее структурный каркас, активизируя процессы обновления.

Зоны воздействия лазера представлены «столбиками» поврежденной ткани. Участки неповрежденной ткани между ними стимулируют активное обновление и восстановление поврежденных тканей.

Синтез новых волокон коллагена и эластина обеспечивает «заполнение» морщин. Кожа гладкая, подтянутая и упругая.

Для кого предназначен Illuminage Skin Smoothing Laser

illuminate

- Для всех, кто хочет уменьшить морщины вокруг глаз и губ с помощью клинически испытанного и безопасного продукта.
- Для всех, кто планирует или уже делает процедуры по коррекции морщин у косметолога.
- Для всех, кому нужен максимально эффективный антивозрастной уход за кожей лица.



Как быстро можно увидеть результаты?

iluminage

- Результаты основаны на клинических испытаниях – 3 640 процедур на 58 добровольцах.
- У 78% было отмечено значительное уменьшение морщин через 2 недели.
- У 87% было отмечено значительное уменьшение морщин через 4 недели.
- У 95% было отмечено значительное уменьшение морщин через 12 недель.



Как использовать Illuminage Skin Smoothing Laser

illuminate



Как использовать Illuminage Skin Smoothing Laser

illuminate

Аппарат для омоложения кожи **Illuminage Skin Smoothing Laser** легко войдет в вашу жизнь, потому что он прост в использовании и не отнимает много времени. Пользуйтесь им в соответствии с индивидуальным планом процедур и наслаждайтесь потрясающими результатами.


Шаг 1

Подготовка кожи к процедуре

- Умойте и высушите лицо. Чистая сухая кожа очень важна для оптимального результата.

Шаг 2

- Определите зоны воздействия.
- Выберите интенсивность воздействия (от низкой до высокой).

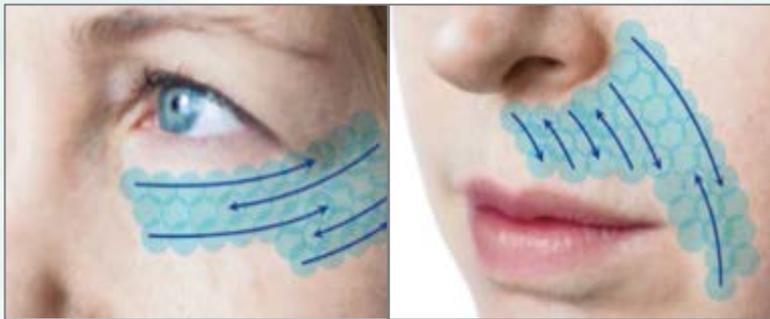

Шаг 3

- Приложите контактную поверхность аппарата к коже.
- Дождитесь подтверждающих звуковых и световых сигналов.
- Передвиньте аппарат примерно на 6 мм в сторону для следующего воздействия.
- Из соображений безопасности, через 200 импульсов устройство автоматически отключается на 4 часа.
- Используйте лазер 5 дней в неделю в течение 12 недель как часть ежедневного ухода за кожей.

Шаг 4

Уход за кожей после процедуры

- После процедуры возможны небольшой дискомфорт и покраснение на лице. Это нормальное явление и обычно проходит в течение 30 минут.
- Для уменьшения дискомфорта можно использовать успокаивающий крем или гель.

Особенности и преимущества Illuminage Skin Smoothing Laser

illuminate

- Аппарат Illuminage Skin Smoothing Laser был разработан компанией Syneron Medical – ведущим производителем косметических аппаратов для эстетической медицины, дерматологической и пластической хирургии.
- Именно благодаря продуктам компании Syneron Medical, пациенты могут достичь профессиональных результатов в домашних условиях.
- Стремясь сделать процедуры для кожи более доступными, ученые компании Syneron Medical в течение многих лет работали над адаптацией лазерной технологии для домашнего пользования.
- После многих лет исследований и интенсивных клинических испытаний, компания Syneron Medical выпустила в продажу **прибор для омоложения кожи в домашних условиях Illuminage Skin Smoothing Laser.**

Для кого предназначен прибор для омоложения кожи Illuminage Skin Smoothing Laser?

Прибор для омоложения кожи Illuminage Skin Smoothing Laser подходит для женщин и мужчин старше 30 лет, с любым типом кожи, у которых имеются мимические морщинки и крупные морщины на лице, в области глаз и губ.

Как часто нужно им пользоваться?

Пользуйтесь им 5 дней в неделю в течение 12 недель как часть ежедневного ухода за кожей, затем раз в неделю для поддержания достигнутых результатов.

Сколько времени длится каждая процедура?

Каждая процедура занимает 3-4 минуты. Аппарат идеально подходит для проведения процедур в домашних условиях.

Каковы преимущества использования прибора для омоложения кожи Illuminage Skin Smoothing Laser?

Прибор Illuminage Skin Smoothing Laser – это клинически доказанная технология лазерного омоложения кожи, доступная в домашних условиях абсолютно всем. Эффективность процедур лазерного омоложения значительно превышает эффект от инъекций и косметических средств – прибор стимулирует естественные процессы омоложения и восстановления кожи.

Выгоды от приобретения Illuminage Skin Smoothing Laser

illuminate

Потрясающие результаты: разглаживание поверхности кожи, улучшение ее состояния, уменьшение длины и глубины морщин вокруг глаз и губ.

Комплексная система безопасности аппарата

- Автоматические сенсоры посылают импульсы только при контакте с кожей.
- Процесс авторизации устройства, который предотвращает использование другими людьми (например, детьми).
- Автоматическое отключение устройства, если оно не используется в течение 30 секунд.

Сочетание простоты и удобства для домашнего использования и клинически проверенной технологии профессиональных лазеров.

- Интуитивное управление и комплексные системы безопасности.
- Легкий, эргономичный дизайн. Максимально удобен и прост в применении.
- Простые визуальные и звуковые индикаторы.
- Простая, пошаговая инструкция.
- Индивидуальный план процедур.



Как устроен Illuminage Skin Smoothing Laser

illuminate



- A Сенсор контакта с кожей.** С помощью этого сенсора импульс посылается только при полном контакте устройства с кожей.
- B Линза.** При полном контакте с кожей, импульс проходит через линзу.
- C Область излучения.** Отверстие (окно), через которое происходит излучение.
- D Подтверждающие световые сигналы.** Белый световой сигнал означает, что контакт с кожей установлен и устройство готово посылать импульс. Синий световой сигнал означает, что устройство посылает лазерный импульс.

- A Дисплей.** Отображает приветствие при включении устройства, настройки, счетчик импульсов и ошибки системы.
- F Кнопка включения/выключения.** Включает и выключает устройство. С помощью кнопки во включенном состоянии меняются настройки.
- G Индикатор зарядки.** Горит, когда устройство заряжается или подключено к сети питания.

Благодаря эргономичному дизайну и интуитивным средствам управления, прибор максимально комфортен и прост в использовании, и позволяет добиться профессиональных результатов у себя дома.



Процедура красоты

Illuminage Skin Smoothing Laser

illuminate

Подготовка к процедуре, очищение



УВЛАЖНЯЮЩАЯ ПЕНКА
ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА
Аква 24 Beauty Style
200 мл Арт. 4515701



ПЕНКА ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА
СО СТВОЛОВЫМИ
КЛЕТКАМИ АРГАНЫ
Beauty Style
200 мл Арт. 4515424



МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА
«Комфорт» ДЛЯ СНЯТИЯ
МАКИЯЖА Beauty Style
150 мл Арт. 4515800

Проведение процедуры

Процедура проводится по чистой, сухой коже.

Завершение процедуры



ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА
С БИОЦЕЛЛЮЛОЗОЙ Beauty Style
Для ухода за чувствительной и
поврежденной кожей.
Смягчает, увлажняет, устраняет
раздражения.



ШЕЛКОВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
С ХИТОЗАНОМ Beauty Style
Хитозан обладает успокаивающим
свойством, устраняет покраснения
и воспаления.

Обязательный ежедневный уход



СС КРЕМ КОМФОРТ Beauty Style
Необходимо использовать во время
всего курса процедур с прибором
Illuminage Skin Smoothing Laser.



ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
КРЕМ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ
ЛАЗЕРНОЙ И RF КОРРЕКЦИИ
КОЖИ Beauty Style
100 мл Арт. 4515501

- Беременность, лактация.
- Очаги воспаления в области воздействия.
- Ожоги, травмы, порезы. Процедуры можно начинать только тогда, когда кожа заживет.
- Псориаз и дерматозы.
- Герпес в области воздействия.
- Если Вы проходите курс химический пилингов. После курса химических пилингов прибор можно применять не ранее, чем через 2-3 недели.
- Онкологические заболевания.
- Системные заболевания крови, иммунной системы, соединительной ткани.
- Сахарный диабет в стадии декомпенсации.
- Тяжелые формы гипертонии и ишемической болезни сердца.
- Расширенные сосуды (купероз) в области проведения процедуры.
- Склонность к образованию келлоидных рубцов.
- Витилиго.
- Прибор не используется на момент приема антибиотиков или дерматропных препаратов (например, роаккутан).
- Использование ретиноидов для приема внутрь за последние 6 месяцев или использование местных дерматологических средств с ретиноидами за последние 2 недели.
- Свежий загар или пользование солярием за последний месяц.
- Эпилепсия.
- Наличие золотых нитей непосредственно в зоне воздействия прибора.

Технические характеристики

iluminage

Применение	Iluminage Skin Smoothing Laser предназначен для коррекции морщин в области вокруг глаз и губ
Типы кожи	Все типы кожи I – VI
Области воздействия	Лицо, зона вокруг глаз и губ
Курс процедур	Ежедневная обработка «по будням» с понедельника по пятницу. В течение 12 недель. После использовать при необходимости 2 раза в неделю.
Технические характеристики	Характеристика лазера: Длина волны излучения: 1440 нм Максимальная мощность излучения: 4 Дж/см ² за импульс Минимальная мощность излучения: 3 Дж/см ² за импульс Площадь воздействия: 7 мм ² Длительность импульса: 60 мс Частота импульсов: до 1 Гц

Высокие технологии косметологии

Illuminage Skin Smoothing Laser

iluminage

Первый аппарат для лазерного омоложения кожи лица в домашних условиях.
Применяется для омоложения и безоперационной подтяжки кожи лица.
Подходит для воздействия на область вокруг глаз и губ.
Клинически испытан и безопасен.
Эффект от применения отчетливо виден всего через месяц процедур.
Обеспечивает устойчивый эффект после курса в 12 недель процедур.



Illuminage Skin Smoothing Laser ОТ КУЛЬТОВОГО ДИЗАЙНЕРА

illuminate

КАРИМ РАШИД

Один из самых успешных и продуктивных промышленных дизайнеров на сегодняшний день.

3000 дизайнов в производстве

300 наград

Его работы представлены в 20 постоянных музейных коллекциях.

Работал в 35 странах.

225 клиентов: включая Alessi, Artemide, Disney, Swarovski, Veuve Clicquot, Estee Lauder, Mastercard, Giorgio Armani, Citibank, Shiseido, Coca-cola, Samsung, Uniliver.

Аппарат **Illuminage Laser** – один из любимых проектов великого дизайнера, в котором мастер воплотил свои представления о современной высокотехнологичной красоте.



Karim



iluminage

THE BEAUTY OF SMART™

КОМПАНИЯ SYNERON MEDICAL – ведущая компания в разработке и производстве приборов для эстетической медицины. Именно Syneron Medical создала технологию IPL (интенсивного импульсного света), а также революционную профессиональную технологию **elōs**. На сегодняшний день доля мирового рынка компании составляет 38%, продукция распространяется в 90 странах мира. Штаб квартира и исследовательские подразделения расположены в Израиле и США.

Продукция компании основана на клинически испытанных технологиях, выбранных на рынке профессиональных приборов эстетической медицины. Именно благодаря продуктам компании Syneron Medical, женщины могут достичь профессиональных результатов в домашних условиях.

ВИДЫ ТЕРАПИИ ДЛЯ ТЕЛА

- Формирование силуэта
- Сокращение целлюлита
- Лазерное расщепление жира
- Удаление волос
- Вены/сосуды на ногах
- Удаление татуировок/пигментации

ВИДЫ ТЕРАПИИ ДЛЯ ЛИЦА

- Фракционная терапия кожи
- Сокращение морщин
- Омоложение кожи
- Подтяжка кожи
- Лечение акне

SUBLATIVE
REJUVENATION

VelaShape™

LipoLite™

GentleYAG

GentleLASE

Vbeam Perfecta

GentleMax

AlexTriVantage

QuadraLASE™

elight™

elaser™

emax™

ematrix™



iluminage

THE BEAUTY OF SMART™

Iluminage – торговый знак компании Syneron Medical, которая входит в группу Unilever



Компания Unilever является одним из ведущих мировых поставщиков продуктов питания, средств для дома и персонального ухода, которые продаются более чем в 190 странах.

- В настоящее время в 7 из 10 домов по всему миру, более 2 миллиардов людей ежедневно пользуются этой продукцией.
- Компания, торгующая товарами широкого потребления по всему миру на 58 млрд. долларов и с бизнесом в 20 млрд. долларов в сфере средств для персонального ухода.



iluminage



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

Москва 8 (495) 925-00-34

регионы РФ: 8-800-200-00-34 (звонок бесплатный)

www.sozv.ru

Присоединяйтесь:



www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty



facebook.com/sozvezdiekrasoti



vk.com/sozvezdiekrasoti