

инструкция по эксплуатации

ПОДУШКА-МАССАЖЕР

GÉZA *tone*



Введение

Поздравляем Вас с удачной покупкой и благодарим за выбор продукции компании Gezatone!

В ритме современной жизни так важно уметь отдыхать и расслабляться. Легкая и компактная подушка-массажер Gezatone «Яблоко», модель AMG393 – это профессиональный массаж, который можно выполнить дома, в офисе или автомобиле.

Массаж является древнейшим приемом снятия напряжения, усталости, недомогания, стресса. **Подушка-массажер Gezatone «Яблоко», модель AMG393** незаменим для расслабления и снятия напряжения в мышцах, общего восстановления и тонизации организма.

Уникальное сочетание в подушке-массажере эффективного массажа с инфракрасным воздействием отлично расслабляет мышцы и поможет Вам при неприятных ощущениях, связанных со стрессом и усталостью в шейно-воротниковой зоне и спине.

Преимущество подушки-массажера Gezatone «Яблоко» - возможность использования в комфортных домашних условиях, автомобиле, поезде.


Подушка-массажер Gezatone «Яблоко» прибавит Вам сил и бодрости, улучшит самочувствие и заметно поднимет настроение!



Внешний вид аппарата

Кнопка включения / выключения - - - - -
ON/OFF

8 встроенных массажных
ролика с ИК - излучением

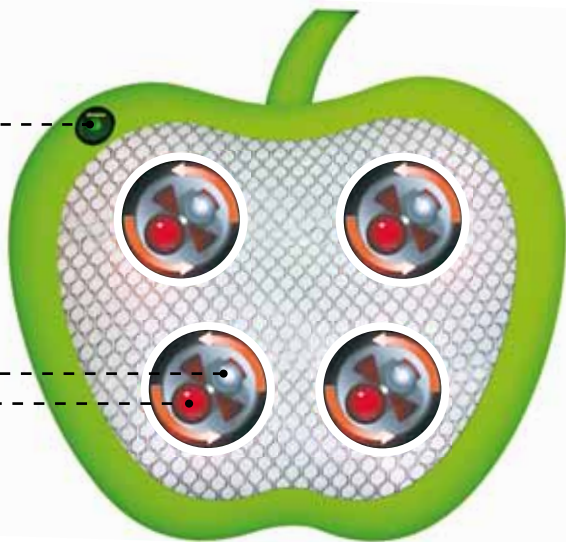

1. Сетевой адаптер

2. Адаптер питания от
«прикуривателя» в автомобиле

3. Разъем для подключения
адаптера (сетевого, автомобильного)

Функции подушки массажера

8 встроенных массажных ролика в сочетании с ИК - излучением обеспечивают массаж глубоких тканей, эффективно снимают мышечное напряжение, усталость, улучшают микроциркуляцию, снимают синдром затекшей шеи, дарят Вам несравнимые моменты расслабления.

- ИК - излучение
- Автоматическая смена направления вращения массажных роликов позволяет выполнить процедуру расслабляющего массажа
- Автоматическое отключение подушки- массажера через 20 минут





Массаж шеи

Расположитесь в кресле так, чтобы массажер плотно прилегал к области Вашей шеи. Легкий массаж способствует улучшению микроциркуляции шейного и прилегающих отделов, ускоряет метаболические процессы, снимает спазм мышц, расслабляет напряженные мышцы шеи. Регулярное использование подушки-массажера способствует улучшению локальной микроциркуляции, в результате чего происходит снятие усталости и стресса.



Массаж спины и поясницы

Убедитесь, что массажер плотно прилегает к области спины и поясницы. Разминающие движения помогают улучшить микроциркуляцию, в результате чего снимаются боли в спине и пояснице. Регулярное использование подушки-массажера значительно улучшает локальное кровообращение, позволяет снять усталость, уменьшить боли в пояснице.

Применение подушки массажера

Использование в домашних условиях

Подключите сетевой адаптер к разъему на подушке - массажере.

Подключите подушку - массажер к сети.



Использование в автомобиле

Подключите шнур питания от прикуривателя к разъему подушке - массажера.

Разъем от шнура питания подключите к прикуривателю автомобиля.



Выполнение массажа



Включите подушку – массажер нажатием кнопки питания ON/OFF, расположенной в верхнем правом углу.

При включении аппарата массажные ролики высвечиваются красным и начинают вращаться.

По истечении 1 минуты вращение роликов приостанавливается.

Спустя несколько секунд их вращение возобновляется, но в противоположную сторону.

Чередование вращения продолжается 20 минут, после чего подушка – массажер выключается автоматически.

При однократном нажатии кнопки питания ON/OFF отключается ИК-излучение.

Для завершения выполнения программы массажа необходимо нажать и удерживать кнопку питания ON/OFF 3 секунды.

После 20 минут непрерывной работы массажера – подушки выключайте ее, по меньшей мере, на 30 минут для охлаждения.

Противопоказания к использованию

- во время беременности;
- при наличии повреждений и заболеваний кожи, ожогов в месте воздействия;
- после приема успокоительных, болеутоляющих и снотворных средств, а также алкоголя;
- люди, использующие кардиостимуляторы должны получить разрешение врача на использование данного аппарата;
- при диабете следует получить разрешение врача на использование данного аппарата.



Меры предосторожности

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом использования массажера и сохраните ее на будущее!

Во избежание риска поражения электрическим током соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Всегда отключайте сетевой адаптер из розетки сразу после завершения использования аппарата и перед проведением обслуживания и чистки.
- Запрещается использование аппарата в помещении бассейна или душевой комнаты.
- Не располагайте аппарат или любую из его частей в местах, где есть риск их падения в воду.
- Не касайтесь и не пытайтесь извлечь упавший в воду аппарат до отключения сетевого адаптера из розетки.
- Запрещается любое дальнейшее использование аппарата, если произошло проникновение воды внутрь подушки-массажера, корпуса сетевого адаптера.
- Применяйте с аппаратом только оригинальный сетевой адаптер, входящий в комплект поставки.
- Запрещается использовать во время сна.
- Избегайте ситуаций, когда вы можете заснуть во время использования аппарата. Например, после приема успокоительных или снотворных препаратов, алкоголя.
- Используйте аппарат только по его прямому назначению и строго в соответствии с данным руководством по эксплуатации.



Уход и обслуживание

1. Обязательно отключайте аппарат от сети и давайте ему остыть перед проведением обслуживания и чистки.
2. Теканевую поверхность подушки-массажера следует очищать мягкой, слегка влажной тканью. Никогда не погружайте подушку-массажер в жидкость и не позволяйте ей намокать.
3. Запрещается использовать для чистки аппарата абразивные средства, жесткие щетки, растворители, бензин, керосин, полироли.
4. Не сушите массажер-подушку на солнце или рядом с нагревательными приборами.
5. Запрещается подвергать массажер-подушку сухой химчистке.

Технические характеристики

Напряжение питания: AC 220-240 В./ 50-60 Гц, DC 12 В, 1500 мА

Потребляемая мощность: не более 18 Вт

Время непрерывной работы: не более 20 мин.

Диапазон допустимых температур воздуха: 5°C - 40°C

Допустимый уровень влажности воздуха: < 80%

Размеры в упаковке: 390 x 335 x 150 мм

Вес в упаковке: 2.25 кг

Комплектность

Подушка-массажер – 1 шт.

Сетевой адаптер – 1 шт.

Адаптер для питания от «прикуривателя» автомобиля – 1 шт.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Упаковочная коробка – 1 шт.





time to *relax*