



**МАССАЖЕР
ДЛЯ ЛИЦА
BIOLIFT4
GEZATONE M701**



**Миостимуляция
+
Гальваника**

МЫ ОТКРОЕМ ДЛЯ ВАС ВСЕ ТАЙНЫ КОСМЕТИЧЕСКОГО УХОДА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

- С возрастом кожа лица теряет упругость, и все отчетливее проявляются морщины. Но проблема лежит глубже, ведь тонус теряют также и мышцы, на которых фиксируется кожа.
- Как результат – после 35 лет проступают четкие глубокие морщины в области лба, носогубных складок, овал лица «плывет», и с этим невозможно справиться только косметикой и массажами. Необходимо более мощное воздействие. Именно такое производит импульсный массажер для лица от известной французской компании Gezatone.
- Аппарат **Biolift4 m701** комбинирует **три методики** воздействия, которые дают потрясающий результат омоложения, подтяжки и обновления кожи изнутри!
- Сочетание миостимуляции и гальванического ионофореза, усиленных вибромассажем, гарантирует результат, сравнимый с круговой подтяжкой лица, но без боли, риска и нежелательных последствий.



Артикул - 1301149

МЕТОДИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

1-я методика ЭМС – миостимуляция поднимет «упавшие мышцы».

Действие

- Методика миостимуляции – это известное более 40 лет **средство для подтяжки и тренировки обвисших мышц лица**.
- По факту, прибор с помощью слабых импульсных токов, подающихся с электродов, создает эффект тренировки мышц, что приводит к их сокращению, тонизации и укреплению.
- Эта методика идеально подходит для женщин за 35 лет, а также для мужчин, у которых зачастую преобладает именно мышечное старение.

Результат

- Усиливается циркуляция крови и лимфы.
- Укрепляются стенки сосудов.
- Снимается отечность.
- Овал лица становится более четким.
- Носогубные складки разглаживаются.
- Глубокие морщинки на лбу уменьшаются.
- Всего 15- 20 процедур необходимо, чтобы увидеть результат, который сохраняется надолго!

МЕТОДИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

2-я методика ИОНОФОРЕЗ

эффект «филлеров» без инъекций!

Действие

- Ионофорез – это технология проведения косметических средств в глубокие слои кожи.
- Благодаря слабым постоянным токам и использованию специальной косметики или патчей с содержанием коллагена который беспрепятственно проникает в морщину, буквально заполняя ее изнутри.
- Благодаря гальваническим токам косметика не остается на поверхности кожи, а интенсивно проникает вглубь, туда, где происходят все активные процессы.

Результат

- После курса ионофореза отмечается повышение содержания коллагена к тканях в среднем на 30%.
- Морщинки разглаживаются
- Кожа становится подтянутой и упругой
- Внешний вид лица улучшается
- Кожный иммунитет повышается.
- Запускаются процессы выработки собственного коллагена
- Стимулируется деятельность клеток кожи.

МЕТОДИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

3-я методика **ВИБРОМАССАЖ** - улучшение цвета кожи и внешнего вида!

Действие

- Интенсивная вибрация, применяемая в приборе помогает устранить спазм мимической мускулатуры, восстанавливает кровообращение и стимулирует лимфоток.
- Благодаря вибромассажной функции эффективность прибора повышается до максимума, что гарантирует быстрые результаты, которые сохраняются надолго.

Результат

- Кожа выглядит более свежей и подтянутой
- Улучшается цвет лица.
- Уходят отечность и одутловатость.
- Приятная и комфортная процедура с гарантированным результатом.
- Эффективность и безопасность метода доказана исследованиями.

ПОКАЗАНИЯ

Импульсный массажер Biolift4 Gezatone предназначен:

- Для разглаживания стойких морщин в области лба.
- Для восстановления нормального тонуса мышц вокруг глаз и избавления от «гусиных лапок».
- Для подтяжки щек и восстановление овала лица.




- Для разглаживания носогубных складок.
- Для выравнивания морщин вокруг рта.
- Для лифтинга зоны шеи и подбородка.



ВНЕШНИЙ ВИД

Импульсный массажер Biolift4 Gezatone

ЗОНЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ:

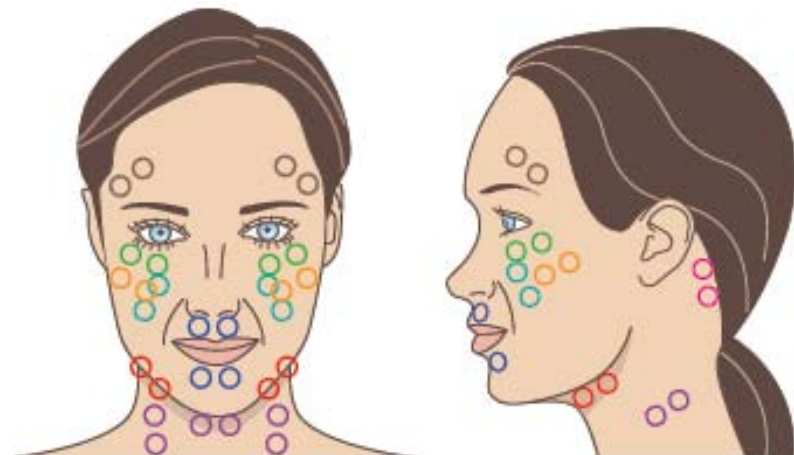

- ЗОНА ЛБА
- ЗОНА НИЖНЕГО ВЕКА
- ЗОНА ЩЕКИ
- ЗОНА НОСА И НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
- ЗОНА ВЕРХНЕЙ ГУБЫ
- ЗОНА НИЖНЕЙ ГУБЫ
- ЗОНА ПОДБОРОДКА
- ЗОНА ШЕИ
- ЗАУШНАЯ ЗОНА

Четыре программы воздействия, ориентированные на максимальный эффект омоложения и разглаживания морщин.

- Программа «Укрепление» на базе миостимуляции разработана для подтяжки мышц и разглаживания глубоких стойких морщин. Эта программа идеально подойдет для возрастной группы 35- 50 лет.
- Программа «Тонизация» направлена на более интенсивную стимуляцию мышечных волокон, она рекомендуется для возраста 50+.
- Программа «Инфузия» использует в основе своей гальванические токи и проводится по специальным патчам с большим содержанием коллагена.
- Программа «Расслабление» специально разработана для снятия спазма мимической мускулатуры, помогает справиться с "гусиными лапками" в области глаз, разгладить крупные морщины в области переносицы и на лбу.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сочетание интенсивной мышечной подтяжки и насыщение кожи активными компонентами косметики дает стойкий выраженный результат, который является комплексным и сохраняется надолго!
- Вы можете наблюдать результат всего через месяц регулярных процедур, и он сохраняется до полугода!
- Массажер для лица Gezatone – это великолепный способ вернуть былую молодость как женщинам, так и мужчинам, которые желают выглядеть более молодо и привлекательно.
- Попробуйте и оцените его эффективность сами!
- Прибор работает от батареек, его очень удобно повсюду брать с собой, чтобы не прерывать курс процедур, необходимый для стойкого результата!



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



Гель для лица с
экстрактом икры
Beauty Style, 120гр



Гель активный
"Ультралифт",
Beauty Style
150 и 600 мл

В комплекте с прибором прилагаются коллагеновые (одноразовые) патчи, когда они закончатся вы можете приобрести их отдельно или использовать косметические наборы для глаз компании Beauty Style и продолжать процедуры с тем же эффектом.



Маска для глаз лифтинговая с
коллагеном (2 шт)
Beauty Style



МАСКА ДЛЯ ГЛАЗ КОЛЛАГЕНОВАЯ BEAUTY STYLE



Маска на основе чистого морского коллагена увлажняет кожу, заметно выравнивая морщинки вокруг глаз. Использование маски как самостоятельного средства, так и в комбинации с приборами производит выраженный лифтинг- эффект.

Кожа вокруг глаз более тонкая, подвержена мимической нагрузке и нуждается в особом уходе. Мимические морщины «гусиными лапками» появляются на коже вокруг глаз уже с 20 лет. Это связано с уменьшением количества коллагена обеспечивающего упругость и эластичность кожи. Чтобы справиться с морщинками вокруг глаз, необходим комплексный подход, в который обязательно следует включить маски на основе чистого коллагена Beauty Style.

Активные компоненты и их действие:

- Коллаген повышает упругость кожи, способствуя разглаживанию морщин вокруг глаз.
- Масло виноградных косточек борется со свободными радикалами, замедляя процессы старения
- Масло лаванды обладает противовоспалительным эффектом, снимает раздражение и покраснение.
- Гиалуроновая кислота увлажняет кожу и препятствует потере влаги.
- Фактор клеточного роста усиливает регенерацию клеток кожи.



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Заболевания сердечнососудистой системы, наличие кардиостимулятора
- Онкологические заболевания
- Период беременности
- Эпилепсия, сахарный диабет, рассеянный склероз
- Нарушение целостности кожных покровов (царапины, ссадины), дерматологические заболевания (экзема, дерматит), не использовать на родимых пятнах
- Острые воспалительные процессы, гнойнички, воспаление сальных желез
- Присутствие в зоне воздействия металлических имплантатов (при наличии металлических зубных протезов, брекетов и т.п. рекомендуется изолировать их от воздействия гальванического тока, поместив между зубами и губой кусочек токонепроводящего материала - тонкий пластик, пленку, х/б ткань)
- При выполнении процедур не затрагивать параорбитальную область (глазное яблоко), слизистую губ и зону проекции щитовидной железы



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование: Biolift4 m701 Прибор для ухода за кожей Gezatone

Артикул: 1301149

Напряжение питания: DC 9 В от батареи

Выходное напряжение: 10....60В

Частота повторения импульсов: 50 ± 200 мкс.

Диапазон допустимых температур воздуха: 5°C- 40°C

Допустимый уровень влажности воздуха: < 80%

Размер в упаковке: 240x85x220мм

Вес в упаковке: 0,63 кг

ШК: 3004564029580





сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

МОСКВА: (495) 925- 00- 34

РЕГИОНЫ РФ (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ): 8- 800- 200-
00- 34

www.sozv.ru

info@sozv.ru

