

GÉZATONE

# ВЕМ III Pro

массажер для глаз с тепловой и вибромассажной функциями




МАССАЖЕР ДЛЯ ГЛАЗ ВЕМ III PRO  
Gezatone

## Массажер для глаз VEM III Pro профессиональный уход за областью глаз.

В современном мире глаза испытывают огромную нагрузку. Компьютеры, яркие световые композиции, вождение автомобиля, чтение: все это приводит к усталости глаз, снижению функций зрения. Как результат, в глазах как будто насыпан песок, четкость зрения ухудшается, да и общее самочувствие становится хуже.

Мы стараемся сфокусироваться и щуримся, провоцируя появление морщин. Справиться с этими явлениями можно, если приобрести массажер для глаз Gezatone VEM III Pro и регулярно проводить процедуры расслабляющего массажа.

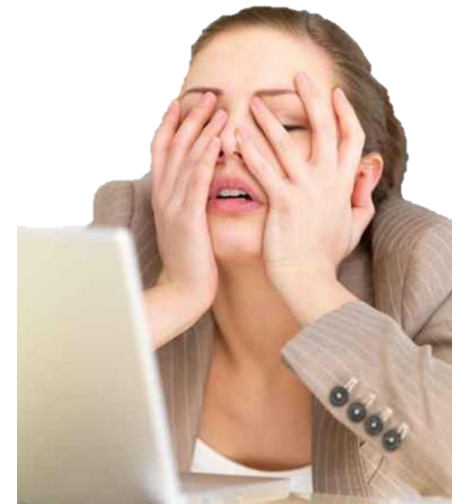

## КОМУ НЕОБХОДИМ Массажер для глаз **BEM III Pro.**



Тем, кто много времени проводит за компьютером, с планшетом или смартфоном. Мерцающий свет мониторов перегружает глаза, но мало кто делает перерывы каждый час работы за компьютером. Массажер для глаз BEM III Pro - оптимальное решение для снятия усталости глаз и спазма мышц.



Тем, кто водит автомобиль. Постоянное напряжение зрения повышает нагрузку на сосуды, провоцирует застой лимфы, что приводит к покраснению и отекам. От этого легко избавиться, проводя ежедневный массаж глаз.




Всем, кто хочет сохранить остроту зрения и красоту глаз надолго. Массаж глаз улучшает состояние мышц и сосудов, противодействует возрастным изменениям зрения, оказывает косметическое действие, повышает тонус кожи, корректирует отеки и темные круги.

## ФУНКЦИИ

### Массажера для глаз ВЕМ III Pro.


- Вибромассаж способствует снятию спазма мышц, коррекции морщин.
- Прессвоздействие стимулирует крово- и лимфоток, уменьшает отеки.
- Магнитотерапия улучшает работу глаз, уменьшает застойные явления.
- Прогревание обеспечивает расслабляющий эффект, повышает тонус кожи.
- Специально разработанные мелодии способствуют максимальной релаксации.

Комбинация этих методик способствует нормализации зрения, профилактике возрастных изменений, улучшает состояние кожи, подтягивая ее и разглаживая морщинки. Именно поэтому массажер для глаз ВЕМ III Pro столь популярен у тех, кто заботится не только о своей внешности, но и о здоровье.

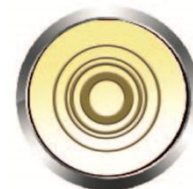




## ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ

При воздействии на активные точки, возможна коррекция следующих симптомов:

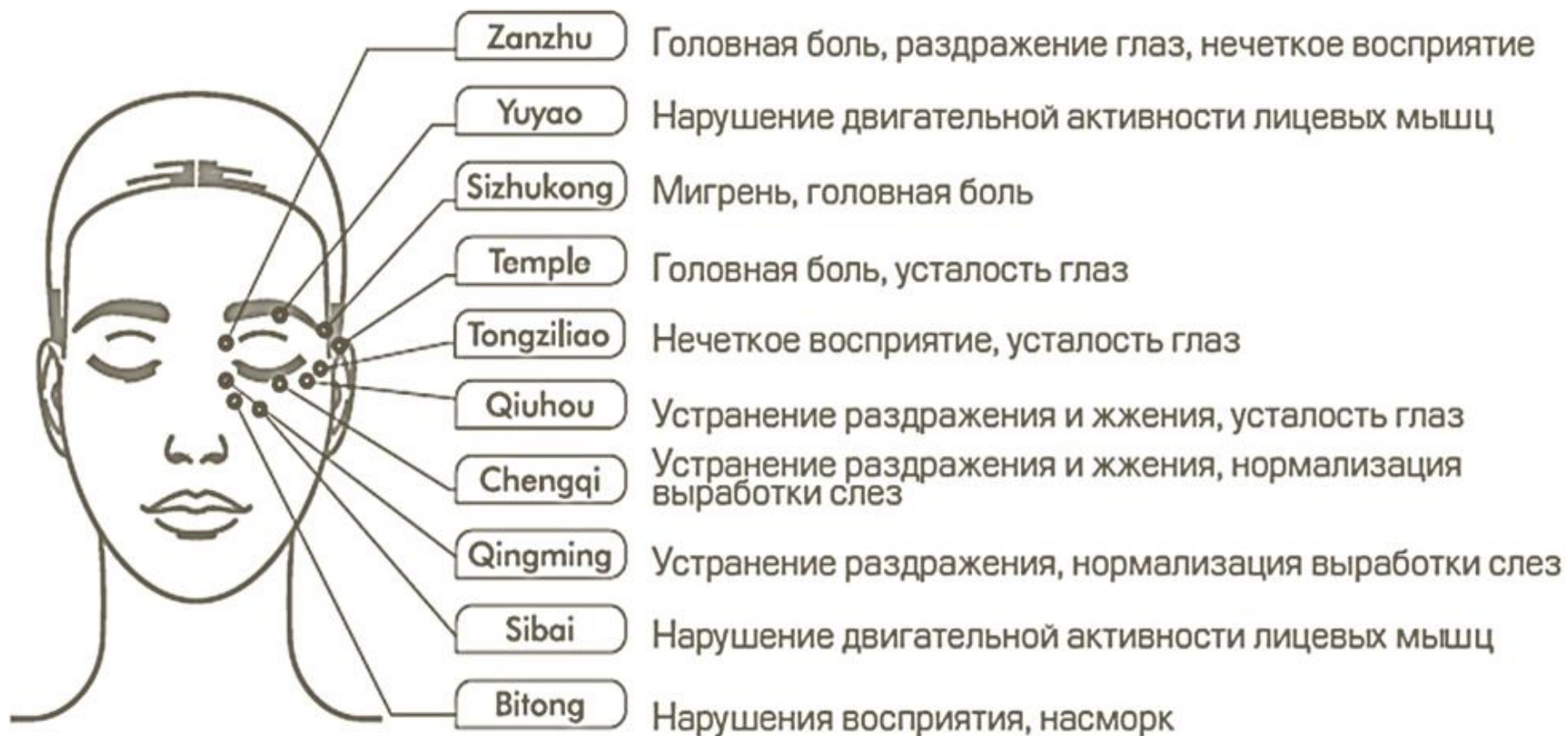

## ПРЕИМУЩЕСТВА Массажера для глаз ВЕМ III Pro.

- ✓ 5 функций для быстрого снятия усталости, спазма мышц. Сочетание вибрации и прессмассажа, ИК-прогрева и магнитотерапии, разнообразной музыки и звуков природы улучшает самочувствие, снимает ощущение усталости глаз.
- ✓ Выносной пульт с ЖК-дисплеем позволяет выбрать желаемую комбинацию воздействий, чтобы получить комфортную процедуру.
- ✓ Музыка и звуки природы разрабатывались психологами для быстрого восстановления ресурсов организма и релаксации.
- ✓ Эргономичный дизайн предусматривает специальную маску, которая прилегает к коже и воздействует на точки акупунктуры.
- ✓ Работа от батареек обеспечивает мобильность: используйте прибор в офисе и дома, берите в путешествия и командировки.

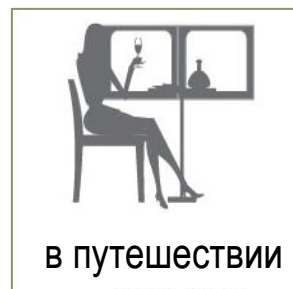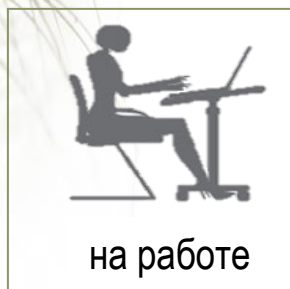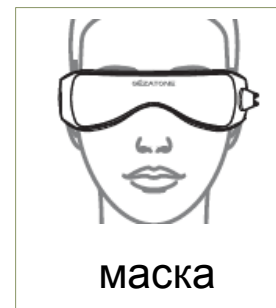

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Острые воспалительные заболевания глаз, катаракта, глаукома, др. серьезные заболевания глаз.
- Острые воспалительные или инфекционные заболевания.
- Онкологические заболевания.
- Обострение хронических заболеваний.
- Гипотонические состояния.
- Состояние беременности.
- Нарушение целостности кожи, раны, травмы в месте воздействия.
- Тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы.
- При наличии неврологических заболеваний необходима консультация врача.
- После травмы или операции на глазах применение массажера возможно только при наличии разрешения врача.
- Не использовать людям, страдающим от апоплексии, гипертензии и гипотензии.
- Запрещается использование людьми с ограниченными умственными или физическими способностями.
- Не предназначен для использования детьми.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Наименование: BEM-III Pro Массажер для глаз Gezatone
- Артикул: 1301169
- Температура эксплуатации: 5-40 С°
- Относительная влажность: 80%
- Компрессионное давление: 860...1060 гПа
- Сила магнитного поля: 50мТ-250мТ
- Напряжение питания: DC 6В, от батарей 4x1.5В., тип ААА
- Ток потребления: не более 1А.
- Мощность: не более 6W
- Габариты в упаковке: 250x252x95см.
- Вес: 0,5 кг.
- ШК: 3004564029825





# ВЕМ-III Pro

массажер для глаз с тепловой и вибромассажной функциями

GÉZATONE



сеть фирменных магазинов

## СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

Москва: **8 (495) 120-10-80**

регионы РФ: 8-800-500-95-94 (звонок бесплатный)

[www.sozv.ru](http://www.sozv.ru)

Присоединяйтесь:

[www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty](http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty)

[facebook.com/sozvezdiekrasoti](https://facebook.com/sozvezdiekrasoti)

[vk.com/sozvezdiekrasoti](https://vk.com/sozvezdiekrasoti)

