

МАССАЖЕР ДЛЯ ШЕИ
РОЛИКОВЫЙ

AXION
NECK

AMG 396

GÉZATONE

Арт. 1301195



GÉZATONE

МАССАЖЕР ДЛЯ ШЕИ РОЛИКОВЫЙ AMG396

Массаж тела известен человечеству как самое первое и очень действенное средство от усталости и напряжения мышц и как профилактическое средство от различных заболеваний. Чтобы избавиться от боли и напряжений в мышцах шеи и плеч – необходимо делать массаж этой зоны.

Роликовый массажер для шеи Gezatone модель AMG396 – это гаджет нового поколения, позволяющий быстро и эффективно провести массаж любого участка тела:

- снять напряжение в области шеи
- устранить дискомфорт в верхнем плечевом поясе
- расслабить мышцы спины
- улучшить кровообращение
- снять усталость во всем теле и улучшить сон



МАССАЖЕР ДЛЯ ШЕИ РОЛИКОВЫЙ AMG396

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Массажер был разработан специально для поддержания здоровья шейных позвонков. Он снимает напряжение и зажатость в шее, улучшает поступление кислорода к сосудам мозга за счет массажа и разминания каналов, акупунктурных точек и мышц.

Подходит для тех, кто:

- проводит много времени за компьютером
- сохраняет одно и то же положение тела в течение долгого времени
- страдает от нервозности и бессонницы
- страдает от зажатости в шее и плечах, усталости мышц
- испытывает от боли в шее и плечах, онемение и слабость в руках
- чувствует головные боли и головокружения из-за недостатка кислорода в сосудах головного мозга



МАССАЖЕР ДЛЯ ШЕИ РОЛИКОВЫЙ AMG396

ТОЧКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ



МАССАЖЕР ДЛЯ ШЕИ РОЛИКОВЫЙ AMG396


УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



ДВЕ МАССАЖНЫЕ
ГОЛОВКИ

ИНФРАКРАСНОЕ
ИЗЛУЧЕНИЕ


ПАНЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ
НА РУЧКЕ

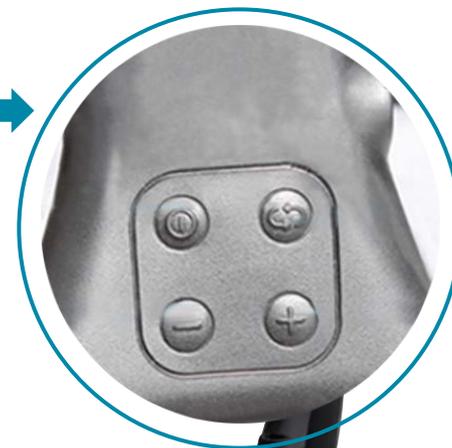

ЭЛАСТИЧНЫЙ ПЕРЕШЕЕК,
ПОДХОДИТ ДЛЯ ШЕИ ЛЮБОГО РАЗМЕРА


МАССАЖЕР ДЛЯ ШЕИ РОЛИКОВЫЙ AMG396

ФУНКЦИИ ПРИБОРА

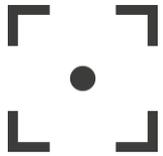

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АКУПУНКТУРНЫЕ ТОЧКИ

Снимает напряжение и зажатость в шее, улучшает поступление кислорода к сосудам головного мозга за счет массажа акупунктурных точек и мышц.

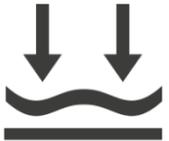


РАЗМИНАЮЩИЙ КУЛАЧКОВЫЙ МАССАЖ

Имитируя действия докторов традиционной китайской медицины, массажер снимает напряжение и зажатость в шее.



УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ

Массажер прост в управлении, так как блок для выбора режима всегда под рукой. Автоматически отключается после 20 минут процедуры.

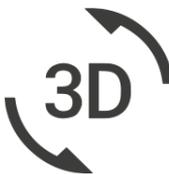

3 РЕЖИМА ИНТЕНСИВНОСТИ

Регулируемый размер. Специально разработанный эластичный перешеек подходит для шеи любого размера, обеспечивая правильное расположение массажера.

МАССАЖЕР ДЛЯ ШЕИ РОЛИКОВЫЙ AMG396

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Благодаря 4-м встроенным попарно массажным роликам массажёр разминает затёкшие шею и плечи за считанные минуты.
- Возможность выбора 3-х режимов работы позволит отрегулировать скорость вращения роликов
- Главное преимущество массажера –универсальность: с его помощью также легко размять руки и ноги, спину и бока.
- Дополнительная опция - инфракрасный прогрев в любой момент поможет снять эмоциональное напряжение и справиться с бессонницей, способствуя укреплению иммунитета.
- Встроенный аккумулятор и позволяет использовать прибор не только дома или в офисе, но и в самолете или поезде.
- Специальный адаптер зарядки от прикуривателя, делает этот прибор незаменимым помощником для автомобилистов.

МАССАЖЕР ДЛЯ ШЕИ РОЛИКОВЫЙ AMG396

РЕЖИМ РАБОТЫ

1 **РАЗЪЕМ ДЛЯ КАБЕЛЯ ЗАРЯДКИ**

2 **КНОПКА ВЫБОРА РЕЖИМА**

2 Нажмите эту кнопку для смены режима от P1 до P4 по очереди

3 **КНОПКА НАСТРОЙКИ ИНТЕНСИВНОСТИ**

У прибора 3 режима интенсивности.

3 Используйте эти кнопки, чтобы увеличить или уменьшить интенсивность массажа.

При включении прибора автоматически включается 2-й режим интенсивности

4 **КНОПКА ПИТАНИЯ**

4 Для начала или окончания процедуры



МАССАЖЕР ДЛЯ ШЕИ РОЛИКОВЫЙ AMG396

ЗОНЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ



МАССАЖЕР ДЛЯ ШЕИ РОЛИКОВЫЙ AMG396

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не используйте прибор, находясь за рулем.
- Не используйте прибор в жарком и влажном помещении.
- Перед использованием прибора длинные волосы заколите наверх.
- Поместите прибор на шею прежде, чем включить его.
- Не используйте прибор при раздражениях на шее, кровотечениях или после операции на шее.
- Не рекомендуется использование прибора людям с гипертонией и психическими расстройствами.
- При возникновении неожиданных болей и при других вопросах проконсультируйтесь со специалистом.
- Только для домашнего использования, запрещается использование в коммерческих целях.
- Для очистки прибора используйте влажную ткань. Не промывать под водой.

МАССАЖЕР ДЛЯ ШЕИ РОЛИКОВЫЙ AMG396

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Зарядное устройство: AC 220-240 В, 50-60 Гц / DC 5 В, 2500 мА

Аккумулятор: Li-Po 3.7 В, 3000 мА*ч

Потребляемая мощность: не более 13 Вт

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Вес в упаковке | 1.5 кг. |
| Габариты в упаковке | 236x180x148 мм. |
| Массажер для шеи AMG396 | 1 шт. |
| Зарядное устройство | 1 шт. |
| Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |

GÉZATONE



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

МОСКВА: (495) 120 10 80

РЕГИОНЫ РФ: 8 800 500 95 94 (звонок бесплатный)

www.sozv.ru



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>