

ПЕРКУССИОННЫЙ МАССАЖЕР AMG 145





РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ПЕРКУССИОННЫЙ МАССАЖЕР AMG145 GEZATONE, СОЗДАННЫЙ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ПРОРАБОТКИ ТКАНЕЙ И МЫШЕЧНЫХ СТРУКТУР, ОКАЗЫВАЕТ РАССЛАБЛЯЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ, ВОССТАНАВЛИВАЕТ ЦИРКУЛЯЦИЮ КРОВИ И ЛИМФЫ. ВСЕГО ЗА 15 МИНУТ С ПОМОЩЬЮ AMG145 МОЖНО ВОССТАНОВИТЬ КРОВООБРАЩЕНИЕ, УСТРАНИТЬ ЗАСТОЙ И СНЯТЬ СПАЗМЫ ЛЮБОЙ ГРУППЫ МЫШЦ, ИЗБАВИТЬСЯ ОТ БОЛИ, ДИСКОМФОРТА И СКОВАННОСТИ.



ПРИ СКОВАННОСТИ ДВИЖЕНИЙ И ЗАЖАТОСТИ ПРИ НАРУШЕНИИ ОСАНКИ, СИДЯЧЕЙ РАБОТЕ



ПРИ ОГРАНИЧЕНИ ДВИЖЕНИЯ, НИЗКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРЕНИРОВОК.



ПРИ ОНЕМЕНИИ МЫШЦ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ НЕПОДВИЖНОСТИ



ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, МЫШЕЧНОЙ АТРОФИИ



ПРИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИИ, БОЛЕЗНЕННОСТИ МЫШЦ ВО ВРЕМЯ СПОРТИВНЫХ НАГРУЗОК



ПРИ СТРЕССЕ, ОБЩЕЙ УСТАЛОСТИ, СПАСТИЧЕСКИХ БОЛЯХ В ШЕЕ И ПЛЕЧАХ





ФУНКЦИИ

ДЕЙСТВИЕ ПРИБОРА ОСНОВАНО НА

ПЕРКУССИОННОМ МАССАЖЕ, НАСАДКА

ПРИБОРА, СОВЕРШАЯ СЕРИЮ ЧАСТЫХ, ГЛУБОКО


ПРОНИКАЮЩИХ УДАРОВ, РАССЛАБЛЯЕТ

МЫШЦЫ И ЛИКВИДИРУЕТ УЧАСТКИ ТОЧЕЧНЫХ

БОЛЕЗНЕННЫХ УПЛОТНЕНИЙ.

АМG145 ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОГО МИОФАСЦИАЛЬНОГО
МАССАЖА И ВОССТАНАВЛИВАЕТ ЕСТЕСТВЕННУЮ
ПОДВИЖНОСТЬ,
УСТРАНЯЯ СЦЕПКУ МЫШЦЫ
И ФАСЦИИ.
В РЕЗУЛЬТАТЕ УЛУЧШАЕТСЯ
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ МЫШЦ И

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН.

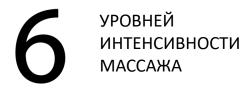



Артикул 1301305



ПЕРКУССИОННЫЙ МАССАЖ



МИОФАСЦИАЛЬНЫЙ МАССАЖ



РЕЛАКСИРУЮЩИЙ МАССАЖ



ТОНИЗИРУЮЩИЙ МАССАЖ



ДЛЯ КОГО РЕКОМЕНДУЕТСЯ

МАССАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ, БЛАГОДАРЯ БОЛЬШОМУ КОЛИЧЕСТВУ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ, НЕОБХОДИМ КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ, ЧЬИ МЫШЦЫ ПОДВЕРЖЕНЫ ДИНАМИЧЕСКИМ, СТАТИЧЕСКИМ И СТРЕССОВЫМ НАГРУЗКАМ. МАССАЖЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НЕ ЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА, ПРОФЕССИИ И ОБРАЗА ЖИЗНИ.



ДЛЯ ОФИСНЫХ РАБОТНИКОВ А ТАКЖЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРОСТО УСТАЕТ НА РАБОТЕ

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ ПРИХОДИТСЯ ЧАСТО НАГИБАТЬСЯ И ПОДНИМАТЬ РЕБЕНКА

ПРИ МАЛОПОДВИЖНОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ



ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРОФЕССИЙ С ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ

ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ ЛЮБИТЕЛЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛОВ ЛЮБЫХ ВИДОВ СПОРТА





ДЛЯ ТЕХ, КТО УВЛЕКАЕТСЯ ФИТНЕССОМ, ЙОГОЙ

ДЛЯ МАССАЖИСТОВ И ТРЕНЕРОВ

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОСЛЕ ТРАВМ ОПОРНО -ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА





ПЕРКУССИОННЫЙ МАССАЖ



ПЕРКУССИОННЫЙ МАССАЖ ОСНОВАН НА СЕРИИ БЫСТРЫХ УДАРОВ - ПОСТУКИВАНИЙ, ГЛУБОКО ПРОНИКАЮЩИХ В МЯГКИЕ ТКАНИ. СПОСОБСТВУЕТ СНИЖЕНИЮ БОЛИ, РАССЛАБЛЕНИЮ МЫШЦ И БЫСТРОМУ ВОССТАНОВЛЕНИЮ. МАССАЖ УЛУЧШАЕТ КРОВОТОК, ПОМОГАЕТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТОКСИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ ОБМЕНА, УВЕЛИЧИВАЕТ ДИАПАЗОН ДВИЖЕНИЯ МЫШЦ.

ИНТЕНСИВНАЯ УДАРНАЯ ВИБРАЦИЯ АМG145, ДЕЙСТВУЕТ АНАЛОГИЧНО МАНУАЛЬНОМУ ПЕРКУССИОННОМУ МАССАЖУ, НО В ОТЛИЧИЕ ОТ РУЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, МАССАЖ С АППАРАТОМ БОЛЕЕ РАВНОМЕРЕН ПО ГЛУБИНЕ И СИЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ, А ТАКЖЕ ЗАНИМАЕТ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ.

Артикул 1301305 ЭФФЕКТЫ



УСТРАНЕНИЕ СПАЗМОВ МЫШЦ



РЕЛАКСИРУЮЩЕЕ И АНТИСТРЕССОВОЕ ДЕЙСТВИЕ



СТИМУЛЯЦИЯ КРОВО-ОБРАЩЕНИЯ



АКТИВИЗАЦИЯ ЛИМФОДРЕНАЖА



УСТРАНЕНИЕ УЧАСТКОВ БОЛЕЗНЕННОГО УПЛОТНЕНИЯ В МЫШЦАХ



ПОВЫШЕНИЕ ОКСИГЕНАЦИИ



ПОВЫШЕНИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ МЫШЦ



УСТРАНЕНИЕ БОЛЕЗНЕННОСТИ



ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

AMG145 ОСНАЩЕН УНИВЕРСАЛЬНОЙ МАССАЖНОЙ НАСАДКОЙ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО МЯГКОГО СИЛИКОНА. ПРИКОСНОВЕНИЕ НАСАДКИ КОМФОРТНО И НЕ РАЗДРАЖАЕТ КОЖУ.

КОНФИГУРАЦИЯ НАСАДКИ ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИБОР НА ЛЮБОЙ ЧАСТИ ТЕЛА, ПРОВОДИТЬ КОМФОРТНЫЙ ПЕРКУССИОННЫЙ МАССАЖ В ОБЛАСТИ СПИНЫ, КОНЕЧНОСТЕЙ, ШЕИ, ЯГОДИЦ, ПЛЕЧ.

ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАЗНЫЕ МЫШЕЧНЫЕ ГРУППЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 6 УРОВНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ МАССАЖА, ВЫБОР ЗАВИСИТ ОТ ВИДА МЫШЦЫ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ.



Артикул 1301305



УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ КНОПКОЙ



МАССАЖНАЯ НАСАДКА ИЗ МЯГКОГО СИЛИКОНА



6 УРОВНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ



РАБОТАЕТ ОТ СЕТИ




СМАРТ-ТАЙМЕР 15 МИНУТ



ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ AMG145 — СПОСОБ СЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ, ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ ПРИБОР ВЫПОЛНИТ ПОЛУЧАСОВУЮ РАБОТУ МАССАЖИСТА БЕЗ ПОТЕРИ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПРИ ЭТОМ НЕ НУЖНО ЗАПИСЫВАТЬСЯ НА ПРИЕМ.

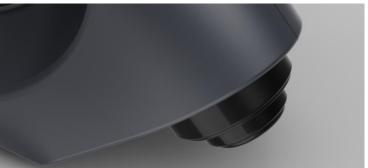

СИЛИКОНОВАЯ НАСАДКА И ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН

У ПРИБОРА УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАСАДКА, КОТОРАЯ ПОДХОДИТ ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛЮБЫЕ МЫШЦЫ. МЯГКИЙ СИЛИКОН ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМФОРТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ. ОКРУГЛАЯ ФОРМА ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАССАЖЕР ПОД ЛЮБЫМ УГЛОМ.

НЕСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ РУКОЯТИ

АМG145 ИМЕЕТ НЕБОЛЬШИЕ ГАБАРИТЫ, КОМПАКТЕН. ЕГО УДОБНО ДЕРЖАТЬ В РУКЕ, СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ РУКОЯТИ НЕ ДАЕТ ПРИБОРУ СКОЛЬЗИТЬ ВО ВРЕМЯ СЕАНСА.



УПРАВЛЕНИЕ 1 КНОПКОЙ

ВКЛЮЧЕНИЕ, ВЫКЛЮЧЕНИЕ И СМЕНА СКОРОСТЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ КНОПКОЙ, ПОЛЬЗОВАТЬСЯ AMG145 МОГУТ ДАЖЕ ТЕ, КТО «НЕ ДРУЖИТ» С ТЕХНИКОЙ. ЧЕРЕЗ 15 МИНУТ УМНЫЙ ТАЙМЕР САМ ОТКЛЮЧИТ ПРИБОР.



6 УРОВНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ И ТИХАЯ РАБОТА ОТ СЕТИ

ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВАТЬ ИНТЕНСИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ПОДОБРАТЬ МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНУЮ СИЛУ МАССАЖА. МОЩНЫЙ МОТОР ИМЕЕТ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА, МАССАЖЕР НЕ МЕШАЕТ ОКРУЖАЮЩИМ





ВНЕШНИЙ ВИД МАССАЖЕРА



Артикул 1301305





ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ



КОМФОРТНО ДЕРЖАТЬ В РУКЕ



УДОБНО БРАТЬ С СОБОЙ





КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

В УСЛОВИЯХ ПОСТОЯННОГО СТРЕССА И ПОВЫШЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК МАССАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ AMG 145 – MUST HAVE ДЛЯ ВСЕХ, КТО ВЕДЕТ АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, МНОГО ТРУДИТСЯ, ЗАНИМАЕТСЯ СПОРТОМ. С НИМ МОЖНО ПРОВОДИТЬ НЕСКОЛЬКО ВИДОВ МАССАЖА.



ПЕРЕД МАССАЖЕМ ПОДКЛЮЧИТЕ ПРИБОР К СЕТИ ПИТАНИЯ. ВКЛЮЧИТЕ МАССАЖЕР

УСТАНОВИТЕ САМЫЙ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ.

АККУРАТНО ПРИСЛОНИТЕ НАСАДКУ К ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ. НЕ ПРИКЛАДЫВАЙТЕ СИЛУ И НЕ ДАВИТЕ.





РЕЛАКСИРУЮЩИЙ МАССАЖ

СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ

ТОНИЗИРУЮЩИЙ МАССАЖ

УСТРАНЕНИЕ БОЛИ И СПАЗМА

ПЕРЕМЕЩАЙТЕ МАССАЖЕР СКОЛЬЗЯЩИМ ДВИЖЕНИЕМ, МЕДЛЕННО И ПЛАВНО. ПОСТЕПЕННО ПОВЫШАЙТЕ УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ.

В ЗОНЕ МЫШЕЧНОГО УПЛОТНЕНИЯ (НА ТРИГГЕРНОЙ ТОЧКЕ), ЗАДЕРЖИТЕ МАССАЖЕР В ТЕЧЕНИЕ 15 СЕКУНД.

ЧЕРЕЗ 15 МИНУТ МАССАЖЕР АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫКЛЮЧИТСЯ.



GÉZATONE

РЕЗУЛЬТАТЫ







АМСІ45 УЛУЧШАЕТ ЦИРКУЛЯЦИЮ КРОВИ И ЛИМФЫ, МЫШЦЫ ПОЛУЧАЮТ КИСЛОРОД И ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ИЗБАВЛЯЮТСЯ ОТ ТОКСИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ ОБМЕНА, УСКОРЯЕТСЯ ПРОЦЕСС ВЫВЕДЕНИЯ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ. МАССАЖЕР ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА ПРОБЛЕМНЫЕ УЧАСТКИ И «РАЗБИВАЕТ» ТРИГГЕРНЫЕ ТОЧКИ. ВОЗДЕЙСТВИЕ БЫСТРО ВОССТАНАВЛИВАЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ МЫШЦ ПОСЛЕ НАПРЯЖЕННЫХ СПОРТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ И ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ПОЯВЛЕНИЕ ОТСРОЧЕННЫХ БОЛЕЙ.



УСТРАНЕНИЕ СПАЗМА МЫШЦ



РАЗОГРЕВ» МЫШЦ ПЕРЕД ТРЕНИРОВКАМИ



ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕНИРОВОК



УМЕНЬШЕНИЕ БОЛЕЗНЕННОСТИ В МЫШЦАХ НОГ



УСТРАНЕНИЕ БОЛИ И МЫШЕЧНОЙ УСТАЛОСТИ



УМЕНЬШЕНИЕ БОЛЕЗНЕННОСТИ В МЫШЦАХ СПИНЫ



ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТОНУСА МЫШЦ



УЛУЧШЕНИЕ САМОЧУВСТВИЯ, РЕЛАКС



УЛУЧШЕНИЕ ПОДВИЖНОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ГИБКОСТИ.



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- ТРАВМЫ ПОЗВОНОЧНИКА, СУСТАВОВ И КОСТЕЙ, ПЕРЕЛОМЫ, РАСТЯЖЕНИЯ И РАЗРЫВЫ СВЯЗОК
- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ
- НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ (РАНЫ, ЦАРАПИНЫ, ССАДИНЫ, ОЖОГИ) В ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ,
- НАЛИЧИЕ ДЕРМАТИТОВ, ДЕРМАТОЗОВ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ.
- НАРУШЕНИЕ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ, ПРИЕМ АНТИКОАГУЛЯНТОВ, ЗАБОЛЕВАНИЯ СОСУДОВ (ВАРИКОЗ, ТРОМБОФЛЕБИТ И ДРУГИЕ)

- СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, ГИПЕРТЕНЗИЯ
- ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
- ХРОНИЧЕСКИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- ГРИПП, ОРВИ, ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА
- ЗАПРЕЩЕНО ПРИМЕНЯТЬ МАССАЖЕР НА ПОЗВОНОЧНИКЕ, КОСТНЫХ ВЫСТУПАХ, ГОЛОВЕ, ЛИЦЕ, В ЗОНЕ ПРОЕКЦИИ СЕРДЦА И НА ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ ШЕИ.
- В ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ МАССАЖЕРА НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ.





ТЕХ<u>НИЧЕС</u>КИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПЕРКУССИОННЫЙ МАССАЖЕР AMG145 GEZATONE C НАСАДКОЙ И CETEBЫМ ШНУРОМ – 1

УПАКОВОЧНАЯ КОРОБКА – 1



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАРАМЕТРЫ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ	220В, 50 Гц
МОЩНОСТЬ	28 Вт
УРОВНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ	6
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ	15 минут
ДИАПАЗОН ДОПУСТИМЫХ ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	5°C 40°C
ВЕС ПРИБОРА В УПАКОВКЕ	1500 грамм







GÉZATONE





Москва 8 (495) 120-10-80 регионы РФ: 8(800) 500-95-94 (звонок бесплатный)



http://www.sozv.ru/



http://instagram.com/sozvezdiekrasoti



http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty



https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti



http://vk.com/sozvezdiekrasoti