

# GÉZATONE

## EASY RELAX AMG399SE



УНИВЕРСАЛЬНОЕ  
МАССАЖНОЕ КРЕСЛО



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

## РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

С ЛОМОТОЙ И БОЛЬЮ В МЫШЦАХ СПИНЫ ЗНАКОМЫ ВСЕ, КТО ПОДОЛГУ СИДИТ ИЛИ СТОИТ, ПРОВОДИТ МНОГО ВРЕМЕНИ В ДОРОГЕ, РАБОТАЕТ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ ИЛИ ЗАНИМАЕТСЯ ФИЗИЧЕСКИМ ТРУДОМ. С EASY RELAX AMG 399 SE МОЖНО ПРОВОДИТЬ СЕАНСЫ РАССЛАБЛЯЮЩЕГО И ТОНИЗИРУЮЩЕГО МАССАЖА ДОМА, В АВТОМОБИЛЕ И НА РАБОТЕ, ПОГРУЖАЯСЬ В МИР НЕГИ И КОМФОРТА. В МАССАЖНОЙ НАКИДКЕ СОЧЕТАЮТСЯ 3D МАССАЖ, ВИБРАЦИЯ И ИНФРАКРАСНОЕ ТЕПЛО ДЛЯ СНЯТИЯ НАПРЯЖЕНИЯ И УСТАЛОСТИ, УСТРАНЕНИЯ СКОВАННОСТИ В СПИНЕ И ГАРМОНИЧНОЙ РЕЛАКСАЦИИ.




СКОВАННОСТЬ, БОЛЬ И УСТАЛОСТЬ  
МЫШЦ СПИНЫ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ  
СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ



БОЛИ В ОБЛАСТИ ПЛЕЧ,  
ПОЯСНИЦЫ  
И СПИНЫ ЗА РУЛЕМ, В ДОРОГЕ



«СИДЯЧАЯ» РАБОТА,  
МАЛОПОДВИЖНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, ПРИ  
НЕДОСТАТКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

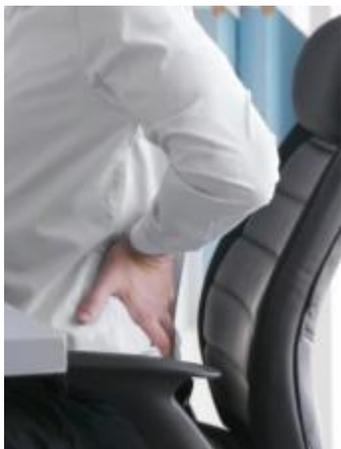

СКОВАННОСТЬ И ДИСКОМФОРТ В  
СПИНЕ И ПОЯСНИЦЕ ПРИ РАБОТЕ  
ЗА КОМПЬЮТЕРОМ, НА УЧЕБЕ



ГИПЕРТОНУС МЫШЦ СПИНЫ ПРИ  
ПОВЫШЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ  
НАГРУЗКАХ



ПРОФИЛАКТИКА ГОЛОВНОЙ БОЛИ,  
ОСТЕОХОНДРОЗА, УСТРАНЕНИЕ  
СТРЕССА И УСТАЛОСТИ

## ФУНКЦИИ

В ОСНОВЕ РАБОТЫ МАССАЖНОЙ НАКИДКИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ МЕТОДЫ РОЛИКОВОГО, КУЛАЧКОВОГО И ВИБРАЦИОННОГО МАССАЖА, КОТОРЫЕ ПРОРАБАТЫВАЮТ УСТАВШИЕ МЫШЦЫ.

**ДЕЙСТВИЕ МАССАЖА ЭФФЕКТИВНО ДОПОЛНЯЕТ ФУНКЦИЯ ИК ПРОГРЕВА**, КОТОРУЮ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО ЖЕЛАНИЮ, ОТКЛЮЧАЯ ИЛИ ВКЛЮЧАЯ КНОПКОЙ НА ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ.

**EASY RELAX AMG 399 SE** ИМЕЕТ ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН, ЧТО ПОМОГАЕТ КОМФОРТНО УСТРОИТЬСЯ И ПОЛУЧИТЬ ПОЛНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ СЕАНСА МАССАЖА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ДЛИТЬСЯ ОТ 10 ДО 30 МИНУТ.



Артикул 1301288

**10** МАССАЖНЫХ  
ПРОГРАММ



РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ



ВИБРОМАССАЖ



ИК ПРОГРЕВ



КУЛАЧКОВЫЙ МАССАЖ

## ДЛЯ КОГО РЕКОМЕНДУЕТСЯ

AMG399 – УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО, КОТОРОЕ ПОДХОДИТ В РАВНОЙ МЕРЕ, КАК МУЖЧИНАМ, ТАК И ЖЕНЩИНАМ РАЗНОГО ВОЗРАСТА. НАКИДКА С УСПЕХОМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РАЗНЫХ ПРОФЕССИЙ. МАССАЖНАЯ НАКИДКА НА КРЕСЛО ДЛЯ СПИНЫ AMG399 ПОМОЖЕТ РАССЛАБИТЬСЯ ВСЕМ, КТО ИСПЫТЫВАЕТ УСТАЛОСТЬ И НАХОДИТСЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ СТРЕССА ОТ НАВАЛИВШИХСЯ ПРОБЛЕМ.



ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОФИСОВ И ТЕХ, КТО МНОГО СИДИТ НА РАБОТЕ



ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ.



ДЛЯ ТЕХ, КТО РАБОТЕТ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ, ПОЛЬЗУЕТСЯ СМАРТФОНОМ ИЛИ ПЛАНШЕТОМ



Артикул 1301288



ДЛЯ ЛЮДЕЙ С НЕДОСТАТКОМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И ПОЖИЛЫХ.



ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО ТРУДА И СПОРТСМЕНОВ.



ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ И ТЕХ, КТО МНОГО ПУТЕШЕСТВУЕТ


## РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ

**СИНХРОННОЕ ДВИЖЕНИЕ МАССАЖНЫХ РОЛИКОВ**, РАСПОЛОЖЕННЫХ С КАЖДОЙ СТОРОНЫ, ИМИТИРУЕТ ПРИЕМЫ МАНУАЛЬНОГО МАССАЖА. ПРОРАБАТЫВАЯ УСТАВШИЕ МЫШЦЫ, РОЛИКИ УСТРАНЯЮТ СПАЗМ, А С НИМ И БОЛЕЗНЕННОСТЬ, СКОВАННОСТЬ И ОНЕМЕНИЕ.


**ВОЗДЕЙСТВИЕ МАССАЖНЫХ РОЛИКОВ** ВЫЗЫВАЕТ РАСШИРЕНИЕ СОСУДОВ УЛУЧШАЕТСЯ КРОВΟΣНАБЖЕНИЕ ТКАНЕЙ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА И КИСЛОРОД, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ.




**МАССАЖ ДЛЯ РАЗНЫХ ЧАСТЕЙ СПИНЫ**  
**ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ РАЗНЫХ ЛЮДЕЙ**

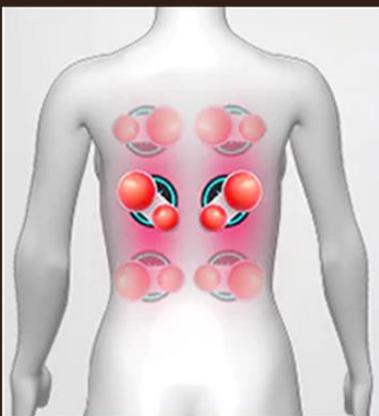

МАССАЖ ВЕРХНЕЙ  
 ЧАСТИ СПИНЫ, ПЛЕЧ  
 И ЛОПАТОЧНОЙ  
 ОБЛАСТИ

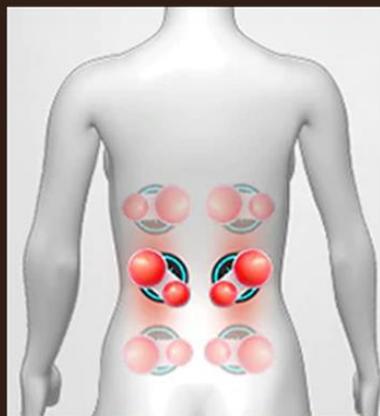

МАССАЖ НИЖНЕЙ  
 ЧАСТИ СПИНЫ И  
 ПОЯСНИЧНОЙ  
 ОБЛАСТИ

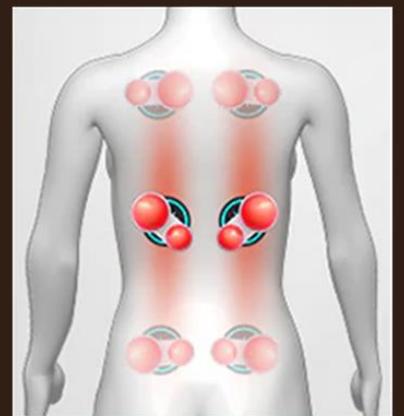

ПОЛНОЦЕННЫЙ  
 МАССАЖ  
 СНИЗУ ВВЕРХ ВДОЛЬ  
 ВСЕЙ СПИНЫ

## ВИБРОМАССАЖ



### ВИБРОМАССАЖ

ОСНОВАН НА ВОЗДЕЙСТВИИ ВИБРАЦИИ НА НЕРВНЫЕ ОКОНЧАНИЯ КОЖИ, ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ОТВЕТНУЮ РЕАКЦИЮ КРОВЕНОСНОЙ, НЕРВНОЙ И ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМ. ОКАЗЫВАЕТ ДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ, СОСУДЫ И МЫШЕЧНУЮ ТКАНЬ. РАСШИРЯЮТСЯ СОСУДЫ, ПОВЫШАЕТСЯ ОКСИГЕНАЦИЯ ТКАНЕЙ, АКТИВИЗИРУЕТСЯ КРОВООБРАЩЕНИЕ И ЛИМФОДРЕНАЖ. В СИДЕНЬЕ **EASY RELAX AMG 399 SE** ВСТРОЕН ВИБРАЦИОННЫЙ МАССАЖ С ТРЕМЯ УРОВНЯМИ ИНТЕНСИВНОСТИ ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОБЛАСТЬ БЕДЕР И ЯГОДИЦ, КОТОРЫЙ МОЖНО АКТИВИРОВАТЬ ВО ВРЕМЯ РОЛИКОВОГО МАССАЖА СПИНЫ.

## ЭФФЕКТЫ ВИБРОМАССАЖА

**3**

УРОВНЯ  
ИНТЕНСИВНОСТИ



СТИМУЛЯЦИЯ  
КРОВО-  
ОБРАЩЕНИЯ



АКТИВИЗАЦИЯ  
ЛИМФОДРЕНАЖА



УСТРАНЕНИЕ  
СПАЗМОВ МЫШЦ



РЕЛАКСИРУЮЩЕЕ  
И АНТИСТРЕССОВОЕ  
ДЕЙСТВИЕ



ПОВЫШЕНИЕ  
ДВИГАТЕЛЬНОЙ  
АКТИВНОСТИ



ПОВЫШЕНИЕ  
ОКСИГЕНАЦИИ



УСТРАНЕНИЕ  
БОЛЕЗНЕННОСТИ

## ИК ПРОГРЕВ

**ПРОГРЕВ МЫШЦ** ВОССТАНАВЛИВАЕТ НАРУШЕННОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В МЫШЦАХ, УСИЛИВАЕТ АНТИСПАСТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ РОЛИКОВОГО И ВИБРАЦИОННОГО МАССАЖА.

**ИК ТЕПЛО** РАССЛАБЛЯЕТ НЕ ТОЛЬКО ОТДЕЛЬНЫЕ МЫШЦЫ, ГЛУБОКИЙ ПРОГРЕВ ОКАЗЫВАЕТ РЕЛАКСИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ВСЕ ТЕЛО, РАССЛАБЛЯЕТ ЭМОЦИОНАЛЬНО И ФИЗИЧЕСКИ.



## ЭФФЕКТЫ ИК ПРОГРЕВА



УСТРАНЕНИЕ  
СПАЗМОВ МЫШЦ



РЕЛАКСИРУЮЩЕЕ  
И АНТИСТРЕССОВОЕ  
ДЕЙСТВИЕ



СТИМУЛЯЦИЯ  
КРОВООБРАЩЕНИЯ



УСТРАНЕНИЕ  
БОЛЕЗНЕННОСТИ



### ГЛУБОКО ПРОНИКАЮЩЕЕ ТЕПЛО

УСИЛИВАЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ И АКТИВИЗИРУЕТ ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ. ОКАЗЫВАЕТ АНТИСПАСТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ, УЛУЧШАЕТ ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ОРГАНИЗМА ТОКСИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ ОБМЕНА, СПОСОБСТВУЕТ СНИЖЕНИЮ БОЛЕЗНЕННОСТИ МЫШЦ.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЪЕДИНЯЯ НЕСКОЛЬКО МЕТОДИК, МАССАЖНАЯ НАКИДКА AMG399 СПОСОБСТВУЕТ ПОЛНОМУ РАССЛАБЛЕНИЮ, ИЗБАВЛЯЕТ ОТ УСТАЛОСТИ МЫШЦ СПИНЫ, ПОМОГАЕТ ВОССТАНОВИТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И УЛУЧШАЕТ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ. РЕГУЛЯРНЫЕ СЕАНСЫ УЛУЧШАЮТ САМОЧУВСТВИЕ И ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЮТ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ, ЯВЛЯЮТСЯ ПРОФИЛАКТИКОЙ БОЛЕЙ, БЕССОННИЦЫ И ОСТЕОХОНДРОЗА.



Артикул 1301288

- **УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:** МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ, КАК ЖЕНЩИНАМИ, ТАК И МУЖЧИНАМИ, КАК МОЛОДЫМИ, ТАК И ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ.
- **ЭРГОНОМИЧНАЯ ФОРМА** ПОМОГАЕТ УДОБНО УСТРОИТЬСЯ В КРЕСЛЕ ВО ВРЕМЯ СЕАНСА МАССАЖА.
- **КОМФОРТНОЕ** ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОМА, В ОФИСЕ И В ПОЕЗДКАХ.
- **ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ**, И ЭТО ВРЕМЯ ВЫБИРАЕТЕ ВЫ, НЕ ПОДСТРАИВАЯСЬ ПОД ГРАФИК РАБОТЫ МАССАЖИСТА. А МАССАЖ ДЛИТСЯ ОТ 10 ДО 30 МИНУТ.
- ПОСЛЕ ПУТЕШЕСТВИЯ И ДОЛГОЙ ДОРОГИ, ВОЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ, МАССАЖНАЯ НАКИДКА ПОМОЖЕТ ЗАБЫТЬ О ТЯГОТАХ ПУТИ И БОЛИ В МЫШЦАХ.
- **ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** НЕ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ.
- **СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН** ВПИШЕТСЯ В ИНТЕРЬЕР И НЕ НАРУШИТ ЕГО ГАРМОНИИ.



ПУЛЬТ  
УПРАВЛЕНИЯ



ДЛЯ ЖЕНЩИН  
И МУЖЧИН



ТРИ ВИДА  
ВОЗДЕЙСТВИЯ



СЕАНС МАССАЖА  
10 – 30 МИНУТ



10 МАССАЖНЫХ  
ПРОГРАММ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

РЕЛАКСИРУЮЩИЙ МАССАЖ ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ БЕССОННИЦЫ И ДЕПРЕССИВНОГО СОСТОЯНИЯ, СОЧЕТАНИЕ МАССАЖА С ИНФРАКРАСНЫМ ТЕПЛОМ ДЕЛАЕТ МАССАЖНОЕ КРЕСЛО ЭФФЕКТИВНЫМ СПОСОБОМ СНЯТИЯ НАПРЯЖЕНИЯ.



### СЪЕМНЫЙ ПОДГОЛОВНИК

ОСНАЩЕНО СЪЕМНЫМ ПОДГОЛОВНИКОМ И НАКИДКОЙ, ЧТО ПОМОГАЕТ КОМФОРТНО УСТРОИТЬСЯ И ПОЛУЧИТЬ ПОЛНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ СЕАНСА МАССАЖА.

### УДОБНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

БЛАГОДАРЯ ФУНКЦИИ УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ, МОЖНО ВЫБРАТЬ КОМФОРТНУЮ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СЕАНСА МАССАЖА. НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА МОЖНО ЛЕГКО СМЕНИТЬ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ.



### ТИХАЯ РАБОТА

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ МАССАЖНАЯ НАКИДКА НЕ ШУМИТ И НЕ СОЗДАЕТ ДИСКОМФОРТА, КАК ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ТАК И ДЛЯ ЛЮДЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ РЯДОМ.

### СИДЕНЬЕ С ВИБРОМАССАЖЕМ

В СИДЕНЬЕ ВСТРОЕНА ФУНКЦИЯ ВИБРАЦИОННОГО МАССАЖА С ТРЕМЯ УРОВНЯМИ ИНТЕНСИВНОСТИ ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОБЛАСТЬ БЕДЕР И ЯГОДИЦ



## ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

СЪЕМНЫЙ ПОДГОЛОВНИК  
И ФАРТУК-НАКИДКА


КАРМАН ДЛЯ ПУЛЬТА  
УПРАВЛЕНИЯ

РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОКЛЮЧЕНИЯ БЛОКА ПИТАНИЯ И  
АВТОМОБИЛЬНОГО АДАПТЕРА

ПУЛЬТ  
УПРАВЛЕНИЯ



### ФУНКЦИИ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

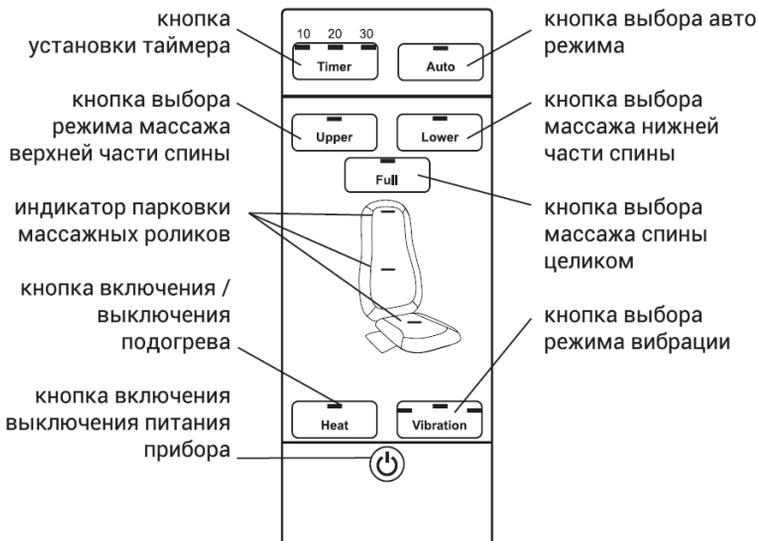

Артикул 1301288



СЕТЕВОЙ  
АДАПТЕР



АВТОМОБИЛЬНЫЙ  
АДАПТЕР

### КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ



НА РАБОТЕ



ДОМА



В  
АВТОМОБИЛЕ

УСТАНОВИТЕ МАССАЖНОЕ КРЕСЛО НА СТУЛ ИЛИ ПОМЕСТИТЕ В КРЕСЛО. УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО МАССАЖЕР НАДЕЖНО ЗАКРЕПЛЕН И ИМЕЕТ ДОСТАТОЧНЫЙ УПОР СЗАДИ. ПОДКЛЮЧИТЕ УСТРОЙСТВО К СЕТИ.

САДИТЕСЬ В МАССАЖНОЕ КРЕСЛО В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ. УДОСТОВЕРЬТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ПОЗВОНОЧНИК РАСПОЛОЖЕН ПО ЦЕНТРУ МАССАЖНОГО КРЕСЛА, ЧТОБЫ МАССАЖНЫЕ ГОЛОВКИ МОГЛИ РАВНОМЕРНО МАССИРОВАТЬ ЛЕВУЮ И ПРАВУЮ СТОРОНЫ СПИНЫ.


НАЖМИТЕ КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ НА ПУЛЬТЕ, МАССАЖЕР ВКЛЮЧИТСЯ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ: ИК ПРОГРЕВ ВКЛЮЧЕН, ВИБРАЦИЯ НА СРЕДНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ. ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ УСТРОЙСТВО ВЫКЛЮЧИТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ.



#### ИСПОЛЬЗУЯ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ, ВЫ МОЖЕТЕ:

- УСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ МАССАЖА 10 – 20 – 30 МИНУТ
- РЕГУЛИРОВАТЬ ИНТЕНСИВНОСТЬ ВИБРАЦИИ
- ВКЛЮЧИТЬ И ВЫКЛЮЧИТЬ ИК ПРОГРЕВ МАССАЖНЫХ РОЛИКОВ
- ВЫБРАТЬ ПРЕДПОЧИТАЕМУЮ ЗОНУ МАССАЖА

### РЕЗУЛЬТАТЫ\*

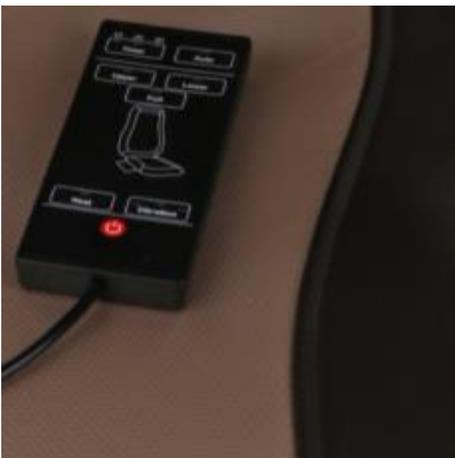

ПОСЛЕ ОДНОГО 15 МИНУТНОГО МАССАЖНОГО СЕАНСА ЧУВСТВУЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ: ОЩУЩЕНИЕ НЕГИ МЕДЛЕННО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПО МЫШЦАМ СПИНЫ И ПОСТЕПЕННО ОХВАТЫВАЕТ ВСЕ ТЕЛО. РЕГУЛЯРНЫЕ СЕАНСЫ МАССАЖА ПОМОГУТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТЯЖЕСТИ И ОНЕМЕНИЯ, УЛУЧШАТ СОН И ОБЩЕЕ САМОЧУВСТВИЕ, ЯВЛЯЮТСЯ ПРОФИЛАКТИКОЙ БОЛЕЙ, БЕССОННИЦЫ И ОСТЕОХОНДРОЗА.



ВОССТАНОВЛЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ



УМЕНЬШЕНИЕ БОЛИ В СПИНЕ И ПОЯСНИЦЕ



УСТРАНЕНИЕ СКОВАННОСТИ В МЫШЦАХ



УЛУЧШЕНИЕ ОСАНКИ



СОКРАЩЕНИЕ БОЛЕЗНЕННЫХ ОЩУЩЕНИЙ В МЫШЦАХ



УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СНА



ПРОФИЛАКТИКА ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ



УЛУЧШЕНИЕ ОБЩЕГО САМОЧУВСТВИЯ



ОБЩИЙ РЕЛАКС, УСТРАНЕНИЕ СТРЕССА

*\* Результаты зависят от исходного состояния здоровья и возраста могут быть достигнуты только при регулярном использовании.*


## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИБОР ПОСЛЕ ПРИЕМА СЕДАТИВНЫХ, ОБЕЗБОЛИВАЮЩИХ И СНОТВОРНЫХ ПРЕПАРАТОВ, А ТАКЖЕ АЛКОГОЛЯ



- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ТРАВМЫ ПОЗВОНОЧНИКА И НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ПОЗВОНКОВ .
- МЕЖПОЗВОНОЧНЫЕ ГРЫЖИ РАЗНЫХ ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА
- ХРОНИЧЕСКИЕ ПАТОЛОГИИ ПОЧЕК И ПЕЧЕНИ
- НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ (РАНЫ, ЦАРАПИНЫ, ССАДИНЫ, ОЖОГИ) В ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ, СОЛНЕЧНЫЕ ОЖОГИ И РАЗДРАЖЕНИЕ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ КОЖИ ФАКТОРАМИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
- НАЛИЧИЕ ДЕРМАТИТОВ, ДЕРМАТОЗОВ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ.
- ОСТЕОМИЕЛИТ, КОСТНАЯ ФОРМА ТУБЕРКУЛЕЗА
- НАРУШЕНИЕ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ, ЗАБОЛЕВАНИЯ СОСУДОВ
- СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, ГИПЕРТЕНЗИЯ
- ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
- ХРОНИЧЕСКИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- ГРИПП, ОРВИ, ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА
- В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ, ПРИ НАЛИЧИИ КАРДИОСТИМУЛЯТОРА, ОРТОПЕДИЧЕСКИХ И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ ВРАЧА.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

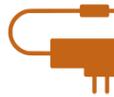

СЕТЕВОЙ  
АДАПТЕР



АВТОМОБИЛЬНЫЙ  
АДАПТЕР



ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ



ПУЛЬТ  
УПРАВЛЕНИЯ

Артикул  
1301288



|  |                     |
|--|---------------------|
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ                     | DC 12V 2.0 A        |
| ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ                  | не более 24 Вт      |
| ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ   | 10 / 20 / 30 минут  |
| ДИАПАЗОН ДОПУСТИМЫХ ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА | 10°C - 30°C         |
| ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА   | < 60%               |
| РАЗМЕРЫ                                | 7100 x 420 x 130 мм |

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажное кресло Gezatone AMG399SE - 1 шт.  
Блок питания - 1 шт.  
Инструкция по эксплуатации - 1 шт.  
Автомобильный адаптер питания - 1 шт.



МАССАЖНОЕ КРЕСЛО УПАКОВАНО В  
КОРОБКУ




сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



**GÉZATONE**

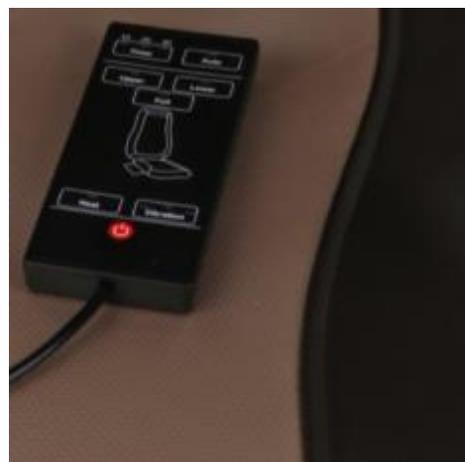

Москва 8 (495) 120-10-80  
регионы РФ: 8(800) 500-95-94  
(звонок бесплатный)



<http://www.sozv.ru/>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>