

# GÉZATONE



ПРИБОР ДЛЯ  
МАССАЖА КОЖИ  
ГОЛОВЫ И УХОДА ЗА  
ВОЛОСАМИ

## LASER HELMET

HS700

НИЗКОИНТЕНСИВНЫЙ ЛАЗЕР



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

## ПРИЧИНЫ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

●  
СТРЕСС, УСТАЛОСТЬ,  
БОЛЕЗНИ,  
ХИМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

●  
НАРУШЕНИЕ  
КРОВООБРАЩЕНИЯ  
(НЕДОСТАТОК КИСЛОРОДА И  
ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ)

●  
НАРУШЕНИЕ ГОРМОНАЛЬНОГО  
ФОНА, ПРИЕМ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ



●  
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

●  
НЕГРАМОТНЫЙ  
УХОД  
ЧАСТОЕ ОКРАШИВАНИЕ,  
ГОРЯЧАЯ УКЛАДКА,  
ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА

●  
НЕСБАЛАНСИРОВАННОЕ  
ПИТАНИЕ, НЕДОСТАТОК  
ВИТАМИНОВ, МИКРОЭЛЕМЕНТОВ



## РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ПРИБОР LASER HELMET HS700 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ПРОБЛЕМ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС, СУХОЙ И ЖИРНОЙ СЕБОРЕИ, ЗАМЕДЛЕНИЯ РОСТА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ HS 700 УМЕНЬШАЕТ ВЫПАДЕНИЕ, СПОСОБСТВУЕТ ИХ РОСТУ И УКРЕПЛЕНИЮ ВОЛОС, ОЧИЩЕНИЮ КОЖИ ГОЛОВЫ, СТИМУЛИРУЕТ АКТИВИЗАЦИЮ «СПЯЩИХ» ВОЛОСЯНЫХ ЛУКОВИЦ.



ВЫПАДЕНИЕ  
ВОЛОС  
У МУЖЧИН И  
ЖЕНЩИН



ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС В  
РЕЗУЛЬТАТЕ  
ХРОНИЧЕСКОГО  
ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ И  
СТРЕССА



ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС В  
РЕЗУЛЬТАТЕ ЧАСТОГО  
ОКРАШИВАНИЯ,  
НЕПРАВИЛЬНОГО  
УХОДА



ПОВЫШЕННОЕ  
САЛООТДЕЛЕНИЕ,  
ПЕРХОТЬ, ЗУД,  
ДИСКОМФОРТ НА  
КОЖЕ ГОЛОВЫ




ОСЛАБЛЕННЫЕ,  
ТУСКЛЫЕ ВОЛОСЫ,  
ВОЗРАСТНЫЕ  
ИЗМЕНЕНИЯ



## ТЕХНОЛОГИЯ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

ДЕЙСТВИЕ ПРИБОРА ОСНОВАНО НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА КОЖУ ГОЛОВЫ И ВОЛОСЯНЫЕ ЛУКОВИЦЫ.

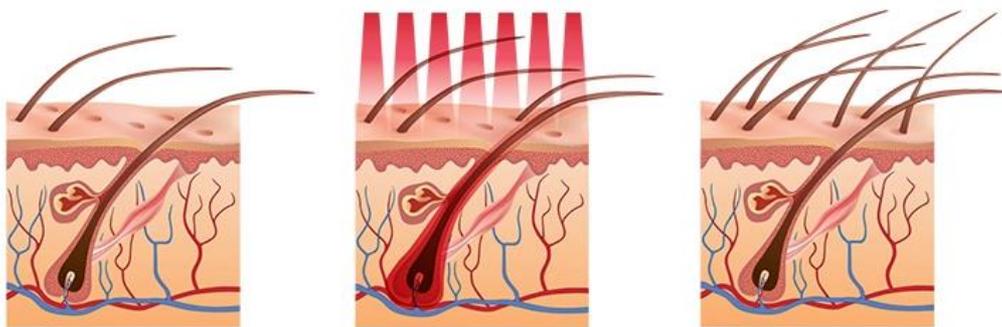

ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ С ДЛИНОЙ ВОЛНЫ 650 нм, ОБЛАДАЕТ СПОСОБНОСТЬЮ ПРОНИКАТЬ В ВОЛОСЯНОЙ Фолликул НА ГЛУБИНУ 2 мм.

ПОСЛЕ ПОГЛОЩЕНИЯ ЭНЕРГИИ АКТИВИЗИРУЕТСЯ КРОВООБРАЩЕНИЕ, УСКОРЯЮТСЯ ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ И СИНТЕЗ АТФ, ВОЛОСЯНОЙ Фолликул СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ ЖИЗНЕСПОСОБНЫМ, ЧТО СПОСОБСТВУЕТ УСКОРЕНИЮ РОСТА ВОЛОС И УЛУЧШЕНИЮ ИХ КАЧЕСТВА.

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ОБЛАДАЕТ БАКТЕРИЦИДНЫМ ДЕЙСТВИЕМ И СПОСОБСТВУЕТ УМЕНЬШЕНИЮ ЗУДА, СОКРАЩАЕТ ПОВЫШЕННОЕ САЛОУТДЕЛЕНИЕ И ПЕРХОТЬ.

### ЭФФЕКТЫ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ



АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ  
ЭФФЕКТ



СТИМУЛЯЦИЯ  
КРОВООБРАЩЕНИЯ  
СКАЛЬПА



НОРМАЛИЗАЦИЯ  
САЛОУТДЕЛЕНИЯ



УСТРАНЕНИЕ  
ПЕРХОТИ



АКТИВИЗАЦИЯ  
СПЯЩИХ ЛУКОВИЦ



НАСЫЩЕНИЕ КОЖИ  
ГОЛОВЫ КИСЛОРОДОМ





## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



Арт. 1301270

- **УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:** ПРИБОР ПОДХОДИТ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
- **УДОБНАЯ ФОРМА:** ЭРГОНОМИЧНАЯ ФОРМА ПРИБОРА В ВИДЕ ШЛЕМА ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛНОСТЬЮ ОХВАТИТЬ ВСЮ ОБЛАСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ
- **ПРОЦЕДУРЫ АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНЫ:** ПРИБОР НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ И ГЕНЕРИРОВАТЬ ЛАЗЕРНУЮ ЭНЕРГИЮ ТОЛЬКО ПОСЛЕ КОНТАКТА С ГОЛОВОЙ, ПОЭТОМУ ПОЛНОСТЬЮ ИСКЛЮЧЕН РИСК ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРНОГО ЛУЧА НА ГЛАЗА.
- **КОМФОРТ ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ:** БЛАГОДАРИЯ УДОБНОЙ ФОРМЕ, ШЛЕМ ПОДХОДИТ ДЛЯ ГОЛОВЫ ЛЮБОГО РАЗМЕРА И НЕ СМЕЩАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ СЕАНСА. ВО ВРЕМЯ СЕАНСА ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ ТОЛЬКО ЛЕГКОЕ ТЕПЛО И НИКАКИХ НЕГАТИВНЫХ ОЩУЩЕНИЙ.



ДЛЯ МУЖЧИН И  
ЖЕНЩИН



АБСОЛЮТНАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ



УДОБНАЯ  
ФОРМА



МАКСИМАЛЬНЫЙ  
КОМФОРТ



## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



РАБОТАЕТ ОТ  
АККУМУЛЯТОРА




ШНУР USB  
В КОМПЛЕКТЕ



Арт. 1301270

*Использование прибора оказывает профилактическое действие, уменьшает выпадение волос, стимулирует спящие луковицы, способствует росту более крепких, сильных и здоровых волос.*

- **ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ:** ПРОЦЕДУРА ЗАНИМАЕТ 25 МИНУТ В ДЕНЬ. ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШЛЕМ ВО ВРЕМЯ СВОИХ ПРИВЫЧНЫХ ДОМАШНИХ ЗАНЯТИЙ, НА РАБОТЕ И НА ОТДЫХЕ.
- **УПРАВЛЕНИЕ 1 КНОПКОЙ** – ПРОСТО И УДОБНО
- ПРИБОР РАБОТАЕТ ОТ АККУМУЛЯТОРА, ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА 3,5 ЧАСА. ШНУР USB В КОМПЛЕКТЕ.
- КОЛИЧЕСТВО **ЛАЗЕРНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ:** 180, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИМАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОБЛАСТЬ СКАЛЬПА (ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ ПРИБОРАМИ, ОСНАЩЕННЫМИ 80 ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ)
- ПРИБОР ОСНАЩЕН **УМНЫМ ТАЙМЕРОМ**, КОТОРЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫКЛЮЧИТ УСТРОЙСТВО ЧЕРЕЗ 25 МИНУТ. МОЖНО НЕ СЛЕДИТЬ ЗА ВРЕМЕНЕМ ПРОЦЕДУРЫ И СПОКОЙНО ЗАНИМАТЬСЯ СВОИМИ ДЕЛАМИ: ЧИТАТЬ, СМОТРЕТЬ ТЕЛЕВИЗОР, ОТДЫХАТЬ.

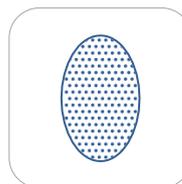

180  
ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ



УПРАВЛЕНИЕ  
1 КНОПКОЙ



СМАРТ  
ТАЙМЕР



ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ  
АККУМУЛЯТОРА  
3,5 ЧАСА





### ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА



ВИД СЗАДИ




ГНЕЗДО ДЛЯ ЗАРЯДКИ

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ /  
ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРА




Арт. 1301270

ВИД СВЕРХУ

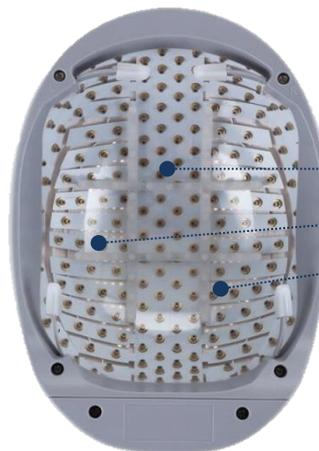

ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ

180 ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ  
ПОД ЗАЩИТНЫМ  
ВНУТРЕННИМ ПОКРЫТИЕМ

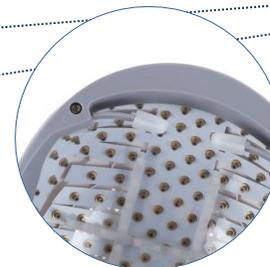



## РЕЗУЛЬТАТЫ\*

- СОКРАЩЕНИЕ ЗУДА И ПЕРХОТИ
- ЗАМЕДЛЕНИЕ СКОРОСТИ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС И УМЕНЬШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВЫПАДАЮЩИХ ВОЛОС
- УМЕНЬШЕНИЕ ПРОДУКЦИИ КОЖНОГО САЛА В ОБЛАСТИ СКАЛЬПА
- ВОЛОСЫ БОЛЕЕ ЗДОРОВЫЕ
- ПОВЫШЕНИЕ ПЛОТНОСТИ, ВОЛОСЫ СТАНОВЯТСЯ БОЛЕЕ КРЕПКИМИ И СИЛЬНЫМИ

*\* Только курсовое использование дает возможность получения стойких видимых результатов*

### КУРСОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

*Курс использования прибора: от 3 до 6 месяцев. В профилактических целях рекомендуется использование не менее 2 месяцев.*

*Процедуры рекомендуется проводить ежедневно. Эффективность зависит от исходного состояния волос и волосяных луковиц. Чем раньше будет начато лечение, тем лучше будет видимый результат.*



## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

---



- ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ
- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ДЫХАТЕЛЬНАЯ, СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, ГИПЕРТЕНЗИЯ
- ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР ИЛИ ДРУГИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ИМПЛАНТАТЫ
- ЗАБОЛЕВАНИЯ КРОВИ И СОСУДОВ, НАРУШЕНИЕ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ
- НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ (РАНЫ, ЦАРАПИНЫ, ССАДИНЫ, ОЖОГИ) КОЖИ ГОЛОВЫ
- НАЛИЧИЕ ДЕРМАТИТОВ, ДЕРМАТОЗОВ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ. АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ НА КОЖЕ В ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ.
- ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ГНОЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ
- НАРУШЕНИЯ КОЖНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
- ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, ЭПИЛЕПСИЯ
- ОСТРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ГРИПП, ОРВИ, ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ



СУМОЧКА  
И ШНУР USB  
В КОМПЛЕКТЕ



Арт. 1301270

НАПРЯЖЕНИЕ: DC 5V 1000mA  
ДЛИНА ВОЛНЫ: 650 нм ± 10нм  
МОЩНОСТЬ ЛАЗЕРА: 4 – 5 mW  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ Таймер: 25 минут  
КОЛИЧЕСТВО ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ: 180  
МАТЕРИАЛ: АБС-пластик  
Время зарядки аккумулятора: примерно 3,5 часа  
РАЗМЕРЫ: 266 x 194 x 130 мм

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ПРИБОР ДЛЯ МАССАЖА КОЖИ ГОЛОВЫ И УХОДА ЗА  
ВОЛОСАМИ LASER HELMET HS700 – 1  
СУМОЧКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ – 1  
ПРОВОД ДЛЯ ЗАРЯДКИ – 1  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – 1





сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



**GÉZATONE**



Москва 8 (495) 120-10-80  
регионы РФ: 8(800) 500-95-94  
(звонок бесплатный)



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.sozv.ru/>