

GÉZATONE

miniLIFT

РОЛИКОВЫЙ МАССАЖЕР

m 809

ИОНОФОРЕЗ

РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ

ВИБРОМАССАЖ



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ЛЕГКИЙ, МИНИАТЮРНЫЙ И КОМПАКТНЫЙ МАССАЖЕР GEZATONE m 809 СОЧЕТАЕТ ТРИ МЕТОДИКИ ДЛЯ ЛИФТИНГОВОГО МАССАЖА КОЖИ ЛИЦА И ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ. КОМБИНАЦИЯ ГАЛЬВАНИКИ, РОЛИКОВОГО МАССАЖА И ВИБРАЦИИ ПОМОГАЕТ ПОВЕРНУТЬ ВРЕМЯ ВСПЯТЬ: ПОДТЯНУТЬ КОЖУ, РАЗГЛАДИТЬ МОРЩИНЫ, ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ОТЕЧНОСТИ И СЛЕДОВ УСТАЛОСТИ. С ПОМОЩЬЮ МАССАЖЕРА МОЖНО ПРОРАБОТАТЬ ВСЕ «ПРОБЛЕМНЫЕ» ЗОНЫ И ЗАМЕДЛИТЬ УВЯДАНИЕ.



СНИЖЕНИЕ ТОНУСА, УПРУГОСТИ И ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ, МОРЩИНЫ



ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ



НЕДОСТАТОК ВЛАГИ И ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ



ОТЕКИ И ПРИПУХЛОСТЬ ПОД ГЛАЗАМИ, КРУГИ



ТУСКЛЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА, УСТАВШАЯ КОЖА



МОРЩИНЫ ВОКРУГ ГЛАЗ

ФУНКЦИИ



МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА m809 GEZATONE

ОБЪЕДИНЯЕТ СТИМУЛИРУЮЩИЙ РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ С ИОНОФОРЕЗОМ И ВИБРОМАССАЖЕМ.

УДОБНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЗВОЛЯЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МИНИАТЮРНЫЙ АППАРАТ «MINILIFT» ДЛЯ ОМОЛАЖИВАЮЩЕГО МАССАЖА КОЖИ ЛИЦА И ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ.

СУПЕР-КОМПАКТНЫЙ И НЕВЕСОМЫЙ РОЛЛЕР МАССАЖЕР ПРОРАБАТЫВАЕТ ДАЖЕ МЕЛКИЕ МОРЩИНКИ, ЕГО МАССАЖНЫЙ РОЛИК ВРАЩАЕТСЯ НА 360 ГРАДУСОВ И ПЛОТНО КОНТАКТИРУЕТ С КОЖЕЙ.

Артикул 1301130

3


МЕТОДИКИ



ВИБРАЦИЯ /
ВИБРОМАССАЖ



ИОНОФОРЕЗ

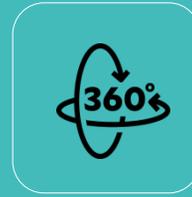

РОЛИКОВЫЙ
МАССАЖ

ОСНОВНЫЕ МЕТОДИКИ



Артикул 1301130



ИОНОФОРЕЗ

- ГЛУБОКОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ДЕПО В КОЖЕ. УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ.
- СОКРАЩЕНИЕ МОРЩИН
- ПРОТИВООТЕЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ, ДЕТОКСИКАЦИЯ
- ТОНИЗАЦИЯ, ПОВЫШЕНИЕ УПРУГОСТИ И ЭЛАСТИЧНОСТИ
- КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН И ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА



ВИБРОМАССАЖ

- УСТРАНЕНИЕ СПАЗМА МИМИЧЕСКОЙ МУСКУЛАТУРЫ
- СОКРАЩЕНИЕ МОРЩИН И ПОДТЯЖКА КОЖИ
- ПРОТИВООТЕЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
- АКТИВИЗАЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЛИМФОДРЕНАЖА
- ВЫВЕДЕНИЕ ТОКСИНОВ
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ КОЖИ.



РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ

- КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН И ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
- СТИМУЛЯЦИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ И ЛИМФОТОКА, СОКРАЩЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ И ЗАСТОЯ
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ КОЖИ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- СНИЖЕНИЕ СПАЗМА МИМИЧЕСКИХ МЫШЦ, ПРОФИЛАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ МОРЩИН

ВИБРАЦИОННЫЙ И РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ



6000 ВИБРАЦИЯ
КОЛЕБАНИЙ В МИНУТУ

ВИБРОМАССАЖ И РОЛИКОВАЯ СТИМУЛЯЦИЯ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОЕ РУСЛО, ЛИМФАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ И КОЖУ. УХОДИТ СПАЗМ МИМИЧЕСКОЙ МУСКУЛАТУРЫ, ЧТО ПОМОГАЕТ УМЕНЬШИТЬ МОРЩИНЫ И ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБРАЗОВАНИЕ НОВЫХ. КЛЕТКИ ПОЛУЧАЮТ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ И КИСЛОРОДА.

МАССАЖ СТИМУЛИРУЕТ ВЫВЕДЕНИЕ ЖИДКОСТИ И ТОКСИНОВ, СОКРАЩАЮТСЯ ОТЕКИ В ОБЛАСТИ ГЛАЗ, ПОМОГАЕТ ЗАМЕДЛИТЬ УВЯДАНИЕ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ, УМЕНЬШАЕТ МОРЩИНЫ И БОРЕТСЯ С ПРОЯВЛЕНИЯМИ СТРЕССА. ЛИЦО СТАНОВИТСЯ СВЕЖИМ.



ПОВЫШЕНИЕ
ТОНУСА
И УПРУГОСТИ



СОКРАЩЕНИЕ
МЕЛКИХ МОРЩИН




УСТРАНЕНИЕ
СПАЗМОВ
МИМИЧЕСКИХ МЫШЦ



СТИМУЛЯЦИЯ
КРОВО-БРАЩЕНИЯ



АКТИВИЗАЦИЯ
ЛИМФОДРЕНАЖА

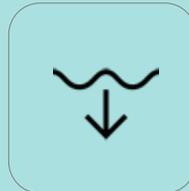

УСИЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ
КОСМЕТИКИ



ДЕТОКСИКАЦИЯ

ИОНОФОРЕЗ




ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ТОКИ УСИЛИВАЮТ ПРОНИКНОВЕНИЕ В КОЖУ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАРЯЖЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ДАННОЕ ЯВЛЕНИЕ НОСИТ НАЗВАНИЕ ИОНОФОРЕЗА.

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ТОК ПЕРЕВОДИТ ДЕЙСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ КОСМЕТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА В АКТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ, ПОВЫШАЕТ ГЛУБИНУ ИХ ПРОНИКНОВЕНИЯ И ПРОДЛЕВАЕТ ДЕЙСТВИЕ ДО НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ ЗА СЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ В КОЖЕ «ДЕПО» АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ.


ДЕЙСТВИЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ТОКОВ В СОЧЕТАНИИ С ДЕЙСТВИЕМ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ПОМОГАЕТ УСКОРИТЬ РЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И КОЛЛАГЕНОГЕНЕЗ, СОКРАЩАЕТ МОРЩИНЫ И ПОВЫШАЕТ ТОНУС КОЖИ, УМЕНЬШАЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ.



УВЛАЖНЕНИЕ
И ПИТАНИЕ КОЖИ

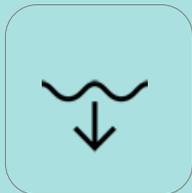

УСИЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ
КОСМЕТИКИ

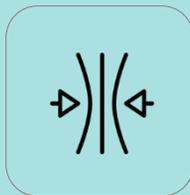

ПОВЫШЕНИЕ
УПРУГОСТИ



ВЫРАВНИВАНИЕ
МИКРОРЕЛЬЕФА
СОКРАЩЕНИЕ МОРЩИН




УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА



СОКРАЩЕНИЕ
ОТЕЧНОСТИ, ДЕТОКС



ПОВЫШЕНИЕ
ТОНУСА КОЖИ

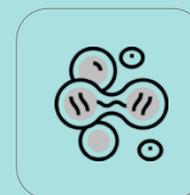

УСКОРЕНИЕ
РЕГЕНЕРАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



- **ДВОЙНАЯ ВЫГОДА:** ПРИОБРЕТАЯ MINI LIFT, ВЫ ПОКУПАЕТЕ 2 МАССАЖЕРА: ДЛЯ ЛИЦА И ОБЛАСТИ ГЛАЗ.
- **МАКСИМАЛЬНОЕ УДОБСТВО** ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: АППАРАТ УПРАВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ОДНОЙ КНОПКИ.
- ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
- **КОМФОРТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ** ДОМА И В ПОЕЗДКАХ.
- **ВСЕГДА С СОБОЙ:** ЛЕГКО ПОМЕСТИТСЯ В СУМКЕ, МОЖНО БРАТЬ С СОБОЙ В ПУТЕШЕСТВИЯ И ДЕЛОВЫЕ КОМАНДИРОВКИ.
- **ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ:** СЕАНС МАССАЖА ЗАНИМАЕТ 5 МИНУТ.
- **КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ** ПРИБОРА И НЕБОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ МАССАЖНОГО РОЛИКА ПОЗВОЛЯЮТ ПРОРАБОТАТЬ ВСЕ ЗОНЫ ЛИЦА И ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ, ДАЖЕ САМЫЕ МЕЛКИЕ МОРЩИНКИ.
- **ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** НЕ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ.

Артикул 1301130

2

ДВА МАССАЖЕРА
В ОДНОМ



ДЛЯ ЛИЦА И
ВОКРУГ ГЛАЗ



УПРАВЛЕНИЕ
1 КНОПКОЙ



УДОБНО БРАТЬ
С СОБОЙ

3

3 МЕТОДА
ВОЗДЕЙСТВИЯ

ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



РАБОТАЕТ ОТ БАТАРЕЙКИ AA
(в комплект не входит)

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ



1

УДАЛИТЕ
МАКИЯЖ



2

СМОЙТЕ ОСТАТКИ
ДЕМАКИЯЖНОГО СРЕДСТВА



3

НАНЕСИТЕ НА КОЖУ
АППАРАТНОЕ
КОСМЕТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО



4

ВКЛЮЧИТЕ ПРИБОР
ПРОВЕДИТЕ ПРОЦЕДУРУ ПО
МАССАЖНЫМ ЛИНИЯМ
ЛИЦА И ОБЛАСТИ ВОКРУГ
ГЛАЗ.



5

ДАЛИТЕ ОСТАТКИ
АППАРАТНОГО СРЕДСТВА,
ПРОТРИТЕ КОЖУ
ТОНИКОМ, НАНЕСИТЕ
МАСКУ.



6

ЗАВЕРШИТЕ ПРОЦЕДУРУ
НАНЕСЕНИЕМ СЫВОРОТКИ
И КРЕМА ПО ТИПУ КОЖИ.



ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 20 ПРОЦЕДУР, КОТОРЫЕ ПРОВОДЯТСЯ ЕЖЕДНЕВНО. ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА АППАРАТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 2 – 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОЦЕДУР



ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МАССАЖА
С ПРИБОРОМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
СПЕЦИАЛЬНАЯ АППАТНАЯ
КОСМЕТИКА

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУР ПО
СУХОЙ КОЖЕ ЗАПРЕЩЕНО.

КИСЛОРОДНЫЙ ГЕЛЬ С
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ



4501418AR – 250 мл

АКВА – ГЕЛЬ
АЛОЭ ВЕРА



4501417AR – 250 мл

ГЕЛЬ
«УЛЬТРАЛИФТ»



4501416AR – 250 мл

ГЕЛЬ
С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ



4504006K – 120 мл
4501428AR – 250 мл

СЫВОРОТКА
С КОЛЛАГЕНОМ



4506006 – 50 мл

РЕЗУЛЬТАТЫ



СЕАНСЫ ОМОЛАЖИВАЮЩЕГО МАССАЖА ЛИЦА И ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ ПОМОГАЮТ ЗАМЕДЛИТЬ УВЯДАНИЕ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ, УМЕНЬШАЮТ МОРЩИНЫ И БОРЮТСЯ С ПРОЯВЛЕНИЯМИ СТРЕССА.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MINILIFT ПО 5 МИНУТ УТРОМ И ВЕЧЕРОМ ДАРИТ ГЛАЗАМ ОТДЫХ, УСТРАНЯЕТ ОТЕЧНОСТЬ И СОКРАЩАЕТ МОРЩИНЫ В ОБЛАСТИ ГЛАЗ, СПОСОБСТВУЕТ ЛИКВИДАЦИИ ЗАСТОЯ, УМЕНЬШЕНИЮ КРУГОВ И ПРИПУХЛОСТЕЙ.



ПОВЫШЕНИЕ
ТОНУСА
И УПРУГОСТИ КОЖИ



УВЛАЖНЕНИЕ И
ПИТАНИЕ КОЖИ




СОКРАЩЕНИЕ
МОРЩИН И
ТОНКИХ ЛИНИЙ



ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОСМЕТИКИ



УМЕНЬШЕНИЕ
ПРИЗНАКОВ
УСТАЛОСТИ

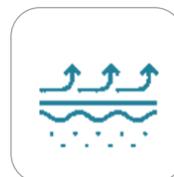

ВЫРАВНИВАНИЕ
МИКРОРЕЛЬЕФА



СОКРАЩЕНИЕ
ОТЕКОВ И КРУГОВ
ПОД ГЛАЗАМИ



УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА



ДЕТОКСИКАЦИЯ

** Результаты зависят от исходного состояния кожи, возраста и могут быть достигнуты только при проведении курса процедур*

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ДЕРМАТИТЫ, ДЕРМАТОЗЫ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ЭКЗЕМЫ И ДР..
- АКНЕ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ, ГНОЙНИЧКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ
- РАЗЛИЧНЫЕ ТРАВМЫ КОЖИ: ЦАРАПИНЫ, ПОРЕЗЫ, ГЕМАТОМЫ, ОЖОГИ (В ТОМ ЧИСЛЕ СОЛНЕЧНЫЕ ОЖОГИ)
- НАЛИЧИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ НА КОЖЕ В МЕСТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА
- НЕВРАЛГИЯ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА
- БЕРЕМЕННОСТЬ
- ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, ЭПИЛЕПСИЯ
- НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОСЛЕ ТРАВМИРУЮЩИХ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР.
- НЕ РЕКОМЕНДОВАНЫ СЕАНСЫ МАССАЖА ПРИ БОТОКСЕ
- НЕПЕРЕНOSИМОСТЬ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ТОКОВ.
- АРИТМИИ, НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ, ПАТОЛОГИИ СЕРДЦА И СОСУДОВ, НАРУШЕНИЕ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ. НОШЕНИЕ КАРДИОСТИМУЛЯТОРА И ДРУГИХ ЭЛЕКТРОННЫХ ИМПЛАНТОВ
- САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
- НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ АППАРАТ ПРИ НАЛИЧИИ ПОДКОЖНЫХ ИМПЛАНТАТОВ В ОБЛАСТИ ПРОЦЕДУРЫ (ЗОЛОТЫЕ НИТИ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБКИ). ЗУБНЫЕ КОРОНКИ, ШТИФТЫ И БРЕКЕТЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ.
- НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРУ ПРИ ГРИППЕ, ОРВИ, ОБОСТРЕНИИ ГЕРПЕСА И ЛИХОРАДОЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



РАБОТАЕТ ОТ БАТАРЕЙКИ AA
(в комплект не входит)

КОМПЛЕКАЦИЯ

Прибор Gezatone, m809 -1 шт.
Руководство по эксплуатации – 1
Упаковочная коробка – 1

Артикул 1301130

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	1,5 В (от батареи AA, в комплект не входит)
ВЫХОДНАЯ ЧАСТОТА	15 кГц
ДИАПАЗОН ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА	до 50 В, 30 мА
ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ	6000 колебаний / минута
КОЛИЧЕСТВО РЕЖИМОВ	1
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	134 x 19 x 19 мм
ВЕС ПРИБОРА БЕЗ УПАКОВКИ	37,4 грамма



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



GÉZATONE



Москва 8 (495) 120-10-80
регионы РФ: 8(800) 500-95-94
(звонок бесплатный)



<http://www.sozv.ru/>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>