

# GÉZATONE

## ВИБРОМАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА m 810 Minilift+

ИОНОФОРЕЗ

ВИБРОМАССАЖ

LED ТЕРАПИЯ + ИК ПРОГРЕВ



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

## РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ЛИФТИНГОВЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ИОНОФЕРЕЗА С ВИБРАЦИЕЙ, ИК И LED-ТЕРАПИЕЙ MINILIFT+ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ, КАК В МОЛОДОМ, ТАК И В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ. С ЕГО ПОМОЩЬЮ МОЖНО КОРРЕКТИРОВАТЬ ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КАК КОЖИ ЛИЦА, ТАК И В ЗОНЕ ВОКРУГ ГЛАЗ. ПРОЦЕДУРЫ ПОМОГУТ ПРЕДОТВРАТИТЬ РАННЕЕ УВЯДАНИЕ КОЖИ, ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТОКСИНОВ И ЛИКВИДИРОВАТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ НОЧНОГО НЕДОСЫПА ИЛИ ДОЛГОГО НАХОЖДЕНИЯ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ.



ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
И ПРОФИЛАКТИКА  
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ



СНИЖЕНИЕ ТОНУСА, УПРУГОСТИ,  
ЭЛАСТИЧНОСТИ И ПЛОТНОСТИ  
КОЖИ, МОРЩИНЫ



МОРЩИНЫ В ОБЛАСТИ ГЛАЗ,  
ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ



НЕДОСТАТОК ВЛАГИ И  
ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ



ОТЕЧНОСТЬ, ПРИПУХЛОСТИ И  
КРУГИ ПОД ГЛАЗАМИ



ОТЕЧНОСТЬ, ТУСКЛЫЙ ЦВЕТ  
ЛИЦА, УСТАВШАЯ КОЖА

## ФУНКЦИИ



СОЧЕТАЯ ИОНОФОРЕЗ, ВЫСОКОЧАСТОТНУЮ ВИБРАЦИЮ, ИК И СВЕТОТЕРАПИЮ, MINILIFT+ КОРРЕКТИРУЕТ ПРОЯВЛЕНИЯ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, МОДЕЛИРУЕТ ОВАЛ И РЕШАЕТ ПРОБЛЕМЫ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ.

КАЖДЫЙ ИЗ ТРЕХ МЕТОДОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РАБОТЕ АППАРАТА, ОКАЗЫВАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ.

СУММАЦИЯ ЭФФЕКТОВ ВИБРОМАССАЖА, ИОНОФОРЕЗА, ИК ТЕПЛА И КРАСНОГО ЦВЕТА ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.



Артикул 1301302



ВИБРАЦИЯ /  
ВИБРОМАССАЖ



ИОНОФОРЕЗ



ИК ПРОГРЕВ



LED  
ТЕРАПИЯ

## ОСНОВНЫЕ МЕТОДИКИ

ПРИБОР ИСПОЛЬЗУЕТ ВСЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ВИБРАЦИИ, ИОНОФЕРЕЗА И СВЕТОТЕРАПИИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ВОЗРАСТНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ И ЭСТЕТИЧЕСКИХ НЕДОСТАТКОВ.



Артикул 1301302



### ИОНОФЕРЕЗ

- ГЛУБОКОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ДЕПО В КОЖЕ.
- СОКРАЩЕНИЕ МОРЩИН
- ПРОТИВООТЕЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ, ДЕТОКС
- ТОНИЗАЦИЯ И СОКРАЩЕНИЕ ПОР
- КОРРЕКЦИЯ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- УВЛАЖНЕНИЕ, НАСЫЩЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ.



### ВИБРОМАССАЖ

- УСТРАНЕНИЕ СПАЗМА МИМИЧЕСКОЙ МУСКУЛАТУРЫ
- СОКРАЩЕНИЕ МОРЩИН И ПОДТЯЖКА КОЖИ
- ПРОТИВООТЕЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
- АКТИВИЗАЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЛИМФОДРЕНАЖА
- ВЫВЕДЕНИЕ ТОКСИНОВ
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ КОЖИ.



### LED ТЕРАПИЯ + ИК ПРОГРЕВ

- СТИМУЛЯЦИЯ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ
- СТИМУЛЯЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ И РЕПАРАЦИИ
- УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ
- АКТИВИЗАЦИЯ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
- СТИМУЛЯЦИЯ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА
- СНИЖЕНИЕ СПАЗМА МЫШЦ
- ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОСМЕТИКИ

## ВИБРОМАССАЖ



ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ВИБРАЦИЯ ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ НА МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОЕ РУСЛО, ЛИМФАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ И КОЖУ.

ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВИБРОМАССАЖА УХОДИТ СПАЗМ МИМИЧЕСКОЙ МУСКУЛАТУРЫ, ЧТО ПОМОГАЕТ УМЕНЬШИТЬ МОРЩИНЫ И ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБРАЗОВАНИЕ НОВЫХ.

ВИБРАЦИЯ СТИМУЛИРУЕТ ВЫВЕДЕНИЕ ЖИДКОСТИ И ТОКСИНОВ, СОКРАЩАЮТСЯ ОТЕКИ, ЛИЦО СТАНОВИТСЯ СВЕЖИМ, КЛЕТКИ ПОЛУЧАЮТ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ И КИСЛОРОДА.

**10000**


КОЛЕБАНИЙ  
В МИНУТУ



ПОВЫШЕНИЕ  
ТОНУСА  
И УПРУГОСТИ



СОКРАЩЕНИЕ  
МЕЛКИХ МОРЩИН

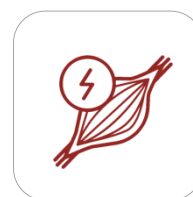


УСТРАНЕНИЕ  
СПАЗМОВ МЫШЦ



СТИМУЛЯЦИЯ  
КРОВООБРАЩЕНИЯ



АКТИВИЗАЦИЯ  
ЛИМФОДРЕНАЖА

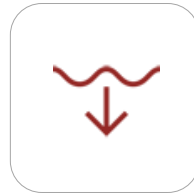

УСИЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ  
КОСМЕТИКИ



ДЕТОКСИКАЦИЯ

## ИОНОФОРЕЗ



ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ТОКИ УСИЛИВАЮТ ПРОНИКНОВЕНИЕ В КОЖУ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАРЯЖЕННЫХ (ИОНИЗИРОВАННЫХ) ПРЕПАРАТОВ, ДАННОЕ ЯВЛЕНИЕ НОСИТ НАЗВАНИЕ ИОНОФОРЕЗА.

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ТОК ПЕРЕВОДИТ ДЕЙСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ КОСМЕТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА В АКТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ, ПОВЫШАЕТ ГЛУБИНУ ИХ ПРОНИКНОВЕНИЯ И ПРОДЛЕВАЕТ ДЕЙСТВИЕ ДО НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ ЗА СЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ В КОЖЕ «ДЕПО» АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ.


БЛАГОДАРЯ ИОНОФОРЕЗУ «MINILIFT+» ДОСТАВЛЯЕТ ПИТАТЕЛЬНЫЕ, УВЛАЖНЯЮЩИЕ, РЕГЕНЕРИРУЮЩИЕ И ДРУГИЕ, ТАК НЕОБХОДИМЫЕ КОЖЕ КОМПОНЕНТЫ.



УВЛАЖНЕНИЕ  
И ПИТАНИЕ КОЖИ




УСИЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ  
КОСМЕТИКИ

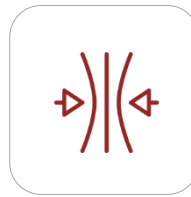

ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА  
И УПРУГОСТИ



ВЫРАВНИВАНИЕ  
МИКРОРЕЛЬЕФА  
СОКРАЩЕНИЕ МОРЩИН

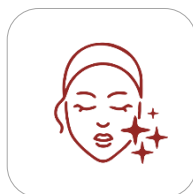

УЛУЧШЕНИЕ  
ЦВЕТА ЛИЦА



СОКРАЩЕНИЕ  
ОТЕЧНОСТИ, ДЕТОКС



УМЕНЬШЕНИЕ  
РАСШИРЕННЫХ ПОР



УСКОРЕНИЕ  
РЕГЕНЕРАЦИИ

## LED ТЕРАПИЯ

**КРАСНЫЙ СВЕТ 630 нм**

№1 для повышения скорости синтеза коллагена.


СОКРАЩАЕТ МОРЩИНЫ И ПРИЗНАКИ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ДЕЛАЕТ КОЖУ БОЛЕЕ ПЛОТНОЙ И УПРУГОЙ.

ПОВЫШАЕТ УРОВЕНЬ УВЛАЖНЕННОСТИ И СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ ВНЕШНИМ СТРЕСС-ФАКТОРАМ, УЛУЧШАЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИКРОПОВРЕЖДЕНИЙ.

МЯГКОЕ ТЕПЛО УСТАРЯЕТ СПАЗМ МИМИЧЕСКОЙ МУСКУЛАТУРЫ И ПРЕПЯТСТВУЕТ ВОЗНИКНОВЕНИЮ МОРЩИН, УЛУЧШАЕТ ПРОНИКНОВЕНИЕ КОСМЕТИКИ.



СТИМУЛЯЦИЯ  
СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА

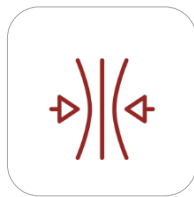


ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА  
И УПРУГОСТИ



СТИМУЛЯЦИЯ  
РЕГЕНЕРАЦИИ



КОРРЕКЦИЯ  
МОРЩИН

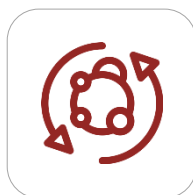


УСКОРЕНИЕ  
МЕТАБОЛИЗМА



УВЛАЖНЕНИЕ  
КОЖИ



СОКРАЩЕНИЕ  
РАСШИРЕННЫХ ПОР

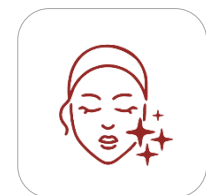

УЛУЧШЕНИЕ  
ЦВЕТА ЛИЦА

## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- **МАКСИМАЛЬНОЕ УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** У НЕГО ДАЖЕ НЕТ КНОПКИ ВКЛЮЧЕНИЯ. ВСЕ ФУНКЦИИ АКТИВИРУЮТСЯ ПРИ КАСАНИИ ЭЛЕКТРОДОМ КОЖИ.
- **ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ**
- **КОМФОРТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОМА И В ПОЕЗДКАХ.**
- **ВСЕГДА С СОБОЙ:** ЛЕГКО ПОМЕСТИТСЯ В КОСМЕТИЧКЕ, МОЖНО БРАТЬ С СОБОЙ В ПУТЕШЕСТВИЯ И ДЕЛОВЫЕ КОМАНДИРОВКИ.
- **ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ:** СЕАНС МАССАЖА ЗАНИМАЕТ 10 МИНУТ.
- **ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** НЕ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ.
- **ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ:** ПРИОБРЕТАЯ ОДИН «MINILIFT+», ВЫ ПОКУПАЕТЕ 2 ПРИБОРА, И ДЛЯ ЛИЦА И ДЛЯ ГЛАЗ.
- **УСТРОЙСТВО КОМФОРТНО ДЕРЖАТЬ В РУКЕ, «MINILIFT+» ЛЕГКИЙ, КАК ПЕРЫШКО И ВЕСИТ ВСЕГО 29 ГРАММ.**



Артикул 1301302



ВКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ  
СОПРИКОСНОВЕНИИ  
С КОЖЕЙ



ВЕС  
29 ГРАММ



1 РЕЖИМ  
РАБОТЫ



РАБОТАЕТ  
ОТ  
БАТАРЕЙКИ ААА



1 ЦВЕТ  
LED ТЕРАПИИ



## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ТРИ РЕЖИМА РАБОТЫ, ТРИ ЦВЕТА СВЕТОТЕРАПИИ И ТРИ ЧАСТОТЫ ВИБРОМАССАЖА ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЭФФЕКТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ И МЫШЦЫ, А ТАКЖЕ ПОВЫШАЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОСМЕТИКИ.



### ВИБРОМАССАЖ 10000 КОЛЕБАНИЙ В МИНУТУ

РАЗГЛАЖИВАЕТ МОРЩИНЫ И СОКРАЩАЕТ КОЖНЫЕ ЗАЛОМЫ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ГИПЕРТОНУСА МИМИЧЕСКИХ МЫШЦ.

ЭЛЕКТРОД ПЛОТНО СОПРИКАСАЕТСЯ С КОЖЕЙ, ЛЕГКО СКОЛЬЗИТ ПРИ МАССАЖЕ.

### МАКСИМАЛЬНО ПРОСТОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПРИБОР МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕЗ СПЦИАЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, У НЕГО ДАЖЕ НЕТ КНОПКИ ВКЛЮЧЕНИЯ. ОН НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ ПРИ КОНТАКТЕ С КОЖЕЙ.




### ВСЕГДА ПОД РУКОЙ

ПРИБОР ЛЕГКО ДЕРЖАТЬ, ОН ВЕСИТ ВСЕГО 29 ГРАММ, РУКА НЕ УСТАЕТ ВО ВРЕМЯ СЕАНСА. ЛЕГКО ПОМЕЩАЕТСЯ В СУМОЧКЕ, ЕГО МОЖНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ НА ОТДЫХ ИЛИ В КОМАНДИРОВКУ, ЧТОБЫ НЕ ПРЕРЫВАТЬ КУРС ПРОЦЕДУР.

### ДВА ЭЛЕКТРОДА

2 ЭЛЕКТРОДА РАЗНОЙ ПЛОЩАДИ ДЛЯ ЛИЦА И ОБЛАСТИ ГЛАЗ. ДЛЯ ЛИЦА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЭЛЕКТРОД С БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДЬЮ КОНТАКТА, ДЛЯ ГЛАЗ – МАЛЕНЬКИЙ ЭЛЕКТРОД НА ПРОТИВОПОЛОЖНОМ КОНЦЕ ПРИБОРА.

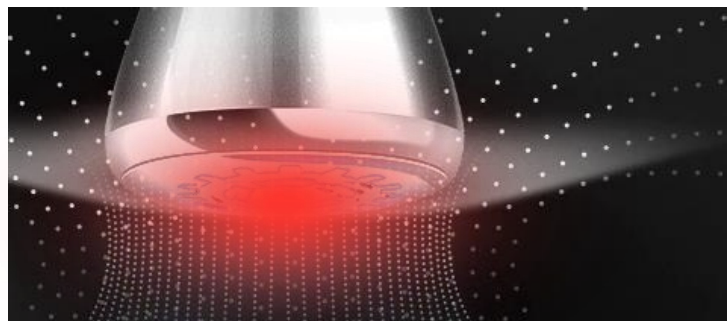

## ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА



Артикул 1301302



29



ВЕС  
29 грамм



ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ



РАБОТАЕТ ОТ  
БАТАРЕЙКИ ААА  
(в комплект не входит)

## КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ



1

УДАЛИТЕ  
МАКИЯЖ



2

СМОЙТЕ ОСТАТКИ  
ДЕМАКИЯЖНОГО СРЕДСТВА



3

НАНЕСИТЕ НА КОЖУ  
АППАРАТНОЕ  
КОСМЕТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО



4

ДЛЯ НАЧАЛА ПРОЦЕДУРЫ И  
ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРА ПЛОТНО  
ПРИСЛОНИТЕ ЭЛЕКТРОД К КОЖЕ,  
НЕ ОКАЗЫВАЯ СИЛЬНОГО  
ДАВЛЕНИЯ. ПРОВЕДИТЕ МАССАЖ  
ПО МАССАЖНЫМ ЛИНИЯМ.



5

ДАЛИТЕ ОСТАТКИ  
АППАРАТНОГО СРЕДСТВА,  
ПРОТРИТЕ ЛИЦО  
ТОНИКОМ, НАНЕСИТЕ  
МАСКУ.



6

ЗАВЕРШИТЕ ПРОЦЕДУРУ  
НАНЕСЕНИЕМ СЫВОРОТКИ  
И КРЕМА ПО ТИПУ КОЖИ.



СЕАНСЫ ПРОВОДЯТСЯ ЧЕРЕЗ ДЕНЬ, ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 20 ПРОЦЕДУР.



## КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОЦЕДУР

ГЕЛЬ  
«УЛЬТРАЛИФТ»



4501416AR – 250 мл

КИСЛОРОДНЫЙ ГЕЛЬ С  
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ



4501418AR – 250 мл

АКВА – ГЕЛЬ  
АЛОЭ ВЕРА



4501417AR – 250 мл

СЫВОРОТОЧНЫЙ  
КОНЦЕНТРАТ  
ДЛЯ ОБЛАСТИ ГЛАЗ  
«SUPERLIFT»



4506015KPRO - 3 мл x 5

ГЕЛЬ  
С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ



4504006K – 120 мл  
4501428AR – 250 мл

КОЛЛАГЕНОВАЯ  
СЫВОРОТКА




4515119K – 6 x 5 мл


## РЕЗУЛЬТАТЫ\*



КУРС ОМОЛАЖИВАЮЩИХ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ СЕАНСОВ ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА И ЗОНЫ ВОКРУГ ГЛАЗ ОБЕСПЕЧИТ ВИДИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ЗАМЕДЛЯЯ УВЯДАНИЕ И ИЗБАВЛЯЯ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ВНЕШНИХ ВЛИЯНИЙ И СТРЕССА. ЛИЦО СТАНОВИТСЯ СВЕЖИМ, КОЖА ИЗБАВЛЯЕТСЯ ОТ ТОКСИНОВ, УМЕНЬШАЕТСЯ ОТЕЧНОСТЬ. УСТРАНЯЯ СПАЗМ МИМИЧЕСКИХ МЫШЦ, ПРИБОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБРАЗОВАНИЕ НОВЫХ МОРЩИН, КАК В ОБЛАСТИ ГЛАЗ, ТАК И В ОБЛАСТИ ЛИЦА.

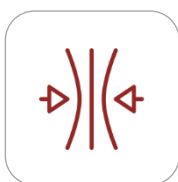

ПОВЫШЕНИЕ  
ТОНУСА  
И УПРУГОСТИ КОЖИ

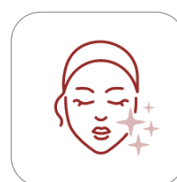

УЛУЧШЕНИЕ  
ЦВЕТА ЛИЦА



СОКРАЩЕНИЕ ОТЕКОВ  
И МОРЩИН  
В ОБЛАСТИ ГЛАЗ



ПОВЫШЕНИЕ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ  
КОСМЕТИКИ




УВЛАЖНЕНИЕ И  
ПИТАНИЕ КОЖИ



ВЫРАВНИВАНИЕ  
МИКРОРЕЛЬЕФА



КОРРЕКЦИЯ  
МОРЩИН И  
ВОЗРАСТНЫХ  
ИЗМЕНЕНИЙ

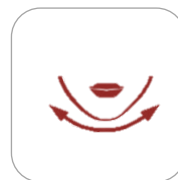

МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ОВАЛА ЛИЦА



СОКРАЩЕНИЕ  
ОТЕКОВ И  
ДЕТОКСИКАЦИЯ

*\* Результаты зависят от исходного состояния кожи, возраста и могут быть достигнуты только при проведении курса процедур*

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ДЕРМАТИТЫ, ДЕРМАТОЗЫ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ЭКЗЕМЫ, ПСОРИАЗ И ДР..
- АКНЕ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ, ГНОЙНИЧКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ
- РАЗЛИЧНЫЕ ТРАВМЫ КОЖИ: ЦАРАПИНЫ, ПОРЕЗЫ, ГЕМАТОМЫ, ОЖОГИ (В ТОМ ЧИСЛЕ СОЛНЕЧНЫЕ ОЖОГИ)
- НАЛИЧИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ НА КОЖЕ В МЕСТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА
- НЕВРАЛГИЯ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА
- БЕРЕМЕННОСТЬ
- ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, ЭПИЛЕПСИЯ
- НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОСЛЕ ТРАВМИРУЮЩИХ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР.
- НЕ РЕКОМЕНДОВАНЫ СЕАНСЫ МАССАЖА ПРИ БОТОКСЕ
- НЕПЕРЕНOSИМОСТЬ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ТОКОВ.
- АРИТМИИ, НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ, ПАТОЛОГИИ СЕРДЦА И СОСУДОВ, НАРУШЕНИЕ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ. НОШЕНИЕ КАРДИОСТИМУЛЯТОРА И ДРУГИХ ЭЛЕКТРОННЫХ ИМПЛАНТОВ
- САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
- НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ АППАРАТ ПРИ НАЛИЧИИ ПОДКОЖНЫХ ИМПЛАНТАТОВ В ОБЛАСТИ ПРОЦЕДУРЫ (ЗОЛОТЫЕ НИТИ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБКИ). ЗУБНЫЕ КОРОНКИ, ШТИФТЫ И БРЕКЕТЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ.
- НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРУ ПРИ ГРИППЕ, ОРВИ, ОБОСТРЕНИИ ГЕРПЕСА И ЛИХОРАДОЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



РАБОТАЕТ ОТ 1  
БАТАРЕЙКИ



ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Артикул 1301302

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (в комплект не входит)	1 БАТАРЕЙКА ААА
ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ	10000 колебаний/минуту
КОЛИЧЕСТВО РЕЖИМОВ	1
КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТОВ LED ТЕРАПИИ	1
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	98,5x39,5 диаметр 39,5 мм
ВЕС ПРИБОРА БЕЗ УПАКОВКИ	29 грамм

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор Gezatone, m810 -1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1

Упаковочная коробка – 1



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



**GÉZATONE**



Москва 8 (495) 120-10-80  
регионы РФ: 8(800) 500-95-94  
(звонок бесплатный)



<http://www.sozv.ru/>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>