

GÉZATONE

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА

BIOSONIC 1140



RF

УЗ КАВИТАЦИЯ

МИОСТИМУЛЯЦИЯ

ХРОМОТЕРАПИЯ



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ





РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИЛУЭТА И КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ ПРИ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ В ОБЛАСТИ ЖИВОТА, ТАЛИИ, БЕДЕР И ЯГОДИЦ. ЭФФЕКТИВЕН В ОТНОШЕНИИ ЦЕЛЛЮЛИТА ПОЗДНИХ СТАДИЙ, ПОДТЯГИВАЕТ КОЖУ, ДЕЛАЕТ БОЛЕЕ РОВНЫМ РЕЛЬЕФ, УКРЕПЛЯЕТ МЫШЦЫ И СПОСОБСТВУЕТ ДЕТОКСИКАЦИИ.



ЦЕЛЛЮЛИТ /
ЭФФЕКТ
АПЕЛЬСИНОВОЙ
КОРКИ



ИЗБЫТОЧНЫЕ
ЖИРОВЫЕ
ОТЛОЖЕНИЯ



ЗАСТОЙ В
ПРОБЛЕМНЫХ
ЗОНАХ, ОТЕКИ



ДРЯБЛОСТЬ,
РАСТЯЖКИ,
ВОЗРАСТНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ



СНИЖЕНИЕ
МЫШЕЧНОГО
ТОНУСА



4 ОСНОВНЫЕ МЕТОДИКИ

КОМБИНАЦИЯ ЧЕТЫРЕХ МЕТОДИК ПОЗВОЛЯЕТ В КОРОТКИЕ СРОКИ ПОЗВОЛЯЕТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ЦЕЛЛЮЛИТА И ЛОКАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ, КОТОРЫЕ ТРУДНО ПОДДАЮТСЯ КОРРЕКЦИИ С ПОМОЩЬЮ ДИЕТ И ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ



ПОД ДЕЙСТВИЕМ
УЛЬТРАЗВУКА
РАСЩЕПЛЯЮТСЯ ДАЖЕ
САМЫЕ ПЛОТНЫЕ ЖИРОВЫЕ
ОТЛОЖЕНИЯ, ПРИ ЭТОМ
ЖИР ВЫВОДИТСЯ ИЗ
ОРГАНИЗМА ЕСТЕСТВЕННЫМ
ПУТЕМ.

УЗ КАВИТАЦИЯ

Коррекция целлюлита
и избыточных
жировых отложений,
устранение застоя



ТЕПЛО, СОЗДАВАЕМОЕ
РАДИОВОЛНАМИ,
СТИМУЛИРУЕТ
РАСЩЕПЛЕНИЕ ЖИРА И
УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА,
АКТИВИЗИРУЮТСЯ
ПРОЦЕССЫ СИНТЕЗА
МОЛОДОГО КОЛЛАГЕНА.

РАДИОЧАСТОТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ / RF

Укрепление и подтяжка кожи,
моделирование фигуры,
коррекция избыточных
жировых отложений



УКРЕПЛЯЕТ МЫШЦЫ И
УМЕНЬШАЕТ ОБЪЕМЫ
ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ.
АКТИВНОЕ СОКРАЩЕНИЕ
МЫШЦ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ИМПУЛЬСОВ СПОСОБСТВУЕТ
МОДЕЛИРОВАНИЮ ФИГУРЫ.

EMS ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ

Моделирование
фигуры, укрепление
мышц, подтяжка кожи



КРАСНЫЙ СВЕТ
СТИМУЛИРУЕТ
КРОВООБРАЩЕНИЕ И
УСИЛИВАЕТ ВЫРАБОТКУ
КОЛЛАГЕНА.
СИНИЙ ЦВЕТ
МИНИМИЗИРУЕТ РЕАКЦИЮ
КОЖИ НА RF ВОЗДЕЙСТВИЕ

ХРОМО ТЕРАПИЯ

Стимуляция выработки коллагена,
укрепление кожи, активизация
кровообращения, успокаивающее и
противовоспалительное действие





ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



Арт. 1301229



РАБОТАЕТ ОТ
АККУМУЛЯТОРА



- 4 МЕТОДИКИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ В КОМПАКТНОМ КОРПУСЕ
- АБСОЛЮТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
- ТОЧНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ: ПРИБОР ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ МОДЕЛИРОВАТЬ СИЛУЭТ, ВОЗДЕЙСТВУЯ ТОЛЬКО НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЗОНЫ: ЯГОДИЦЫ, ЖИВОТ, ТАЛИЮ.
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ: КОМБИНАЦИЯ НЕСКОЛЬКИХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ И УРОВНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ПОМОГАЕТ СОЗДАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ.
- ВИДИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ ПЕРВОГО СЕАНСА
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕ УСТУПАЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОЦЕДУРАМ
- ПРИБОР ПРОСТ И КОМФОРТЕН В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И СРЕДСТВ: 30 МИНУТ ТРИ РАЗА В НЕДЕЛЮ.

3

3 УРОВНЯ
ИНТЕНСИВНОСТИ



30 МИНУТ
В ДЕНЬ

5

5 РЕЖИМОВ/
ФУНКЦИЙ



УДОБНО БРАТЬ
С СОБОЙ



5 РЕЖИМОВ / ФУНКЦИЙ

КОМБИНАЦИЯ НЕСКОЛЬКИХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ И УРОВНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ПОМОГАЕТ СОЗДАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ.



Арт. 1301229



RF

РЕЖИМ МОНОВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОЖУ И ПОДКОЖНО-ЖИРОВУЮ КЛЕТЧАТКУ РАДИОВОЛНАМИ.
3 УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ.



CAVI

РЕЖИМ МОНОВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОЖУ И ПОДКОЖНО-ЖИРОВУЮ КЛЕТЧАТКУ УЛЬТРАЗВУКОВЫМИ ВОЛНАМИ.
3 УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ.



RF+CAVI+EMS (COMBI)

RF, КАВИТАЦИЯ И EMS ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ ЧЕРЕЗ 10 СЕКУНД.
3 УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ.



EMS

РЕЖИМ МОНОВОЗДЕЙСТВИЯ НА МЫШЦЫ, КОЖУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ИМПУЛЬСАМИ.
3 УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ.



RED / BLUE

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ КРАСНЫМ ИЛИ СИНИМ ЦВЕТОМ. РЕЖИМ МОЖЕТ РАБОТАТЬ СИНХРОННО С ДРУГИМИ РЕЖИМАМИ.






ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА

ИНДИКАТОР ФУНКЦИЙ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ



ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО В
КОМПЛЕКТЕ

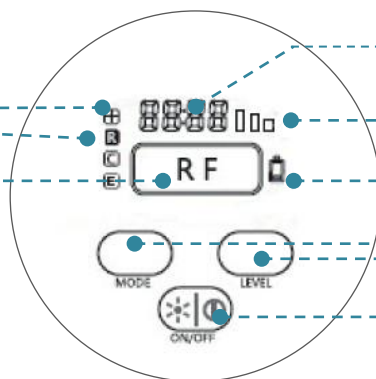

ИНДИКАТОР ВРЕМЕНИ ПРОЦЕДУРЫ

ИНДИКАТОР ИНТЕНСИВНОСТИ

ИНДИКАТОР ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

КНОПКА ВЫБОРА РЕЖИМА

КНОПКА ИНТЕНСИВНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ


КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ/ ХРОМОТЕРАПИЯ

LED ПАНЕЛЬ (24 СВЕТОДИОДА)

RF / EMS ИЗЛУЧАТЕЛЬ

УЗ ИЗЛУЧАТЕЛЬ

ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА

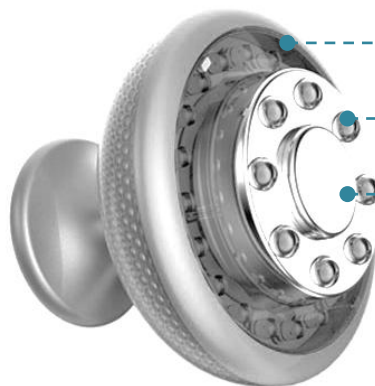

Арт. 1301229



КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

ДЛЯ ПРОЦЕДУР



Арт. 4515500 – 130 мл

КОНТАКТНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ
ПРОЦЕДУР ЛАЗЕРНОЙ И
RF КОРРЕКЦИИ



Арт. 4501408 – 600 мл
Арт. 4501407 – 150 мл

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА
«УЛЬТРАЦЕЛЛ»



Арт. 4501410 – 600 мл

ТОНИЗИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ
ДЛЯ ТЕЛА
«УЛЬТРАФИРМ»



Арт. 4501818 – 200 мл

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
ПОДЪЯГИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ,
«ЦЕЛЛЮГЕЛЬ»



РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕЛЬЕФНОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
СИЛУЭТА



ПОВЫШЕНИЕ
ТОНУСА МЫШЦ



УМЕНЬШЕНИЕ
ОБЪЕМОВ БЕЗ
«ПРОВИСАНИЯ»
КОЖИ



УМЕНЬШЕНИЕ
ИЗБЫТОЧНЫХ
ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ



ПОДТЯЖКА И
УКРЕПЛЕНИЕ КОЖИ,
ПОВЫШЕНИЕ
УПРУГОСТИ,
КОРРЕКЦИЯ РАСТЯЖЕК



КОРРЕКЦИЯ
ЦЕЛЛЮЛИТА



ВЫРАВНИВАНИЕ
КОЖНОГО
РЕЛЬЕФА



УСТРАНЕНИЕ ЗАСТОЯ
В ПРОБЛЕМНЫХ
ЗОНАХ, ДРЕНАЖ



Арт. 1301229



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- БЕРЕМЕННОСТЬ И ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ
- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
- ЖЕЛЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ, ПЕЧЕНОЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, ГЕПАТИТ ЛЮБОГО ВИДА
- САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
- ЭПИЛЕПСИЯ
- ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ, ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ, НАЛИЧИЕ КАРДИОСТИМУЛЯТОРА
- ВАРИКОЗ И СОСУДИСТАЯ СЕТКА В ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ, НАРУШЕНИЯ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ
- НАЛИЧИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШТИФТОВ И ИМПЛАНТАТОВ В ЗОНЕ ОБРАБОТКИ («ЗОЛОТЫЕ» НИТИ, СИЛИКОН, ВНУТРИМАТОЧНАЯ СПИРАЛЬ И ДР.)
- МИОМА МАТКИ
- НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖИ В МЕСТЕ ОБРАБОТКИ, ОЖОГИ, РАНЫ
- ЗАБОЛЕВАНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ (СКЛЕРОДЕРМИЯ, СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА И ДР.), СКЛОННОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ КЕЛОИДОВ
- НАРУШЕНИЕ КОЖНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
- ХРОНИЧЕСКИЕ ДЕРМАТИТЫ И ДЕРМАТОЗЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ, ПРИЕМ ДЕРМАТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ
- ОСТРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ГРИПП, ОРВИ, ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА
- ДЕТСКИЙ ИЛИ ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- ТИП ПРИБОРА: БЕСПРОВОДНОЙ, ЗАРЯЖАЕМЫЙ
- ЧАСТОТА В РЕЖИМЕ КАВИТАЦИИ: 800 кГц±10%
- ЦВЕТА В РЕЖИМЕ ХРОМОТЕРАПИИ: СИНИЙ И КРАСНЫЙ
- ДЛИНА ВОЛНЫ В РЕЖИМЕ СВЕТОТЕРАПИИ: КРАСНЫЙ СВЕТ: 622±5 нм, СИНИЙ СВЕТ: 467±5 нм
- ЧАСТОТА В РЕЖИМЕ RF: 500кГц±10%
- СИГНАЛ В РЕЖИМЕ EMS СОСТОИТ ИЗ ТРЁХ СОСТАВЛЯЮЩИХ, ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ 2 СЕК КАЖДАЯ. ЧАСТОТА 1-Й СОСТАВЛЯЮЩЕЙ: 2,5 Гц. ЧАСТОТА 2-Й СОСТАВЛЯЮЩЕЙ: 10 Гц. ЧАСТОТА 3-Й СОСТАВЛЯЮЩЕЙ: 33 Гц
- ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 100-240 В/50-60 Гц
- ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (ЗАРЯДНОЙ БАЗЫ): 5В 1А
- ЁМКОСТЬ ЛИТИЙ – ИОННОЙ БАТАРЕИ: 900 мАч
- ВРЕМЯ ЗАРЯДА: ОКОЛО 3 часов
- ОБЩЕЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОСЛЕ ПОЛНОГО ЗАРЯДА ОКОЛО 1,5 часов
- УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКИ ОТКЛЮЧАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 10 минут

- ДИАМЕТР: 99 мм
- ВЫСОТА: 94 мм, ВЕС: 295 грамм.



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



GÉZATONE



Москва 8 (495) 925-00-34
регионы РФ: 8-800-200-00-34 (звонок
бесплатный)



<http://www.sozv.ru/>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>