

GÉZATONE

BEM-505

массажер для глаз с тепловой и вибромассажной функциями



МАССАЖЕР ДЛЯ ГЛАЗ BEM 505
Gezatone

BEM-505

массажер для глаз с тепловой и вибромассажной функциями

GEZATONE

Массажер для глаз BEM 505 профессиональный уход за областью глаз.

В современном мире глаза испытывают огромную нагрузку. Компьютеры, яркие световые композиции, вождение автомобиля, чтение: все это приводит к усталости глаз, снижению функций зрения. Как результат, в глазах как будто насыпан песок, четкость зрения ухудшается, да и общее самочувствие становится хуже.

Мы стараемся сфокусироваться – и щуримся, провоцируя появление морщин. Справиться с этими явлениями можно, если приобрести массажер для глаз Gezatone BEM 505 и регулярно проводить процедуры расслабляющего массажа.



массажер для глаз с тепловой и вибромассажной функциями

КОМУ НЕОБХОДИМ массажер для глаз **BEM 505.**



Тем, кто много времени проводит за компьютером, с планшетом или смартфоном. Мерцающий свет мониторов перегружает глаза, но мало кто делает перерывы каждый час работы за компьютером. Массажер для глаз BEM 505- оптимальное решение для снятия усталости глаз и спазма мышц.



Тем, кто водит автомобиль. Постоянное напряжение зрения повышает нагрузку на сосуды, провоцирует застой лимфы, что приводит к покраснению и отекам. От этого легко избавиться, проводя ежедневный массаж глаз.




Всем, кто хочет сохранить остроту зрения и красоту глаз надолго. Массаж глаз улучшает состояние мышц и сосудов, противодействует возрастным изменениям зрения, оказывает косметическое действие, повышает тонус кожи, корректирует отеки и темные круги.


ФУНКЦИИ

Массажера для глаз BEM 505

- Это многофункциональный, высокотехнологичный прибор для расслабляющего массажа в области вокруг глаз и висков. Благодаря встроенной компьютерной технологии массаж не отличается от ручного профессионального массажа.
- ПРЕССОВОЗДЕЙСТВИЕ на параорбитальные области глаз осуществляется с помощью пневмоподушечек, расположенных на маске. Нагнетание воздуха в пневмоподушечки производится по гибкому шлангу микронасосом, расположенным в блоке управления в соответствии с одной из четырех логических схем.
- ФУНКЦИЯ ВИБРОМАССАЖА реализована с помощью микромоторов, расположенных в пластиковом корпусе маски. Пользователь может выбрать любой из возможных вариантов массажа (значения интенсивности/частоты и очередности работы микромоторов).
- ФУНКЦИЯ ИК прогрева помогает быстрее снять напряжение и усталость глаз.
- Прибор также вырабатывает трехмерное магнитное поле, которое стимулирует восстановление работоспособности, помогая устранению отеков и мешков под глазами.
- Музыкальная функция направлена на максимальное расслабление и восстановление работоспособности. Вы можете слушать свою любимую музыку или звуки природы, записав их на SD карту (в комплект не входит).

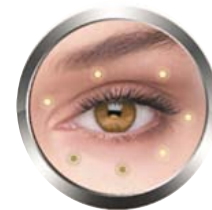

ЗНАЧЕНИЯ СВЕТОВЫХ ИНДИКАТОРОВ

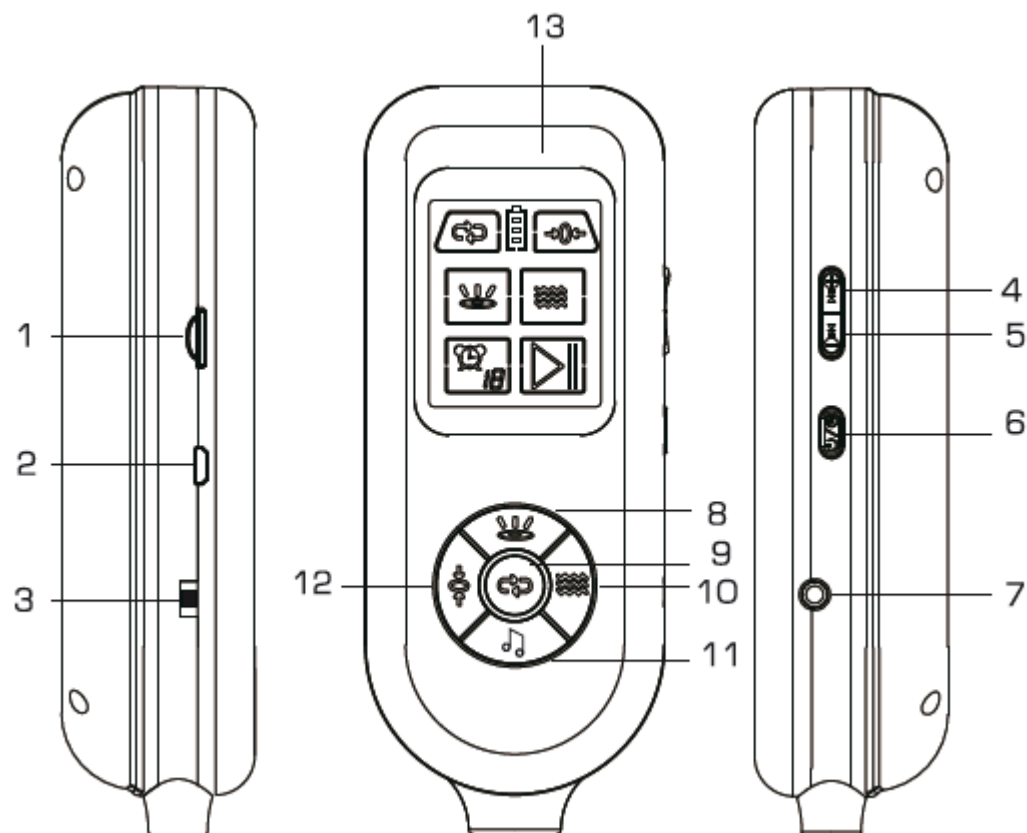

1. Разъем для SD карты (карта в комплект не входит)
2. Разъем micro USB для зарядки аккумулятора
3. Включатель питания ON/OFF
4. Кнопка увеличения громкости/переключения на предыдущий трек.
5. Кнопка уменьшения громкости/переключение на следующий трек.
6. Кнопка включения/выключения работы массажера, управление таймером.
7. Разъем наушников.
8. Настройка уровней режима нагрева.
9. Кнопка выбора режима
10. Настройка уровней режима вибрации
11. Включение/выключение музыки
12. Настройка уровней режима давления воздуха.
13. Экран.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР

*Подсоедините шнур питания USB и зарядите
аккумулятор в течение 5-8 часов*



1 – разъем для SD карты , 2 – micro USB разъем, 3 – кнопка включения.



*Наденьте
устройство на
глаза*



*Отрегулируйте
очки*

ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ

При воздействии на активные точки, возможна коррекция следующих симптомов:



ОСОБЕННОСТИ Массажера для глаз BEM 505

- ✓ Вибромассажное, прогревающее, компрессионное воздействие на область глаз
- ✓ Помогает уменьшить утомление глаз и восстановить четкость зрения
- ✓ Обеспечивает профилактику возрастных изменений
- ✓ Способствует уменьшению морщин (гусиных лапок)
- ✓ Помогает избавиться от мешков, отеков и черных кругов под глазами

Массажер Gezatone BEM 505 рекомендован для применения:

- ✓ Студентам, школьникам и людям, страдающим от ухудшения зрения в связи с повышенной нагрузкой на глаза.
- ✓ Людям, вынужденным проводить много времени за мониторами компьютеров: операторы, бухгалтеры, дизайнеры, инженеры.
- ✓ Для избавления от мешков, черных кругов и морщин вокруг глаз.
- ✓ Людям, страдающим от бессонницы.

ПРЕИМУЩЕСТВА Массажера для глаз BEM 505

- ✓ 5 функций для быстрого снятия усталости, спазма мышц.
- ✓ Сочетание вибрации и прессмассажа, ИК-прогрева и магнитотерапии, музыкальные композиции улучшают настроение и самочувствие, снимает ощущение усталости глаз.
- ✓ Выносной пульт с ЖК-дисплеем позволяет выбрать желаемую комбинацию воздействий, чтобы получить комфортную процедуру.
- ✓ Эргономичный дизайн предусматривает специальную маску, которая прилегает к коже и воздействует на точки акупунктуры.
- ✓ Работа от аккумулятора обеспечивает мобильность: используйте прибор в офисе и дома, берите в путешествия и командировки.
- ✓ Возможность записать на SD карту свою любимую музыку или звуки природы (в комплект не входит).



пульт с
ЖК-дисплеем



маска



на работе



в путешествии




дома



SD карта

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Острые воспалительные заболевания глаз, глаукома, катаракта.
- Другие не указанные серьезные заболевания глаз.
- Обострение тяжелых хронических заболеваний.
- Гипотонические состояния.
- Острые инфекционные заболевания.
- При наличии неврологических заболеваний необходима консультация врача.
- После травмы или операции на глазах применение массажера разрешается только при наличии разрешения врача.
- Не использовать людям, страдающим от апоплексии, гипертензии и гипотензии.
- Запрещается использование людьми с ограниченными умственными и физическими способностями.

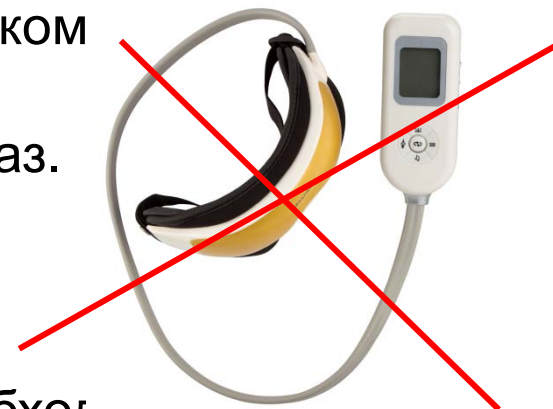

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Наименование: BEM-550 Массажер для глаз Gezatone
- Артикул: 1301191
- Температура эксплуатации: 5-40 С°
- Относительная влажность: 80%
- Компрессионное давление: 860...1060 гПа
- Сила магнитного поля: 50мТ-250мТ
- Напряжение питания: 3,7 В от литий-полимерных аккумуляторов емкостью 1500 мА*ч
- **Примечание:** в качестве зарядного устройства используйте адаптер с выходным напряжением DC5-6В, током 1А, тип разъема USB «А» (например от мобильного телефона).
- Габариты в упаковке: 250x250x95см.
- Вес: 0,5 кг.
- ШК: 3004564030272

ВЕМ-505

массажер для глаз с тепловой и вибромассажной функциями

GÉZATONE



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



МОСКВА: (495) 120 10 80

РЕГИОНЫ РФ: 8 800 500 95 94 (звонок бесплатный)



www.sozv.ru



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>

