



# Bio Sonic 770

аппарат для  
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЧИСТКИ  
кожи лица

- Глубокое, деликатное и эффективное очищение кожи
- Омолаживающий массаж кожи на клеточном уровне
- Разглаживание морщин, повышение тонуса и упругости кожи лица

## GÉZATONE

Арт. 1301194



# ВIO SONIC 770 ПРИБОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Одной из самых востребованных процедур в косметологии, на сегодняшний день является УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЧИСТКА ЛИЦА, или УЗ-пилинг. Ультразвук позволяет не только хорошо очистить кожу, не травмируя её, но эффективно увлажнить кожу.

Французская компания Gezatone предлагает прибор Bio Sonic 770 для проведения УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ПРОЦЕДУР в домашних условиях.

Прибор совмещает ДВЕ МЕТОДИКИ для сохранения молодости красоты и здоровья Вашей кожи.

### УЗ-ПИЛИНГ

- Глубоко очищает кожу
- Отшелушивает ороговевшие частицы
- Нормализует работу сальных желез
- Сужает поры
- Выравнивает тон кожи
- Устраняет пигментные пятна

### ФОНОФОРЕЗ

- Улучшает внешний вид кожи
- Глубоко увлажняет
- Проводит в глубокие слои кожи активные ингредиенты косметики
- Разглаживает морщины
- Снимает отеки
- Придает коже упругость и эластичность

# ВІО SONIC 770 ПРИБОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

## ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Жирная кожа с расширенными порами
- Увядающая кожа со сниженным тонусом
- Наличие ороговевших частичек
- Комедоны, черные точки, сальные пробки
- Акне, прыщи, воспаления
- Обезвоженная кожа
- Шелушение
- Тусклый цвет лица
- Пигментация
- Морщины
- Рубцы, постакне



# ВІО SONIC 770 ПРИБОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБОРОМ

---



Режим  
непрерывной волны  
с высокой  
интенсивностью



Режим  
непрерывной волны  
с низкой  
интенсивностью



Кнопки  
выбора режима



Кнопка включения/  
выкл. прибора



# ВIO SONIC 770 ПРИБОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

## ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

---



Перед началом процедуры умойтесь теплой водой.

**Примечание.** Для достижения наилучших результатов проводите процедуру после ванны или душа. Мы рекомендуем от 2 до 3 процедур в неделю.



Включите прибор. Выберите уровень интенсивности. Рекомендуем начинать процедуры с низкой интенсивности. Данный режим выбирается автоматически при включении прибора.



Для проведения процедуры необходимо нанести на лицо специальный гель по типу кожи, который обеспечивает равномерное проведение волнообразных колебаний, делает очищение более эффективным.



Время обработки кожи на данном этапе составляет 7-10 минут. При этом лопатку удерживаем под углом в 45° градусов относительно поверхности кожи и плавно перемещаем с легким нажатием от периферии к центру по массажным линиям.

# ВІО SONIC 770 ПРИБОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

## СОВЕТЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОЧИЩЕНИЯ

---



Двигайтесь от шеи вверх по лицу, прорабатывая прибором обе стороны лица по горизонтали. Обрабатывайте области лица как показано на рисунке.



Двигайтесь от шеи вверх по лицу, действуя прибором вертикально. Такое направление движений стимулирует естественный лимфатический дренаж организма.



Для очищения зоны вокруг носа используйте искривленный угол лезвия.



Используйте вырезанную среднюю часть лезвия, чтобы очистить область подбородка под нижней губой вертикальными короткими движениями.



Для работы вокруг бровей выберите низкую интенсивность. Избегайте деликатную область вокруг глаз.



# ВІО SONIC 770 ПРИБОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

## ВЫБОР РЕЖИМА ФОНОФОРЕЗА



Нанесите на лицо сыворотку или концентрат по типу кожи. Удерживайте устройство так, чтобы лезвие плотно прилегало к вашей коже.



Включите прибор. Выберите уровень интенсивности. Рекомендуем начинать с низкой интенсивности, повысить интенсивность можно двойным нажатием. Индикатор загорится голубым.



Лопатку располагаем плоской стороной параллельно поверхности кожи. Для наилучших результатов перемещайте лопатку медленно.



Процедура проводится по массажным линиям от центра к периферии плавными скользящими движениями с легким нажимом.



Продолжайте движение вверх по лицу от подбородка до линии роста волос. Время обработки 5-6 минут до того момента, пока все средство не впитается. После проведения процедуры, выключите прибор.  
Примечание: прибор отключается автоматически через 10 минут.

# ВІО SONIC 770 ПРИБОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

## РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

### УЗ-ПИЛИНГ

великолепно очищает кожу от омертвевших клеток и излишков кожного сала. Благодаря такому очищению кожа становится более гладкой, улучшаются процессы естественного дыхания, уменьшается количество пигментных пятен и веснушек, разглаживаются морщинки.

### ФОНОФОРЕЗ

способствует проведению в глубокие слои кожи специальных косметических средств, имеющих в своем составе укрепляющие и омолаживающие активные компоненты. Параллельно происходит микромассаж кожи который, улучшает кровообращение и лимфоток, стимулирует выработку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты

- Кожа станет более гладкой и чистой
- Исчезнут черные точки и угревая сыпь
- Веснушки и пигментация на лице осветлятся
- Мелкие шрамы, пятна и рубцы постакне станут менее заметными
- Улучшится состояние кожи и цвет лица
- Уйдут отеки и одутловатость
- Усилятся процессы дыхания кожи
- Кожа станет более увлажненной, упругой и эластичной
- Морщинки разгладятся
- Овал лица станет более четким



# СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

## ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЧИСТКИ



**Гель для уз пилинга  
«Ультраклин контроль»**  
для нормальной,  
смешанной и жирной кожи



**Гель для уз пилинга  
«Ультраклин сенс»**  
Для сухой, чувствительной  
и нормальной кожи

## ДЛЯ ФОНОФЕРЕЗА




**Сыворотка для лица  
с коллагеном**  
Beauty Style, 50 мл  
Артикул - 4506003



**Сыворотка для лица  
с гиалуроновой кислотой**  
Beauty Style, 12 ампул x 5 мл  
Артикул - 4505010



**Три вида  
концентратов для лица**  
Beauty Style, 8 ампул x 3 мл

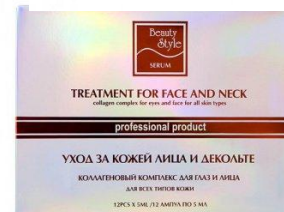

**Широкий выбор  
Сывороток для лица**  
Beauty Style, 5 мл x 12 шт

# ВІО SONIC 770 ПРИБОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

---

- Нарушения сердечного ритма (аритмии), носящие приступообразный характер (мерцательная аритмия, пароксизмальная тахикардия, групповая экстрасистолия)
- Недостаточность кровообращения свыше II Б степени
- Болезни крови, тромбофлебиты
- Ношение электрокардиостимулятора или других электронных имплантатов
- Онкологические заболевания кожи
- Нарушение целостности кожных покровов – раны, ссадины, трофические язвы
- Острые воспалительные и гнойные процессы
- Нарушения кожной чувствительности в результате травмы или заболевания нервов
- Психические расстройства
- Период беременности
- Наличие имплантатов, располагающихся под кожей или в мышцах (золотые нити, металлические послеоперационные скобки), не распространяется на зубные коронки, штифты и брекеты
- Плохое самочувствие (рекомендуется перенести проведение процедуры)
- Нельзя проводить процедуры с помощью аппарата на следующих зонах:  
Глаза. Область над сердцем и щитовидной железой. Половые органы  
Над силиконовыми имплантатами, областях с гелевой контурной пластикой

# ВІО SONIC 770 ПРИБОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

## ВЫГОДЫ ОТ ПРИОБРЕТЕНИЯ

---

- **ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ И ВРЕМЕНИ** – нет необходимости регулярного посещения салонов красоты - можно получить потрясающие результаты не выходя из дома!
- **РАБОТАЕТ ОТ АККУМУЛЯТОРА**, его удобно всюду брать с собой.
- **ДВЕ ФУНКЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ** – уз-пилинг + фонофорез позволяют не только очистить кожу, но и разгладить морщины, улучшить питание и увлажнение, повысить тонус кожи.
- **ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ** для очищения и противодействия возрастным изменениям кожи лица, шеи и декольте.
- **ДВА РЕЖИМА ИНТЕНСИВНОСТИ** позволяют проводить процедуры для кожи разных типов и возрастов.
- **ПРОСТОТА, УДОБСТВО И АБСОЛЮТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ** использования.
- **ВЫ ВЫГЛЯДИТЕ МОЛОЖЕ**, а кожа гораздо более ухоженная, как после дорогих процедур в салонах!

# ВІО SONIC 770 ПРИБОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

---

**ЧАСТОТА КОЛЕБАНИЙ** 23 кГц

**ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ** не более 0.6 и 0.8 Вт/см<sup>2</sup>

**ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ** аккумулятор 3.7 В / 800 мАч

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО** DC 5. В, 1,0 А

**ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР** +15...38°C

**ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ** не более 85%

**РАЗМЕРЫ (В УПАКОВКЕ)** 250x180x60

**ВЕС (С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ И УПАКОВКОЙ)** 450 г

# GÉZATONE



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

**МОСКВА: (495) 120 10 80**

**РЕГИОНЫ РФ: 8 800 500 95 94 (звонок бесплатный)**

[www.sozv.ru](http://www.sozv.ru)



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>