

GEZA *tone*

ПРИБОР ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ

ДАРСОНВАЛЬ



ДАРСОНВАЛЬ - ВАШ СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР!

СЕРИЯ BIOLIFT4, МОДЕЛЬ 202S

ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

ДАРСОНВАЛЬ позволяет решать большое количество проблем и косметических недостатков кожи лица, тела и волос и может использоваться всеми членами семьи:

- Лечение воспалений, прыщей и угревой сыпи
- Избавление от отеков, расширенных пор и жирной кожи
- Улучшение внешнего вида и цвета кожи лица
- Противодействие возрастным изменениям и тонизация кожи
- Разглаживание мелких морщин в зоне декольте
- Противодействие облысению и стимуляция роста волос
- Устранение целлюлита
- Заживление ран
- Противодействие варикозному расширению вен, улучшение периферического кровоснабжения

ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ

МЕТОДИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ



ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ - это воздействие на кожу высокочастотными переменными токами, которые имеют высокое напряжение, частоту колебаний и малую силу. Импульсы тока воздействуют на кожу через стеклянный электрод, заполненный проводящим газом. При контакте с кожей легкие микроразряды оказывают стимулирующее действие на кровообращение, активизируют обменные процессы, стимулируют лимфодренаж. Образование озона из кислорода воздуха оказывает мощное бактерицидное действие. Интенсивность разряда можно изменять в пределах от «тихого» до искрового.

Терапевтическое влияние дарсонвализации проявляется:

- БОЛЕУТОЛЯЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ
- ПРОТИВОЗУДНЫМ ДЕЙСТВИЕМ
- УЛУЧШЕНИЕМ КРОВООБРАЩЕНИЯ
- ПОВЫШЕНИЕМ ТРОФИКИ ТКАНЕЙ В МЕСТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
- НЕЗАМЕНИМ ДЛЯ БОРЬБЫ С ВОСПАЛЕНИЯМИ И УГРЕВОЙ СЫПЬЮ

Эффективность доказана и не имеет ограничений для пациентов любого возраста и пола.

ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ


ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ



В 1891 году французский физиолог и физик Жак Арсен Д'Арсонваль обнаружил физиотерапевтическое действие высокочастотных импульсных токов на кожные заболевания (сегодня это называется токами Дарсонваля).

Учёный предлагал лечить электричеством широкий спектр болезней — от кожных раздражений и мигрени до анемии и радикулита.

Токи Дарсонваля более 100 лет активно применяются в косметологии, и признаны одним из наиболее эффективным методов борьбы с различными косметическими недостатками и проблемами кожи.

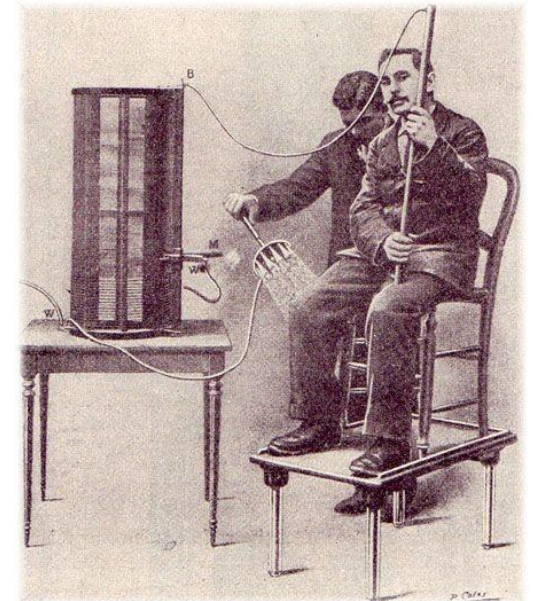

ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ



ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ ЛИЦА, ШЕИ, ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ

- жирная и проблемная кожа, гнойничковые поражения
- расширенные поры, акне
- мелкие морщины, первые признаки увядания кожи
- нездоровый цвет лица, морщинки в зоне декольте



ВОЗДЕЙСТВИЕ НА УЧАСТКИ ТЕЛА

- все типы и стадии целлюлита
- отечность ног
- профилактика варикозной болезни вен нижних конечностей
- сосудистая сетка на ногах



ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ

- профилактика всех разновидностей облысения
- противодействие выпадению волос
- укрепление луковиц волос
- стимуляция процессов роста волос

ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ



ДАРСОНВАЛИЗАЦИЮ МОЖНО ПРОВОДИТЬ КОНТАКТНО И ДИСТАНЦИОННО.

При **контактной методике** электрод прикладывают к коже и легкими без нажима движениями перемещают, не отрывая от поверхности кожи. При контакте с кожей легкие микроразряды оказывают стимулирующее действие на кровообращение, активизируют обменные процессы, повышают тонус венозной сосудистой стенки, стимулируют лимфодренаж.



При **дистанционной методике** электрод размещают над местом воздействия на расстоянии 0,5—2 см, или плавно водят по массажным линиям, что обеспечивает образование искрового разряда. Дистанционная методика эффективна для воздействия на проблемную кожу, с воспаленными элементами, усиливается бактерицидным действием озона.

ДАРСОНВАЛЬ Biolift4 BT202S


НАСАДКИ И ИХ НАЗНАЧЕНИЯ

НАСАДКА – ГРИБОК является универсальной насадкой, которая может быть использована для процедур как по лицу, так и по телу, применяется для нормализации состояния жирной кожи, для профилактики варикоза и коррекции целлюлита.

ТОЧЕЧНАЯ НАСАДКА – КАПЕЛЬКА идеальна для «прижигания» отдельных воспаленных элементов и наиболее часто используется для воздействия на прыщики и герпес, локального воздействия на небольшие участки кожи.

НАСАДКА - ЛЕПЕСТОК используется для проведения омолаживающих процедур, для обработки проблемной кожи, для процедур по телу.

НАСАДКА - ГРЕБЕНЬ выполнена в форме расчески специально для воздействия на волосистую часть головы, для предотвращения выпадения волос, нормализации сальной секреции и улучшения состояния и роста волос.

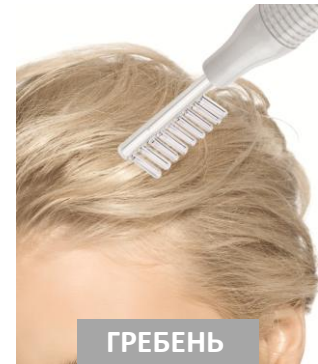

ДАРСОНВАЛЬ Biolift4 BT202S

ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛЕЙ GEZATONE

ВЫСОКИЕ» ТЕХНОЛОГИИ И НАДЕЖНОСТЬ

В конструкции приборов производитель применил современные технологии в производстве катушек, и контроль качества сборки на каждом этапе. Эти технологии делают аппараты Дарсонваль Gezatone надежными и долговечными.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ДИЗАЙН И УПАКОВКА

В аппарате применены более дорогие материалы: пластиковый корпус, упаковка, внешний вид, эргономика, что доставляет дополнительное эстетическое удовольствие пользователю от его использования.

КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОДНЫХ НАСАДОК

Эффективность аппаратов дарсонваль зависит от того, насколько производитель создал внутри электродов вакуум. Процедура эта достаточно сложная и дорогая. В аппаратах дарсонваль Gezatone производитель использует высокотехнологичную производственную линию по глубокой откачке воздуха из электродов.

РЕПУТАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Аппараты дарсонваль от Gezatone являются на сегодняшний день, пожалуй, лучшими. Огромное количество положительных отзывов и благодарностей наших клиентов – лучшее тому подтверждение.

ДАРСОНВАЛЬ Biolift4 BT202S

НОВЕЙШАЯ РАЗРАБОТКА КОМПАНИИ GEZATON - BIOLIFT4 BT 202S СОЗДАННЫЙ С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ ДОСТИЖЕНИЙ НАУЧНОЙ МЫСЛИ

Главные отличительные особенности скрыты внутри.

- В аппарате BT 202S используется улучшенный дроссель (катушка) для достижения большей выходной мощности.
- Большой ресурс аппарата делает его более долговечным.
- Улучшенные материалы корпуса позволяют увеличить срок службы аппарата и гарантировать абсолютную безопасность.
- Насадки заполнены разреженной смесью инертных газов. Неоном или Ксеноном.
- Насадки «грибок, лепесток и расческа» – заполнены неоном и при контакте с кожей светится красным цветом.
- Насадка «капля» заполнена ксеноном – цвет фиолетовый.



Сочетание этих и других факторов делает дарсонваль BT 202S более дорогим в производстве – и следовательно выше по цене.

КАПЕЛЬКА



● Цвет заряда

ЛЕПЕСТОК



● Цвет заряда

ГРЕБЕНЬ



● Цвет заряда

ГРИБОК




● Цвет заряда


ДАРСОНВАЛЬ Biolift4 BT202S

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ


По многочисленным отзывам наших клиентов мы отметили, что подавляющее большинство покупателей сочли дарсонваль Biolift4 BT202S эффективным прибором для домашнего применения всей семьей.

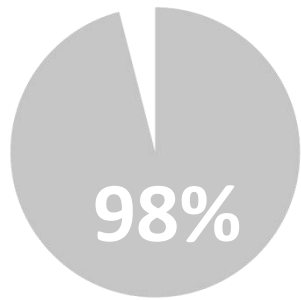

Отметили улучшения состояния кожи при акне и воспалениях.

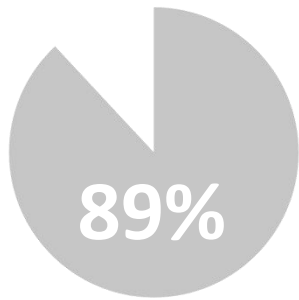


Сократилось выпадение волос, исчезли залысины, волосы стали расти быстрее.

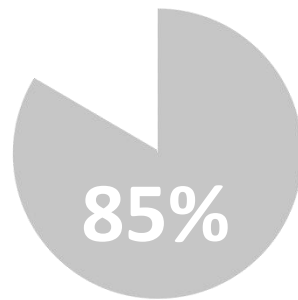

Избавились от проблем варикозного расширения вен и болей в ногах.



Регулярно пользуются всей семьей и каждый находит свою зону применения.

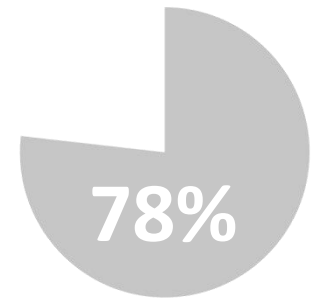

Самый лучший подарок для проявления заботы о самочувствии пожилых людей.

ДАРСОНВАЛЬ Biolift4 BT202S

ВЫГОДЫ ОТ ПРИОБРЕТЕНИЯ

Универсальный массажер с 4-мя насадками для всей семьи – быстрое и эффективное избавление от косметических недостатков, возрастных изменений лица и тела, противодействие выпадению волос, снятие болевых синдромов – это незаменимый помощник в каждом доме!

1

Выбрав прибор ДАРСОНВАЛЬ BIOLIFT4 BT 202S, Вы станете обладателем НАСТОЯЩЕГО СЕМЕЙНОГО ДОКТОРА, который придёт на помощь в любое время к каждому члену Вашей семьи.

2

Миллионы людей уже сделали свой выбор - пришло время и Вам проявить заботу О ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТЕ близких людей, не забывая о себе.

3

КАЧЕСТВЕННЫЙ, эффективный, НАДЕЖНЫЙ и безопасный прибор будет служить Вам долгие годы.

4

ПОРАДУЙТЕ себя и своих близких подарком, за который Вам скажут спасибо и не раз вспомнят ДОБРЫМ СЛОВОМ.

ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ

6 ПРИЧИН КУПИТЬ ДАРСОНВАЛЬ VIOLIFT4 202S В «СОЗВЕЗДИИ КРАСОТЫ»



КОНСУЛЬТАЦИИ

Доброжелательные продавцы подробно расскажут и продемонстрируют прибор.



БЕЗОПАСНО

Все приборы имеют гарантированное качество подтвержденное сертификатами.



УДОБНО

Можно заказать прибор с доставкой в любую точку России.



ДИСТАНЦИОННО

Специалисты «горячей линии» ответят на любые вопросы по применению.



ПРОФЕССИОНАЛЬНО

Есть возможность протестировать прибор, посетив ДЕНЬ КРАСОТЫ.



ВЫГОДНО

Каждый покупатель получает 10% бонус на карту для оплаты последующих покупок.

ДАРСОНВАЛЬ Biolift4 BT202S

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Процедуры дарсонвализации проводятся по чистой сухой коже без применения косметических средств.

- Перед процедурой по лицу или по телу необходимо кожу хорошо очистить, подбирая средства по типу кожи.
- В процедурах по уходу за кожей головы и волосами необходимо вымыть голову.
- В завершении процедур и в промежутках между процедурами для поддержания эффекта рекомендуется использовать косметические средства подобранные в соответствии с потребностями кожи как для лица так и для волос и тела.

В таблице ниже представлены некоторые рекомендации по подбору средств для домашнего ухода.

ДАРСОНВАЛЬ Biolift4 BT202S

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЗОНА ВОЗДЕЙСТВИЯ	ОЧИЩЕНИЕ. ПОДГОТОВКА К ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ		ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ УХОД	
ДЛЯ ЛИЦА жирная, проблемная кожа	Очищающий гель «Контроль» Beauty Style 150 мл.		Корректирующая сыворотка «Контроль» Beauty Style 30 мл.	
ДЛЯ ЛИЦА возрастные изменения	Крем - пилинг со стволовыми клетками арганы, Beauty Style		Восстанавливающая смягчающая маска с биоцеллюлозой	
ДЛЯ ВОЛОС выпадение, улучшение роста волос	Шампунь против выпадения волос с биотином KATIVA		Концентрат против выпадения волос с биотином в ампулах KATIVA	
ДЛЯ ТЕЛА антицеллюлит, профилактика варикоза	Роскошный скраб для тела с цветами апельсина или роскошный скраб для тела с дамасской розой		Комплекс антицеллюлитных эфирных масел для коррекции фигуры	

ДАРСОНВАЛЬ Biolift4 BT202S

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Злокачественные онкологические заболевания.
- Наличие доброкачественных онкологических заболеваний в зоне воздействия.
- Заболевания с нарушениями сердечного ритма, недостаточностью кровообращения свыше 2Б стадии, ношение кардиостимулятора.
- Беременность.
- Эпилепсия.
- Нарушения кожной чувствительности в зоне воздействия.
- Индивидуальная непереносимость электротоков.
- Выраженные формы купероза и телеангиэктазии (сетка расширенных красных сосудов на лице).
- Гирсутизм (нежелательный избыточный рост волос на лице).

ДАРСОНВАЛЬ Biolift4 BT202S

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ

импульсный массажер Gezatone Biolift4 BT202S

АРТИКУЛ - 1303103

ФОРМА ВЫХОДНОГО СИГНАЛА

импульсный с высокочастотным заполнением

ЧАСТОТА СЛЕДОВАНИЯ ИМПУЛЬСОВ

100Гц

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСОВ

60 мкс

ЧАСТОТА ВЧ ЗАПОЛНЕНИЯ

120 кГц

СРЕДНИЙ ВЫХОДНОЙ ТОК, НЕ БОЛЕЕ

200 мкА

ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

не более 60 кВ

РЕЖИМ РАБОТЫ

не продолжительный

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

сеть ас 220 в, 50Гц

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

не более 28 Вт



GÉZATONE



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

МОСКВА: (495) 120 10 80

РЕГИОНЫ РФ: 8 800 500 95 94 (звонок бесплатный)

www.sozv.ru



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>