



GEZATONE

ФОТОЭПИЛЯТОР

IPL ICE300

КОМФОРТНОЕ УДАЛЕНИЕ  
НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ВОЛОС

РЕЖИМ «ЛЕДЯНОЕ КАСАНИЕ»

300000 ВСПЫШЕК

5 УРОВНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ  
СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



## РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ



ФОТОЭПИЛЯТОР **IPL ICE300** С ФУНКЦИЕЙ «ЛЕДЯНОГО КАСАНИЯ» ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ КОЖИ ВО ВРЕМЯ ЭПИЛЯЦИИ, ПОМОЖЕТ КОМФОРТНО УДАЛИТЬ ВОЛОСЫ НА ЛЮБОМ УЧАСТКЕ ЛИЦА И ТЕЛА БЫСТРО, С КОМФОРТОМ И ЭФФЕКТИВНО. ОСТАНУТСЯ ДОВОЛЬНЫ ДАЖЕ САМЫЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ!



ОЧЕНЬ  
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ  
КОЖА



КОЖА НЕГАТИВНО  
РЕАГИРУЕТ НА БРИТЬЕ  
И КРЕМЫ ДЛЯ  
ДЕПИЛЯЦИИ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ВОСКА БОЛЕЗНЕННО  
И ВЫЗЫВАЕТ  
РАЗДРАЖЕНИЕ



ВОЛОСЫ ВРАСТАЮТ  
ПОСЛЕ  
ТРАДИЦИОННЫХ  
МЕТОДОВ ДЕПИЛЯЦИИ



УДАЛЕНИЕ ВОЛОС  
ЭПИЛЯТОРОМ  
ОЧЕНЬ  
БОЛЕЗНЕННО



# ФОТОЭПИЛЯТОР IPL ICE300

КОМФОРТНОЕ УДАЛЕНИЕ ВОЛОС

# GÉZATONE

## БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ УДАЛЕНИЕ ВОЛОС

.....


РУКИ ~ 3 МИНУТЫ



ПОДМЫШКИ ~ 3 МИНУТЫ



СПИНА ~ 12 МИНУТ

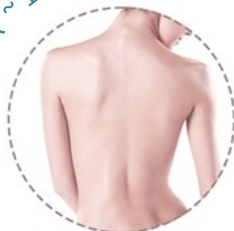

ОБЛАСТЬ НАД ГУБОЙ 1 МИНУТА



НОГИ ~ 10 МИНУТ



БИКИНИ ~ 2 МИНУТЫ



Арт. 1301239



сеть фирменных магазинов


СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ




## КАК ЭТО РАБОТАЕТ




**ФОТОЭПИЛЯЦИЯ** - УДАЛЕНИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ВОЛОС ЗА СЧЕТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНТЕНСИВНОГО ИМПУЛЬСНОГО СВЕТА (IPL). ВСПЫШКИ ОПРЕДЕЛЁННОЙ ДЛИНЫ, ЧАСТОТЫ И МОЩНОСТИ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА ВОЛОСКИ И ВОЛОСЯНЫЕ Фолликулы.

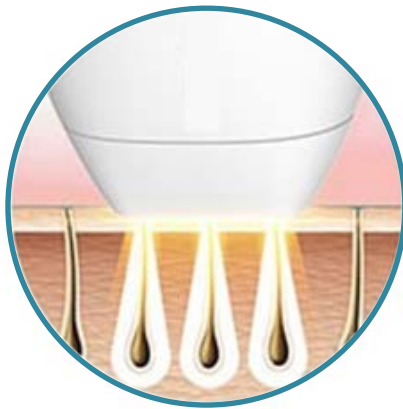

ЭНЕРГИЯ СВЕТОВЫХ ИМПУЛЬСОВ ПОГЛОЩАЕТСЯ МЕЛАНИНОМ ВОЛОСА И ПРЕОБРАЗУЕТСЯ В ТЕПЛО. ПО СТЕРЖНЮ ВОЛОСА ТЕПЛО ПЕРЕДАЕТСЯ В ВОЛОСЯНОЙ Фолликул.

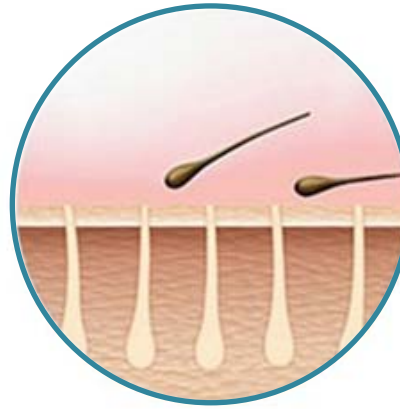

ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ОБЛАСТИ ВОЛОСЯНОГО Фолликула ВЫЗЫВАЕТ ЕГО РАЗРУШЕНИЕ И ГИБЕЛЬ ВОЛОСА.

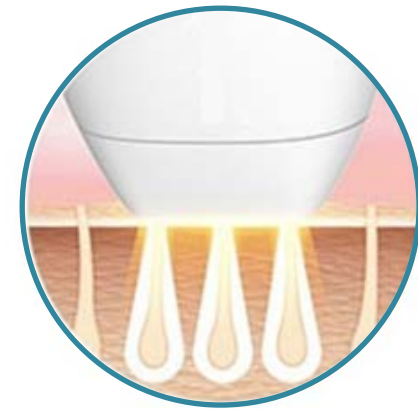

ПОВТОРНЫЕ СЕАНСЫ ПОЗВОЛЯЮТ ОБРАБОТАТЬ ВОЛОСЫ, КОТОРЫЕ НЕ ПОДВЕГЛИСЬ ВОЗДЕЙСТВИЮ И НАРУШИТЬ ЦИКЛ РОСТА ДРУГИХ ВОЛОС.






## КАК ЭТО РАБОТАЕТ

.....

## ПОЧЕМУ НУЖНЫ ПОВТОРНЫЕ СЕАНСЫ

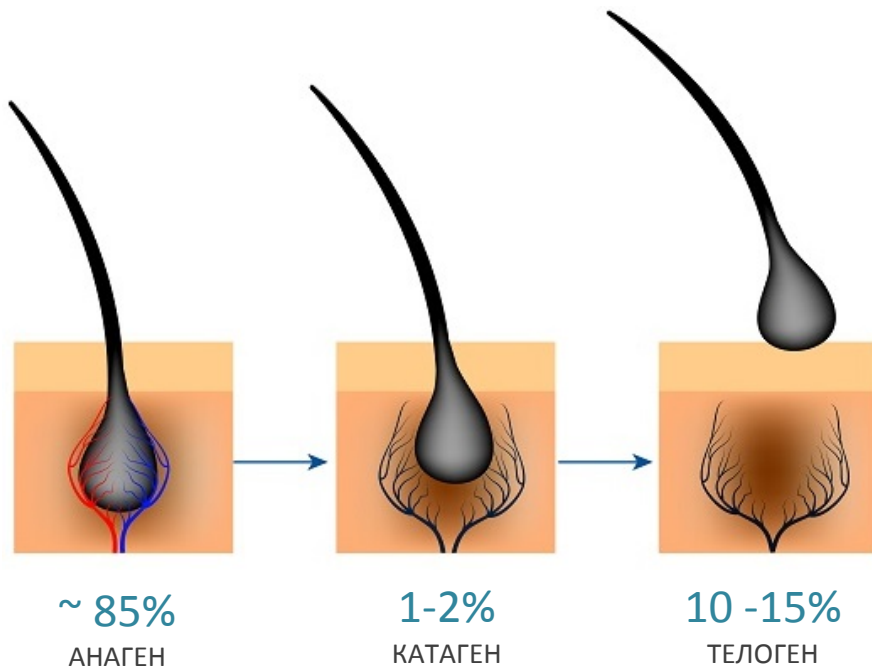

- **ФОТОЭПИЛЯЦИЯ** ЭФФЕКТИВНА В ОТНОШЕНИИ ВОЛОС, НАХОДЯЩИХСЯ В АКТИВНОЙ ФАЗЕ РОСТА (АНАГЕН), И НЕ ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА ВОЛОСЫ В ПЕРЕХОДНОЙ ФАЗЕ И ФАЗЕ ПОКОЯ, ПОЭТОМУ НЕОБХОДИМО ПРОВЕДЕНИЕ ПОВТОРНЫХ СЕАНСОВ.
- ВОЛОСКИ, НЕ ДОСТИГШИЕ ФАЗЫ АНАГЕНА, ОСТАЮТСЯ НЕТРОНУТЫМИ, ТАК КАК СВЕТОВЫЕ ИМПУЛЬСЫ НЕ ДОСТИГАЮТ ВОЛОСЯНОГО ФОЛЛИКУЛА.
- ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ВОЛОСЫ, НЕ ПОДВЕРГШИЕСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ, ВЫРАСТАЮТ И ВОЗНИКАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ В ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ.





## КТО МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

.....

ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН С ФОТОТИПАМИ I – IV

ДЛЯ V и VI ФОТОТИПОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО АППАРАТА ПРОТИВОПОКАЗАНО.



ПРИБОР НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СЕДЫХ, ОЧЕНЬ СВЕТЛЫХ И РЫЖИХ ВОЛОС ПО ПРИЧИНЕ НЕДОСТАТКА МЕЛАНИНА.





## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



УДОБНО БРАТЬ С СОБОЙ

Арт. 1301239

- **УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:** ПРИБОРОМ МОГУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ, КАК ЖЕНЩИНЫ, ТАК И МУЖЧИНЫ.
- **ЭФФЕКТИВНОСТЬ IPL** МЕТОДА ПОДТВЕРЖДЕНА МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ ПРИМЕНЕНИЯ
- **БЕЗОПАСНОСТЬ:** НАЛИЧИЕ ВСТРОЕННОГО **ДАТЧИКА КОНТАКТА С КОЖЕЙ**
- **БЕЗБОЛЕЗНЕННОСТЬ:** РЕЖИМ «ЛЕДЯНОГО КАСАНИЯ», ОХЛАЖДЕНИЕ +10 С
- МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ **ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА**
- **ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ:** ПРОЦЕДУРА ЗАНИМАЕТ НЕСКОЛЬКО МИНУТ
- РЕСУРС ЛАМПЫ **300000** ВСПЫШЕК
- **5 УРОВНЕЙ** РЕГУЛИРОВКИ ИНТЕНСИВНОСТИ ВСПЫШКИ
- ПЛОЩАДЬ ОКНА **2,7 см<sup>2</sup>**
- **УДОБСТВО:** МОЖНО БРАТЬ С СОБОЙ
- **НЕ ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ** ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.



ТЕХНОЛОГИЯ  
IPL



ДЛЯ ЛИЦА  
И ТЕЛА




2 РЕЖИМА:  
РУЧНОЙ И  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ



300000  
ВСПЫШЕК



РЕЖИМ  
«ЛЕДЯНОГО  
КАСАНИЯ»

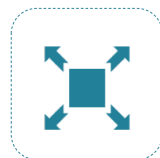

ПЛОЩАДЬ  
ОКНА  
2,7 см<sup>2</sup>



5 УРОВНЕЙ  
ИНТЕНСИВНОСТИ  
ВОЗДЕЙСТВИЯ



СЕНСОРНЫЙ  
ДАТЧИК  
КОНТАКТА



ДЛЯ МУЖЧИН  
И ЖЕНЩИН





## 5 УРОВНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ВСПЫШКИ



УРОВНИ 1, 2, 3

МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  
ДЛЯ ФОТОТИПОВ I, II, III, IV



УРОВНИ 4 и 5

МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  
ТОЛЬКО ДЛЯ ФОТОТИПОВ I и II





## РЕЖИМ «ЛЕДЯНОГО КАСАНИЯ»

СНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ до + 10°C

ЛИЦО



ЗОНА БИКИНИ



ПОДМЫШКИ



- ПРИЯТНЫЙ ХОЛОДОК ПОСЛЕ ЭПИЛЯЦИИ: МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ
- РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕЛИКАТНЫХ ОБЛАСТЕЙ И УЧАСТКОВ С НЕЖНОЙ КОЖЕЙ.
- ДЛЯ БЫСТРОГО УСТРАНЕНИЯ ДИСКОМФОРТНЫХ ОЩУЩЕНИЙ НА КОЖЕ





## 2 РЕЖИМА



### АВТОМАТИЧЕСКИЙ

РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВСПЫШЕК



ПРИ ПОЛНОМ КОНТАКТЕ С КОЖЕЙ И НЕПРЕРЫВНОМ ДВИЖЕНИИ, ИМПУЛЬСЫ ГЕНЕРИРУЮТСЯ С РАВНЫМИ ВРЕМЕННЫМИ ПРОМЕЖУТКАМИ. ОПТИМАЛЕН ДЛЯ ОБРАБОТКИ БОЛЬШИХ УЧАСТКОВ.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ОБЛАСТЕЙ:

РУКИ



СПИНА



НОГИ



### «РУЧНОЙ»

РЕЖИМ ТОЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ



ПРИ ПОЛНОМ КОНТАКТЕ С КОЖЕЙ И НАЖАТИИ КНОПКИ ГЕНЕРИРУЕТСЯ ОДИНОЧНЫЙ ИМПУЛЬС. ЗАТЕМ ПРИБОР ПЕРЕСТАВЛЯЕТСЯ НА ДРУГУЮ ОБЛАСТЬ И ГЕНЕРИРУЕТСЯ НОВЫЙ ИМПУЛЬС

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ОБЛАСТЕЙ:

ПОДМЫШКИ



ЛИЦО\*



БИКИНИ



\*на лице эпилятор используется только в области ниже скулы



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



# ФОТОЭПИЛЯТОР IPL ICE300

КОМФОРТНОЕ УДАЛЕНИЕ ВОЛОС

# GÉZATONE

## РЕЗУЛЬТАТЫ



БЕЗ БОЛИ И  
НЕПРИЯТНЫХ  
ОЩУЩЕНИЙ



ЭФФЕКТИВНО



БЫСТРО



С  
КОМФОРТОМ



БЕЗОПАСНО



НА ЛЮБЫХ  
УЧАСТКАХ




сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



## ВНЕШНИЙ ВИД

.....

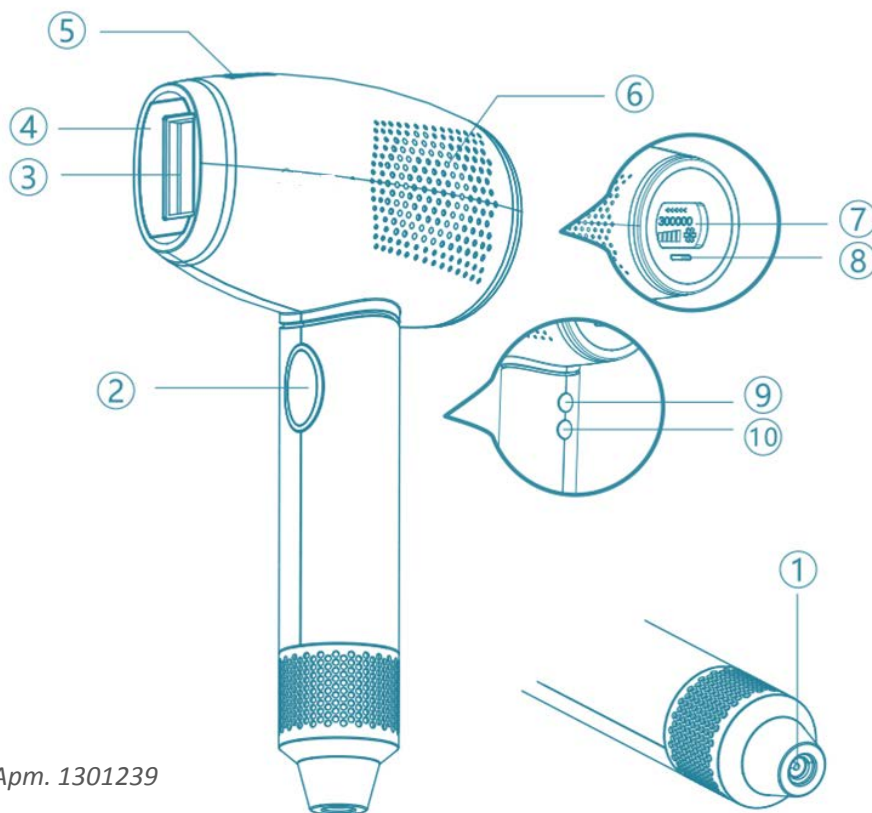

- 1 ГНЕЗДО ПИТАНИЯ
- 2 КНОПКА ГЕНЕРАЦИИ ВСПЫШКИ
- 3 ОКНО ЛАМПЫ
- 4 ПАНЕЛЬ ОХЛАЖДЕНИЯ (В РЕЖИМЕ «ЛЕДЯНОЕ КАСАНИЕ»)
- 5 ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ВЫХОДА ВОЗДУХА
- 6 ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ЗАБОРА ВОЗДУХА
- 7 ИНДИКАТОР УРОВНЯ МОЩНОСТИ
- 8 СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР
- 9 КНОПКА ICE – ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХЛАЖДЕНИЯ
- 10 КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРА / ВЫБОРА УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ

Арт. 1301239



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

.....

Арт. 1301239



- БЛОК ПИТАНИЯ:
- Вход:  $\approx 100-240$  В 50-60 Гц 1,5 А Выход: =12В 5А
- МОЩНОСТЬ ВСПЫШКИ: 2,5 – 5 Дж/см<sup>2</sup>
- РАЗМЕР ОКНА ЛАМПЫ: 0,9 см x 3 см (2,7 см<sup>2</sup>)
- ДЛИНА ВОЛНЫ: 475-1200 нм
- ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВСПЫШКИ: 500-800 мс
- РЕСУРС ЛАМПЫ: 300.000 вспышек
- ВЕС: 1,1 кг
- РАЗМЕР: 180x210x100 мм





## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- ВОЗРАСТ ДО 18 ЛЕТ
- ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ И ЛАКТАЦИИ
- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
- ЭПИЛЕПСИЯ, ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА
- АРИТМИИ, НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ СВЫШЕ II Б СТЕПЕНИ
- В ТЕЧЕНИЕ 8 НЕДЕЛЬ ПОСЛЕ ЛАЗЕРНОЙ ШЛИФОВКИ, ХИМИЧЕСКИХ ПИЛИНГОВ, А ТАКЖЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОСМЕТИЧЕСКИХ ИЛИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ АНА И ВНА КИСЛОТ, РЕТИНОИДОВ, ДРУГИХ КОМПОНЕНТОВ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПОВЫШАЮЩИХ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ.
- ПЕРИОД АКТИВНОГО ПОСЕЩЕНИЯ СОЛЯРИЯ ИЛИ ЗАГАРА НА СОЛНЦЕ
- НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ: ОЖОГИ, РАНЫ, ССАДИНЫ, ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ, СКЛОННОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ КЕЛОИДНЫХ РУБЦОВ
- ХРОНИЧЕСКИЕ ДЕРМАТИТЫ И ДЕРМАТОЗЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ, АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ НА КОЖЕ В МЕСТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
- ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ГНОЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ, АКНЕ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- ФОТОТИПЫ КОЖИ V И VI
- ПРИЕМ ДЕРМАТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ (НАПРИМЕР, РОАКУТАН)
- ТАТУИРОВКИ, РОДИМЫЕ ПЯТНА В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ
- ОСТРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ГРИПП, ОРВИ, ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА.







сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



Москва 8 (495) 120-10-80  
регионы РФ: 8 (800) 500-95-94  
(звонок бесплатный)



<http://www.sozv.ru/>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>