



GÉZATONE

ВАКУУМНЫЙ
МАССАЖЕР ДЛЯ ГУБ

VACU
SUPER LIPS

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ГУБ

КОРРЕКЦИЯ МОРЩИНОК

КОРРЕКЦИЯ ФОРМЫ ГУБ



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ПРОСТОЙ И БЕЗОПАСНЫЙ СПОСОБ УВЕЛИЧИТЬ ГУБЫ И ПРИДАТЬ ИМ КРАСИВУЮ ФОРМУ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАССАЖЕРА **GEZATONE VACU SUPER LIPS** ЯВЛЯЕТСЯ БЕЗОПАСНОЙ АЛЬТЕРНАТИВОЙ ИНЪЕКЦИОННОМУ УВЕЛИЧЕНИЮ ОБЪЕМА ГУБ И ПЛАСТИЧЕСКИМ ОПЕРАЦИЯМ.

С МИНИМАЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ, БЕЗ БОЛИ, ВЫ МОЖЕТЕ УВЕЛИЧИТЬ ГУБЫ И СКОРРЕКТИРОВАТЬ ИХ ФОРМУ, СОКРАТИТЬ МЕЛКИЕ МОРЩИНКИ ВОКРУГ РТА, А ТАКЖЕ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КОМПЛЕКСОВ ПО ПОВОДУ РАЗМЕРА И ФОРМЫ ГУБ.



ТОНКИЕ ГУБЫ
НЕДОСТАТОЧНЫЙ
ОБЪЕМ



МОРЩИНКИ
В ОБЛАСТИ
ВОКРУГ РТА



БЛЕДНЫЕ,
ТУСКЛЫЕ ГУБЫ,
НЕДОСТАТОК
«НАПОЛНЕННОСТИ»



НЕЧЕТКИЙ,
«РАЗМЫТЫЙ»
КОНТУР ГУБ



УГОЛКИ РТА
ОПУЩЕНЫ



ОСНОВНАЯ МЕТОДИКА

БЛАГОДАРЯ ПОПУЛЯРНОЙ И ПРОВЕРЕННОЙ ВРЕМЕНЕМ **МЕТОДИКЕ ВАКУУМА**, ПРИБОР VACU SUPER LIPS УЛУЧШАЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ, ПРИДАЕТ ГУБАМ ЧУВСТВЕННЫЙ ОБЪЕМ И ПОМОГАЕТ СКРЫТЬ МЕЛКИЕ НЕДОСТАТКИ, А ТАКЖЕ ДЕЛАЕТ ЦВЕТ ГУБ БОЛЕЕ НАСЫЩЕННЫМ И ЯРКИМ.



АКТИВИЗАЦИЯ
КРОВООБРАЩЕНИЯ



УВЕЛИЧЕНИЕ
ОБЪЕМА



КОРРЕКЦИЯ
МОРЩИНОК



ИЗМЕНЕНИЕ
ФОРМЫ ГУБ



СТИМУЛЯЦИЯ
СИНТЕЗА
КОЛЛАГЕНА



НАСЫЩЕНИЕ
ТКАНЕЙ
КИСЛОРОДОМ



УСКОРЕНИЕ
ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ



УСТРАНЕНИЕ
СПАЗМА МЫШЦ

арт. 1301274



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



ЭФФЕКТ
«ЯБЛОЧНЫХ» ГУБ

ЭФФЕКТ ПОЛНЫХ
ПУХЛЫХ ГУБ


- ПРИБОР ПОМОГАЕТ СКОРРЕКТИРОВАТЬ ФОРМУ, СДЕЛАТЬ ГУБЫ ЧУВСТВЕННЫМИ И ПОЛНЫМИ.
- СПОСОБСТВУЕТ РАЗГЛАЖИВАНИЮ МЕЛКИХ МОРЩИНОК
- ПРОЦЕДУРА **БЕЗБОЛЕЗНЕННА** В ОТЛИЧИЕ ОТ ИНЪЕКЦИЙ
- НАКОНЕЧНИК МАССАЖЕРА ВЫПОЛНЕН ИЗ **МЯГКОГО ПИЩЕВОГО СИЛИКОНА**, АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНОГО И НЕЙТРАЛЬНОГО.
- ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ СИЛИКОНОВОГО НАКОНЕЧНИКА ПОЛНОСТЬЮ ПОВТОРЯЕТ **АНАТОМИЧЕСКИЙ КОНТУР ГУБ**, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ НА ЗОНУ ОБРАБОТКИ С **МАКСИМАЛЬНЫМ КОМФОРТОМ** И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛНЫЙ ОХВАТ ОБЛАСТИ РТА.
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ **СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ** ПОЗВОЛЯЕТ ИЗМЕНЯТЬ ФОРМУ ГУБ.



БЕЗБОЛЕЗНЕННО
И БЕЗОПАСНО

2

2 ВАРИАНТА
ИЗМЕНЕНИЯ
ФОРМЫ

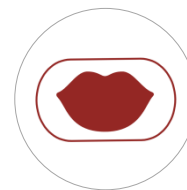

НАКОНЕЧНИК
ИЗ ПИЩЕВОГО
СИЛИКОНА



АНАТОМИЧЕСКАЯ
ФОРМА

3

ВИДИМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
ДО 3 ЧАСОВ

арт. 1301274





ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



- ДЕЙСТВИЕ ПРИБОРА ОСНОВАНО НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДИКИ ВАКУУМА
- ПРИБОР **РАБОТАЕТ ОТ АККУМУЛЯТОРА**, НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ИСКАТЬ РОЗЕТКУ.
- БЛАГОДАРЯ **3 УРОВНЯМ ИНТЕНСИВНОСТИ ВАКУУМА** МОЖНО ВЫБРАТЬ МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНЫЙ ВИД ВОЗДЕЙСТВИЯ.
- ПРОСТОТА **ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: НЕ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ.
- УПРАВЛЕНИЕ **ОДНОЙ КНОПКОЙ**.
- ЭРГОНОМИЧНАЯ ФОРМА НЕБОЛЬШОЙ ВЕС: **УДОБНО** ДЕРЖАТЬ В РУКЕ.
- ЭКОНОМИЯ **ВРЕМЕНИ**: ПРОЦЕДУРА ЗАНИМАЕТ, В СРЕДНЕМ, 1 – 2 МИНУТЫ



ВАКУУМНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ



ЦВЕТОВОЙ
ИНДИКАТОР
УРОВНЯ
ИНТЕНСИВНОСТИ




ТРИ УРОВНЯ
ИНТЕНСИВНОСТИ
ВАКУУМА




УМНЫЙ
ТАЙМЕР 5 МИНУТ



УДОБНО БРАТЬ
С СОБОЙ

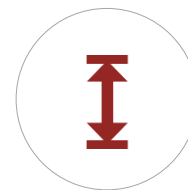

КОМПАКТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

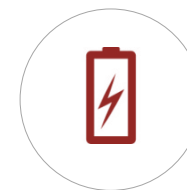

РАБОТАЕТ ОТ
АККУМУЛЯТОРА



КОМФОРТНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ





ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА





КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОЦЕДУР

Для усиления положительного действия и повышения эффективности, с прибором **VACU SUPER LIPS** рекомендуется использовать косметические препараты для ухода за кожей губ, как во время, так и после сеанса.

ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ,
CHRISTIAN
BRETON



481813 – 4,5 грамм

СЫВОРОТКА ДЛЯ ГУБ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ,
CHRISTIAN
BRETON



481810 – 15 мл


ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

УВЛАЖНЯЮЩАЯ
КОЛЛАГЕНОВАЯ
МАСКА ДЛЯ ГУБ,
BEAUTY STYLE



4515929K – 20 штук

КОЛЛАГЕНОВАЯ
УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА
ДЛЯ ГУБ "АКВА 24"
BEAUTY STYLE

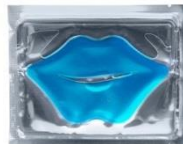

4515891 – 5 штук

КОЛЛАГЕНОВАЯ
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ МАСКА
ДЛЯ ГУБ СО СТВОЛОВЫМИ
КЛЕТКАМИ АРГАНЫ
BEAUTY STYLE



4515899 – 1 маска

КОЛЛАГЕНОВАЯ
СМЯГЧАЮЩАЯ МАСКА
ДЛЯ ГУБ "КОМФОРТ"
BEAUTY STYLE



4515886 – 5 штук

КРЕМ
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ
ОБЪЕМА ГУБ,
CHRISTIAN
BRETON




481811 – 15 мл



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАРЯДИТЕ ПРИБОР (ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ НЕ МЕНЕЕ 2,5 ЧАСОВ). НАНЕСИТЕ НА ГУБЫ БАЛЬЗАМ ИЛИ СЫВОРОТКУ В НЕБОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ, РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛИТЕ.

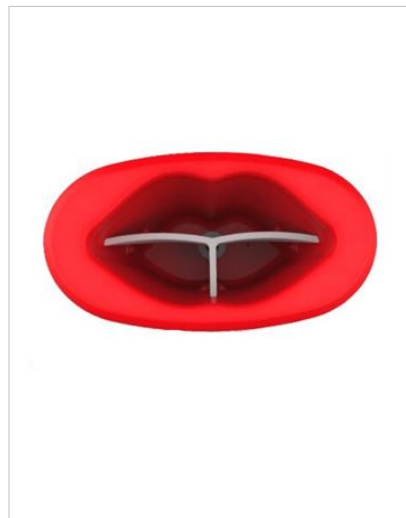

ПРИ ЖЕЛАНИИ МОЖНО УСТАНОВИТЬ ПЕРЕГОРОДКУ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ «ЯБЛОЧНЫЕ ГУБЫ».



ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ ОТ 1 ДО 5 МИНУТ.

ПРИЛОЖИТЕ ПРИБОР КО РТУ.



ВКЛЮЧИТЕ КНОПКОЙ

ПОВТОРНЫМ НАЖАТИЕМ НА ЭТУ ЖЕ КНОПКУ ВЫБЕРИТЕ ЖЕЛАЕМУЮ СИЛУ ВОЗДЕЙСТВИЯ. НАЧИНАТЬ РЕКОМЕНДУЕТСЯ С НИЗКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ВАКУУМА.



ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ С АППАРАТОМ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПАТЧИ ИЛИ МАСКУ ДЛЯ ГУБ. ПОМЕСТИТЬ МАСКУ НА ОБЛАСТЬ ГУБ, СЛЕГКА ПРИЖАТЬ. ВРЕМЯ ЭКСПОЗИЦИИ 20 -25 МИНУТ.



СИНИЙ
НИЗКАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ



БИРЮЗОВЫЙ
СРЕДНЯЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ



ЗЕЛЕНЫЙ
ВЫСОКАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ





РЕЗУЛЬТАТЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА ДАЕТ ВРЕМЕННЫЙ, НО ВИДИМЫЙ ЭФФЕКТ, НЕ НАНОСЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ.

ПОСЛЕ ОДНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЭФФЕКТ СОХРАНЯЕТСЯ ДО 3 ЧАСОВ.

- КОРРЕКЦИЯ ФОРМЫ ГУБ
- ГУБЫ СТАНОВЯТСЯ БОЛЕЕ ПУХЛЫМИ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ И СЕКСУАЛЬНЫМИ, СОХРАНЯЯ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВИД И КРАСОТУ.
- УМЕНЬШЕНИЕ МОРЩИНОК В ОБЛАСТИ РТА.
- ТОНКИЕ ГУБЫ СТАНОВЯТСЯ БОЛЕЕ ПОЛНЫМИ И ВЫРАЗИТЕЛЬНЫМИ.
- УЛУЧШАЕТСЯ ЦВЕТ ГУБ: БОЛЕЕ ЯРКИЕ И СОЧНЫЕ ГУБЫ ЗА СЧЕТ СТИМУЛЯЦИИ КРОВООБРАЩЕНИЯ.





ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ: В ОБЛАСТИ ГУБ И РТА. ТРЕЩИНЫ И ПОВРЕЖДЕНИЯ ГУБ, РАНКИ, ССАДИНЫ, ЯЗВЫ.
- ГЕРПЕС В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ, АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ В МЕСТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИБОРА, ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ГНОЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБЛАСТИ ГУБ.
- ДАННАЯ ПРОЦЕДУРА НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ПОВЫШЕННОЙ ХРУПКОСТЬЮ СОСУДОВ
- НАРУШЕНИЯ КОЖНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ (БОЛЕВОЙ И ТЕМПЕРАТУРНОЙ)
- ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, ЭПИЛЕПСИЯ
- САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
- НАЛИЧИЕ ИМПЛАНТАТОВ, РАСПОЛАГАЮЩИХСЯ ПОД КОЖЕЙ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИБОРОМ. НАЛИЧИЕ ПОДКОЖНЫХ СИЛИКОНОВЫХ ИМПЛАНТОВ, А ТАКЖЕ ФИЛЛЕРОВ В ОБЛАСТИ ГУБ.
- ОСТРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ГРИПП, ОРВИ, ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА.
- ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ШНУР
В КОМПЛЕКТЕ



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



арт. 1301274

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ПАРАМЕТРЫ АККУМУЛЯТОРА: 3,7 В, 500 МАЧ
- ПАРАМЕТРЫ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА: USB 5 В 1А (В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ)
- ТАЙМЕР АВТООТКЛЮЧЕНИЯ: 5 МИН
- ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 18Х5,6Х3,3 СМ
- МАТЕРИАЛ: АБСПЛАСТИК + ПИЩЕВОЙ СИЛИКОН
- ВЕС: ~ 200 ГРАММ

КОМПЛЕКТАЦИЯ:


- VACU SUPER LIPS ВАКУУМНЫЙ МАССАЖЕР GEZATONE – 1 ШТ
- ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ФОРМЫ ГУБ – 1 ШТ
- ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ – 1 ШТ
- ПРОВОД ДЛЯ ЗАРЯДКИ – 1 ШТ





сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

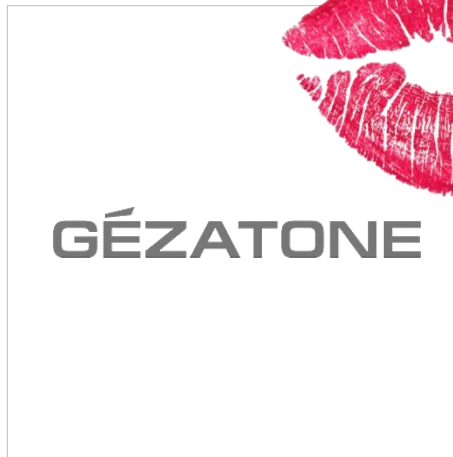

Москва 8 (495) 120-10-80
регионы РФ: 8(800) 500-95-94
(звонок бесплатный)



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.sozv.ru/>