

# GÉZATONE



## ДАРСОНВАЛЬ ИМПУЛЬСНЫЙ МАССАЖЕР С 3мя НАСАДКАМИ

Модель D 307





## РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ПОРТАТИВНЫЙ АППАРАТ GEZATONE BIOLIFT4 D307 ОБЛАДАЕТ ШИРОКИМ СПЕКТРОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ЭСТЕТИЧЕСКИХ НЕДОСТАТКОВ КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С ВЫПАДЕНИЕМ ВОЛОС.



» ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА АКНЕ, ПОСТАКНЕ, ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ



» КОЖА СО СНИЖЕННЫМ ТОНУСОМ, МОРЩИНАМИ, ТУСКЛАЯ



» ЖИРНАЯ КОЖА, ПОВЫШЕННОЕ САЛОУТДЕЛЕНИЕ, РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ



» РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ОБЛЫСЕНИЯ, СЕБОРЕЯ, ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА ВОЛОС



» РУБЦЫ, ОЖОГИ, ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ РАНЫ, ГЕМАТОМЫ, УШИБЫ



» ЦЕЛЛЮЛИТ



## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

### АППАРАТ GEZATONE BIOLIFT4 D307

СТИМУЛИРУЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ, УМЕНЬШАЕТ СПАЗМ МЫШЦ И НОРМАЛИЗУЕТ РАБОТУ САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ, ПОВЫШАЕТ АКТИВНОСТЬ ВОЛОСЯНЫХ ФОЛЛИКУЛОВ И ОБЛАДАЕТ РЯДОМ ДРУГИХ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ. ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ МОЩНЫМ АНТИСЕПТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ.



ДЛЯ МУЖЧИН  
И ДЛЯ ЖЕНЩИН



ШИРОКИЙ СПЕКТР  
ПРИМЕНЕНИЯ



СТИМУЛЯЦИЯ  
КРОВООБРАЩЕНИЯ



БАКТЕРИЦИДНОЕ  
ДЕЙСТВИЕ




СТИМУЛЯЦИЯ  
РЕГЕНЕРАЦИИ



ТОНИЗАЦИЯ  
КОЖИ



ПОВЫШЕНИЕ  
МЕТНОГО  
ИММУНИТЕТА

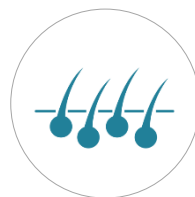

АКТИВИЗАЦИЯ  
РОСТА ВОЛОС



РЕГУЛЯЦИЯ  
САЛОУДЕЛЕНИЯ



УСТРАНЕНИЕ  
ЗАСТОЙНЫХ  
ЯВЛЕНИЙ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
ПРОЦЕДУРЫ В  
ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ



УДОБНО БРАТЬ  
С СОБОЙ



## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ:** ПРИБОР ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ШИРОКОГО СПЕКТРА КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, КАК ЖЕНЩИНАМ, ТАК И МУЖЧИНАМ.

ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРЫ **КОМПЛЕКСНОГО УХОДА** ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА, ТЕЛА, ГОЛОВЫ

АППАРАТ **УДОБНО ДЕРЖАТЬ** В РУКЕ И ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРЫ НА ЛЮБОМ УЧАСТКЕ ЛИЦА И ТЕЛА, В ЛЮБОМ МЕСТЕ И В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.

ПРИБОРОМ ЛЕГКО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ, ПРОЦЕДУРА ЗАНИМАЕТ ВСЕГО **15 МИНУТ**



КОМПАКТНЫЙ  
РАЗМЕР  
УДОБНО ДЕРЖАТЬ  
В РУКЕ



3 СТЕКЛЯННЫХ  
ЭЛЕКТРОДА



ПЛАВНАЯ  
РЕГУЛИРОВКА  
ИНТЕНСИВНОСТИ



УДОБНАЯ  
РУКОЯТКА



ВРЕМЯ  
ПРОЦЕДУРЫ  
15 МИНУТ

Арт. 1301243



## ЭЛЕКТРОДЫ - НАСАДКИ

### НАСАДКА – РАСЧЕСКА



ПРИМЕНЯЕТСЯ **ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОЖУ ГОЛОВЫ** ПРИ ПРОБЛЕМАХ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ РОСТА ВОЛОС, ДЛЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ ВЫПАДЕНИЯ И АКТИВИЗАЦИИ ЛУКОВИЦ. ПОМОГАЕТ СПРАВИТЬСЯ С ПРОБЛЕМОЙ СЕБОРЕИ, НОРМАЛИЗОВАТЬ РАБОТУ САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ КОЖИ ГОЛОВЫ.

### НАСАДКА – ГРИБОК



ЯВЛЯЕТСЯ **УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАСАДКОЙ**, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА ДЛЯ ПРОЦЕДУР КАК ПО ЛИЦУ, ТАК И ПО ТелУ. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КОНТАКТНОЙ МЕТОДИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ. РАБОЧАЯ ПЛОЩАДЬ ОХВАТА ОКОЛО 2,5 см

### НАСАДКА – КАПЕЛЬКА



ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КОНТАКТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕБОЛЬШИЕ УЧАСТКИ КОЖНОГО ПОВЕРХНОСТИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ «ПРИЖИГАНИЯ» ВОСПАЛЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПУТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ (ПРЫЩИКИ И ГЕРПЕС).



## ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА



3 СТЕКЛЯННЫХ  
ЭЛЕКТРОДА

РЕГУЛЯТОР  
ИНТЕНСИВНОСТИ



СТЕКЛЯННЫЙ ЭЛЕКТРОД

ГНЕЗДО ДЛЯ УСТАНОВКИ  
СТЕКЛЯННОГО ЭЛЕКТРОДА

КОРПУС АППАРАТА

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ /  
ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Арт. 1301243



## КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

ПРОЦЕДУРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА GEZATONE BIOLIFT4 D307 ПРОВОДЯТСЯ ПО СУХОЙ КОЖЕ.  
КОЖА ДОЛЖНА БЫТЬ ОЧИЩЕНА ОТ ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ.

ЖИРНАЯ, ПРОБЛЕМНАЯ,  
ПОРИСТАЯ КОЖА

ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ



ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ  
ДЛЯ ЖИРНОЙ И  
СМЕШАННОЙ КОЖИ  
«КОНТРОЛЬ»  
4515477A – 150 мл

КОРРЕКТИРУЮЩИЙ УХОД



СЫВОРОТКА ДЛЯ  
ЖИРНОЙ И  
СМЕШАННОЙ КОЖИ  
«КОНТРОЛЬ»  
4515479A – 30 мл

КОЖА СО СНИЖЕННЫМ  
ТОНУСОМ,  
ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ



ТОНИК  
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ  
«МАТРИКСИЛ»  
4515866A – 150 мл

КОРРЕКТИРУЮЩИЙ УХОД



СЫВОРОТКА С  
ПЕПТИДАМИ ДЛЯ  
ЛИЦА «СИЯЮЩИЙ  
ЦВЕТ»  
4506020K – 30 мл

ПРОБЛЕМЫ ВЫПАДЕНИЯ,  
ЗАМЕДЛЕНИЯ РОСТА ВОЛОС,  
СЛАБЫЕ, ТУСКЛЫЕ ВОЛОСЫ

ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ



ШАМПУНЬ ПРОТИВ  
ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС  
БИОТИНА, КАТИВА  
65503155 – 250 мл

КОРРЕКТИРУЮЩИЙ УХОД



КОНЦЕНТРАТ  
ПРОТИВ  
ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС  
БИОТИНА, КАТИВА  
65503159 – 3\*4мл

ЦЕЛЛЮЛИТ  
ЗАСТОЙНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ



АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ  
САХАРНЫЙ СКРАБ  
PHYTOSONIC  
4516201 – 200 мл

КОРРЕКТИРУЮЩИЙ УХОД



АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ  
КРЕМ PHYTOSONIC  
4516207 – 200 мл





## РЕЗУЛЬТАТЫ\*

- УЛУЧШАЕТСЯ ЦВЕТ ЛИЦА, СОКРАЩАЮТСЯ РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ
- НОРМАЛИЗУЕТСЯ САЛООТДЕЛЕНИЕ, УМЕНЬШАЕТСЯ ЖИРНЫЙ БЛЕСК, КОЖА СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ ЗДОРОВОЙ И МАТОВОЙ
- УМЕНЬШАЕТСЯ ВОСПАЛЕНИЕ,
- ИНФИЛЬТРАТЫ, РУБЦЫ И ШРАМЫ БЫСТРЕЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ
- УМЕНЬШАЕТСЯ ОТЕЧНОСТЬ
- ПОВЫШАЕТСЯ ТОНУС КОЖИ
- УСКОРЯЕТСЯ РОСТ ВОЛОС, УМЕНЬШАЕТСЯ СЕБОРЕЯ, СОКРАЩАЕТСЯ ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС
- УМЕНЬШАЮТСЯ ЗАСТОЙНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И ОТЕЧНОСТЬ
- ПОВЫШАЕТСЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫХ ПРОЦЕДУР

*\*При курсовом применении прибора*







## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ
- АРИТМИИ (МЕРЦАТЕЛЬНАЯ АРИТМИЯ, ПАРОКСИЗМАЛЬНАЯ ТАХИКАРДИЯ, ГРУППОВАЯ ЭКСТРАСИСТОЛИЯ), НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ СВЫШЕ II Б СТЕПЕНИ
- ЗАБОЛЕВАНИЯ КРОВИ, ТРОМБОФЛЕБИТЫ, ПОНИЖЕННАЯ СВЕРТЫВАЕМОСТЬ КРОВИ
- КУПЕРОЗ И ТЕЛЕАНГИОЭКТАЗИИ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
- ГИРСУТИЗМ
- ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР ИЛИ ДРУГИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ИМПЛАНТАТЫ
- ЭПИЛЕПСИЯ
- ХРОНИЧЕСКИЕ ДЕРМАТИТЫ И ДЕРМАТОЗЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ, АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ НА КОЖЕ В МЕСТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИБОРА
- ОСТРЫЕ ПРОЦЕССЫ И ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЛИХОРАДОЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ
- ТУБЕКУЛЁЗ
- НАРУШЕНИЯ КОЖНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛИЦЕВОГО НЕРВА
- ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА
- НАЛИЧИЕ ИМПЛАНТАТОВ, РАСПОЛАГАЮЩИХСЯ ПОД КОЖЕЙ ИЛИ В МЫШЦАХ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ (ЗОЛОТЫЕ НИТИ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБКИ)
- ОСТРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ГРИПП, ОРВИ, ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА.
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ТОКОВ.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФОРМА ВЫХОДНОГО СИГНАЛА: ИМПУЛЬСНЫЙ С  
ВЫСОКОЧАСТОТНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ  
ЧАСТОТА СЛЕДОВАНИЯ ИМПУЛЬСОВ: 100Гц  
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСОВ: 60 мкс  
ЧАСТОТА ВЧ ЗАПОЛНЕНИЯ: 120 кГц  
СРЕДНИЙ ТОК НЕ БОЛЕЕ: 200 мкА  
ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: не более 30 кВ  
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ: сеть АС 220В, 50Гц  
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: не более 10 Вт

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПРИБОР Gezatone Biolift4 D307 – 1 шт.  
СТЕКЛЯННЫЙ ЭЛЕКТРОД ГРИБОК – 1 шт.  
СТЕКЛЯННЫЙ ЭЛЕКТРОД КАПЛЯ – 1 шт.  
СТЕКЛЯННЫЙ ЭЛЕКТРОД РАСЧЕСКА – 1 шт.  
КОРОБКА – 1  
ИНСТРУКЦИЯ – 1

Арт. 1301243



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



GÉZATONE



Москва 8 (495) 120-10-80  
регионы РФ: 8(800) 500-95-94  
(звонок бесплатный)



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.sozv.ru/>