

SENSICA

sensiLight™ Mini

.....

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
БЕЗОПАСНОГО И ЭФФЕКТИВНОГО
УДАЛЕНИЯ ВОЛОС



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

ПРОБЛЕМЫ




НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ВОЛОСЫ НА ЛИЦЕ И ТЕЛЕ? РАЗДРАЖЕНИЕ ОТ ВОСКА И БРИТЬЯ? ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА?
С ФОТОЭПИЛЯТОРАМИ SENSILIGHT MINI ЭТИХ ПРОБЛЕМ НЕ СУЩЕСТВУЕТ.



» БОЛЬ, РАЗДРАЖЕНИЕ ПРИ
ДЕПИЛЯЦИИ ВОСКОМ



» ВОЛОСЫ В ПОДМЫШЕЧНЫХ ВПАДИНАХ

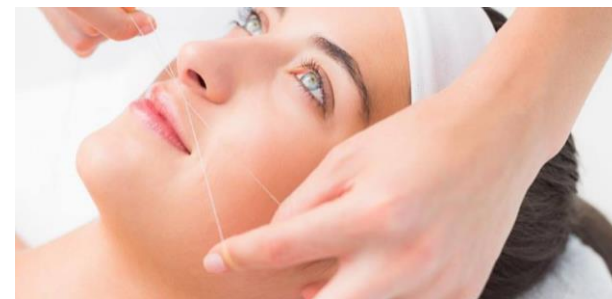

» ВОЛОСЫ НА ЛИЦЕ



» ВОЛОСЫ НА НОГАХ, РУКАХ, НА ТЕЛЕ



» РАЗДРАЖЕНИЕ ПОСЛЕ БРИТЬЯ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ



ИНТУИТИВНО




ЭФФЕКТИВНО



БЕЗОПАСНО



УДОБНО

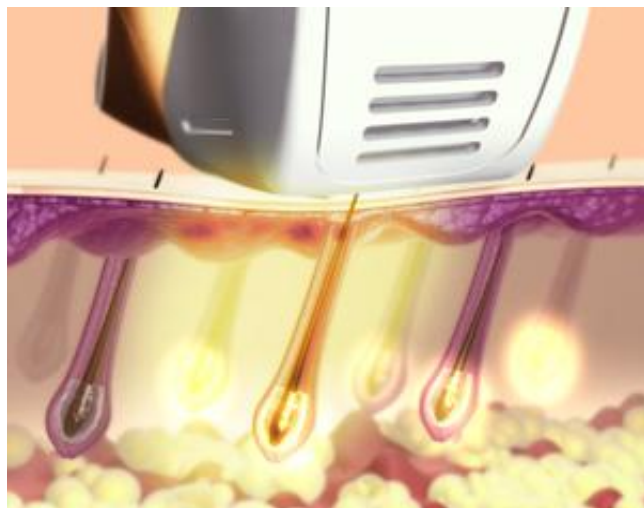

RPL™ (АКТИВНОЕ ИМПУЛЬСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ)

ПРИНЦИП ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОТОТЕРМОЛИЗА. ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ RPL™ ОСНОВАНА НА ПРОВЕРЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ИМПУЛЬСОВ ВЫСОКОИНТЕНСИВНОГО СВЕТА (IPL) В СОЧЕТАНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИКАЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ СОСТОЯНИЯ КОЖИ.

RPL™ ПРОНИКАЕТ В ДЕРМУ ЧЕРЕЗ ЭПИДЕРМИС И ПОГЛОЩАЕТСЯ МЕЛАНИНОМ В СТЕРЖНЕ ВОЛОСА.

ПРИ ЭТОМ ГЕНЕРИРУЕТСЯ ТЕПЛО, КОТОРОЕ ПРОНИКАЕТ В ФОЛЛИКУЛЫ, ВЫЗЫВАЕТ ЛОКАЛЬНЫЙ РАЗОГРЕВ, ЧТО ВЕДЕТ К РАЗРУШЕНИЮ ФОЛЛИКУЛА И СОКРАЩЕНИЮ РОСТА ВОЛОС.

ПРЕИМУЩЕСТВА RPL™ ТЕХНОЛОГИИ

.....

ИНТУИТИВНО



Комплект уникальных датчиков непрерывно реагирует на фототип кожи и её состояние, обеспечивая экспертную точность.

ЭФФЕКТИВНО



Высокоскоростные вспышки с короткими интервалами позволяют быстро обработать большую поверхность.

БЕЗОПАСНО



Аппликатор прибора излучает импульсы только при полном контакте с кожей.


УДОБНО



Компактный, эргономичный прибор позволяет наслаждаться гладкой кожей, просто и без боли - в комфорте вашего дома.



	PROFESSIONAL IPL	SENSILIGHT MINI
ДЛИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ	✓	✓
БЕЗБОЛЕЗНЕННОСТЬ		✓
ПРАКТИЧНОСТЬ		✓
БЕЗ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОЖУ	✓	✓
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОМА		✓

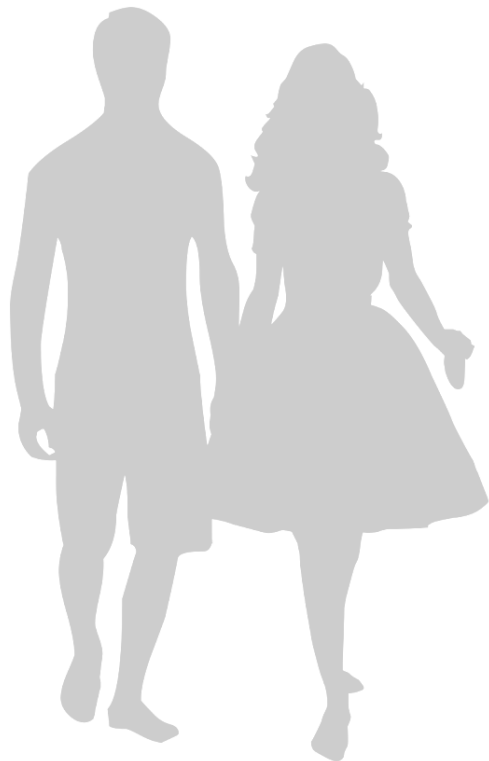

КТО МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

.....

**SENSILIGHT™ MINI ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ
ДЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН, КОТОРЫЕ ХОТЯТ
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ВОЛОС.**

1✓



2✓



3✓



4✓



5✓



6✗



ТАБЛИЦА ЦВЕТОВЫХ ТИПОВ КОЖИ ПО ФИЦПАТРИКУ.

SENSILIGHT MINI МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ, КРОМЕ 6го ТИПА.



ПОДМЫШКИ




РУКИ, ПЛЕЧИ



НОГИ, БЕДРА



БИКИНИ, ЖИВОТ

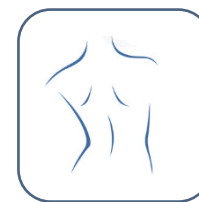

БОЛЬШИЕ
ПОВЕРХНОСТИ



ЛИЦО



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

SENSILIGHT MINI 50



НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ДОЛГОВРЕМЕННЫМИ
И ЭФФЕКТИВНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ БЕЗ
УСИЛИЙ!

ДОСТУПНОЕ И ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ

- ДО 50 000 ВСПЫШЕК
- ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ БОЛЬШИХ УЧАСТКОВ ТЕЛА
- 3 УРОВНЯ
- 2 РЕЖИМА: ИНИЦИИРОВАННЫЕ ИМПУЛЬСЫ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ ИМПУЛЬСЫ
- ПРОДВИНУТЫЙ МЕХАНИЗМ ДВОЙНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
- ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
- ДО 7 МИНУТ НА ОБРАБОТКУ ГОЛЕНИ
- ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ ЛЕГКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ТРУДНОДОСТУПНЫЕ УЧАСТКИ ТЕЛА
- БЫСТРО И БЕЗБОЛЕЗНЕННО



Арт. 1111660



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

SENSILIGHT MINI 100



НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ДОЛГОВРЕМЕННЫМИ
И ЭФФЕКТИВНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ БЕЗ
УСИЛИЙ!

ДОСТУПНОЕ И ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ

- ДО 100 000 ВСПЫШЕК
- ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ БОЛЬШИХ УЧАСТКОВ ТЕЛА
- 3 УРОВНЯ
- 2 РЕЖИМА: ИНИЦИИРОВАННЫЕ ИМПУЛЬСЫ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ ИМПУЛЬСЫ
- ПРОДВИНУТЫЙ МЕХАНИЗМ ДВОЙНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
- ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
- ДО 7 МИНУТ НА ОБРАБОТКУ ГОЛЕНИ
- ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ ЛЕГКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ТРУДНОДОСТУПНЫЕ УЧАСТКИ ТЕЛА
- БЫСТРО И БЕЗБОЛЕЗНЕННО



Арт. 1111661



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ



ГЛАДКАЯ КОЖА



БЕЗ ВОЛОС




БЕЗ БОЛИ



БЕЗ
РАЗДРАЖЕНИЯ



КОМФОРТНО

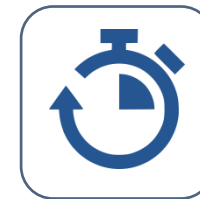

БЫСТРО

ВНЕШНИЙ ВИД



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- СПЕКТР ИЗЛУЧЕНИЯ СВЕТА (ДИАПАЗОН ДЛИН ВОЛН): от 475 нм до 1200 нм.
- ПЛОТНОСТЬ ИЗЛУЧАЕМОЙ ЭНЕРГИИ: 5 Дж/см²
- ВЫБИРАЕМЫЕ УРОВНИ ЭНЕРГИИ: 3 УРОВНЯ
- ПЛОЩАДЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ (ОКНО): 3 см²
- СКОРОСТЬ: 1 ИМПУЛЬС КАЖДЫЕ 3 СЕКУНДЫ
- ВНЕШНИЙ БЛОК ПИТАНИЯ: ВХОД АС 100–240 В, 50–60 ГЦ, ВЫХОД ДС 12 В, 1.8 А
- ГАБАРИТЫ И ВЕС ПРИБОРА: 220 грамм, 135 X 45 X 75 мм

- ТЕХНОЛОГИЯ: ИМПУЛЬСЫ ВЫСОКОИНТЕНСИВНОГО СВЕТА (IPL) ДЛЯ ДОМАШНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
- КОЛИЧЕСТВО ВСПЫШЕК: 50 000/100 000 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДИФИКАЦИИ)

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- ВОЗРАСТ ДО 18 ЛЕТ
- ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ И ЛАКТАЦИИ
- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
- ЭПИЛЕПСИЯ, ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА
- В ТЕЧЕНИЕ 8 НЕДЕЛЬ ПОСЛЕ ЛАЗЕРНОЙ ШЛИФОВКИ, ХИМИЧЕСКИХ ПИЛИНГОВ
- АРИТМИИ, НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ СВЫШЕ II Б СТЕПЕНИ
- НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ: ОЖОГИ, РАНЫ, ССАДИНЫ, ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ
- СКЛОННОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ КЕЛОИДНЫХ РУБЦОВ
- ХРОНИЧЕСКИЕ ДЕРМАТИТЫ И ДЕРМАТОЗЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ, АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ НА КОЖЕ В МЕСТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
- ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ГНОЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ, АКНЕ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- ОСТРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ГРИПП, ОРВИ, ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА.
- ПРИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПОВЫШАЮЩИХ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КОЖИ К СВЕТУ.



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



Москва 8 (495) 925-00-34
регионы РФ: 8-800-200-00-34 (звонок
бесплатный)



<http://www.sozv.ru/>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>